



**Art. 2203 / Art. 2303 / Art. 2403**


**Consta de:**

- 1 SEGUFIX® - Sujeción-tórax
- 2 SEGUFIX® - Cierres (sin llave)

**Tallas:** XS / S / M / L / XL

**Modelos:** modelo básico / r

**Pieza por separado:** art. 2103  
(sin cierre y sin llave)

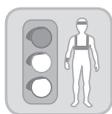

La SEGUFIX® - Sujeción-tórax (etiqueta roja) forma parte del SEGUFIX® - Sistema de cama y está compuesta de una mezcla de algodón y viscosa.

Aviso: Requiere del SEGUFIX® - Estándar con cinta perineal / fijador-muslos (ver imagen)

3 variantes → SEGUFIX® - Cierres:		
1206 / 1208	1306 / 1308	1406 / 1408
Art. 2203	Art. 2303	Art. 2403

Índice	Página
SEGUFIX® - Sujeción-tórax – Instrucciones de uso	2 - 4
Tabla: modelos, tallas, dimensiones y peso	5
SEGUFIX® - Sistemas de cierre	6 - 7
SEGUFIX® - Instrucciones de seguridad y advertencias	8 - 11
Instrucciones de mantenimiento	12
Información corporativa	12


Modelos – número de artículo / identificación	
Nº art. / modelo	Características del producto
...	modelo básico
.../r	reforzado, para mayor resistencia

3 variantes de cierres:

Art. 2203 / 2303 / 2403

## Uso previsto:

- impide el deslizamiento del paciente hacia arriba del SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal/fijador-muslos
- para la aplicación de medidas privativas de libertad (p. ej. en cuadros clínicos o discapacidades que requieren de determinado posicionamiento en cama, para restringir movimientos dañinos y evitar lesiones autoinflingidas, o a terceros, en estados de agitación)

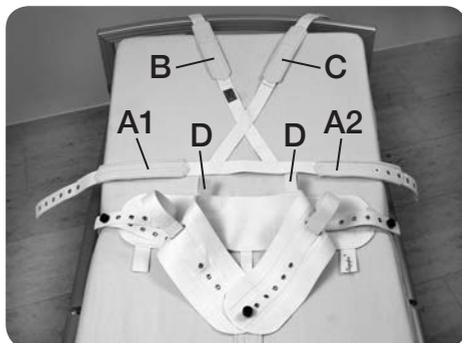

## Instrucciones de uso para Art. 2203 / 2303 / 2403 y 2103



Para cierres y llaves ver páginas 6 y 7

Instale inicialmente el SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal o fijador-muslos a la cama. Las indicaciones detalladas para su instalación las consigue en sus respectivas instrucciones de uso.

## Instalar la SEGUFIX®-Sujeción-tórax al cinturón abdominal:



La SEGUFIX®-Sujeción-tórax consta de tres cintas de ojales conectadas entre ellas: la cinta-tórax (A1/A2) y las dos cintas-hombros (B y C).

- Coloque la cinta-tórax (A1/A2) – paralelamente al cinturón abdominal del SEGUFIX®-Estándar – sobre la cama. Las hebillas metálicas (4) de las cintas-hombros (B y C) deben señalar hacia el colchón.
- Introduzca los extremos de la cinta-tórax (A1/A2) – en dirección borde de la cama – en sus respectivos pasadores (D) que se encuentran en el cinturón abdominal del SEGUFIX®-Estándar.
- La SEGUFIX®-Sujeción-tórax se encuentra instalada al cinturón abdominal del SEGUFIX®-Estándar, lista para ser colocada al paciente.

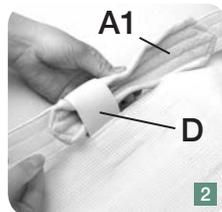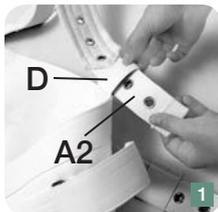



## Colocar la SEGUFIX®-Sujeción-tórax al paciente:

- Inserte el vástago del cierre (1) en uno de los ojales que se encuentran en el bolsillo para el vástago de la cinta-hombro (C).

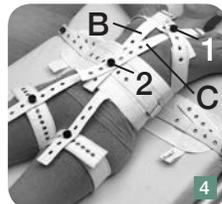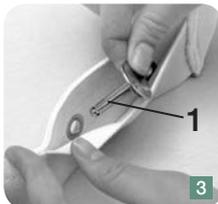


### Al utilizar el SEGUFIX®-Estándar con fijador-muslos:

- Lleve ambas cintas-hombros (B y C) – que señalan hacia la cabecera – de forma ajustada sobre los hombros del paciente y encájelas sobre el vástago del cierre abierto (2) que se encuentra en el centro del cinturón abdominal del SEGUFIX®-Estándar.
- Cierre el cierre (2) (imagen 4). Ahora las hebillas metálicas (4) de las cintas-hombros señalan hacia arriba.
- Introduzca el extremo de la cinta-tórax (A1) – pasando por debajo de la axila derecha del paciente – en uno de los pasadores (E) de la cinta-hombro (B) y encaje la cinta-tórax (A1) sobre el vástago del cierre (1), de forma que quede bien ajustada al cuerpo.
- Encaje también el otro extremo de la cinta-tórax (A2) – pasando por debajo de la axila izquierda – ajustadamente sobre el vástago del cierre (1).
- Cierre el cierre (1).
- Verifique que todos los cierres estén cerrados correctamente.  
A continuación, suba las barandillas de la cama.

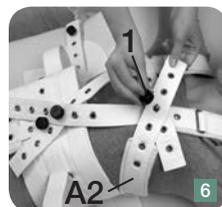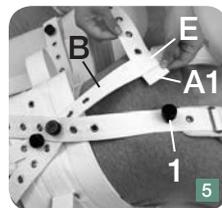

### Al utilizar el SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal, en todos sus modelos, o el SEGUFIX®-Estándar con fijador-muslos en los modelos «r» o «f»:

- Inserte el vástago de un cierre adicional (3) (incluido en el envío) en un ojal diferente de la cinta-perineal o del cinturón abdominal, lleve las cintas-hombros (B y C) sobre los hombros y encájelas sobre el vástago del cierre adicional (3). Ahora las hebillas metálicas (4) de las cintas-hombros deben señalar hacia arriba.
- Cierre el cierre (3).
- Introduzca el extremo de la cinta-tórax (A1) – pasando por debajo de la axila derecha del paciente – en uno de los pasadores (E) de la cinta-hombro (B) y encaje la cinta-tórax (A1) sobre el vástago del cierre (1), de forma que quede bien ajustada al cuerpo.
- Encaje también el otro extremo de la cinta-tórax (A2) – pasando por debajo de la axila izquierda – ajustadamente sobre el vástago del cierre (1).
- Cierre el cierre (1).
- Verifique que todos los cierres estén cerrados correctamente.  
A continuación, suba las barandillas de la cama.

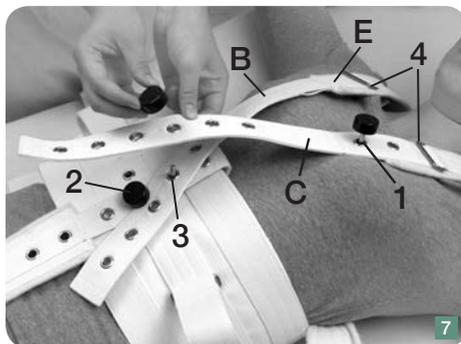


### Importante:

Las cintas-tórax (A1/A2) deben ser instaladas justo debajo de las axilas, de lo contrario el paciente podría liberarse. Las cintas no deben perjudicar al paciente en el área del cuello o de la nuca. Las cintas deben quedar bien ajustadas, sin que afecten la respiración del paciente.

## Desinstalar el sistema de sujeción del paciente y de la cama:

En la página 7 se explica el proceso de apertura de los respectivos sistemas de cierre.

- Abra los cierres (1 y 3), retire las cintas del vástago y desprenda del pasador (E).
- A continuación, retire la SEGUFIX®-Sujeción-tórax de los pasadores (D) del cinturón abdominal del SEGUFIX®-Estándar y retire de la cama.

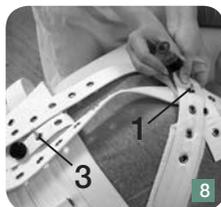

## Consulte las SEGUFIX®-Instrucciones de seguridad en las páginas 8 - 11

**Advertencia:** Antes de usar la SEGUFIX®-Sujeción-tórax, lea las Instrucciones de seguridad.


- La SEGUFIX®-Sujeción-tórax sólo puede ser utilizada en combinación con el SEGUFIX®-Estándar, en todas sus versiones con sistemas de cierre (excluidos productos con cierres Velcro®).
- Cierres bajo presión no se dejan abrir o abren muy difícilmente. Por consiguiente, utilice máximo 4 cintas por cierre. Productos marcados con «r» o «f» poseen cintas más gruesas. En estos casos, sobreponga máximo 3 cintas por cierre. Esto significa que si se utiliza la SEGUFIX®-Sujeción-tórax conjuntamente con el SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal – en todos sus modelos – o con el SEGUFIX®-Estándar con fijador-muslos en los modelos «r» o «f», se debe implementar un cierre adicional (incluido en el envío). Si se utiliza el SEGUFIX®-Cierre magnético giratorio patentado verde (art. 1306), sobreponga un máximo de 4 cintas por cierre. Al utilizar el Cierre a presión (art. 1406), sobreponga un máximo de 3 cintas por cierre.
- La SEGUFIX®-Sujeción-tórax no impide que el paciente eleve el torso en la cama. Para poder impedirlo, se debe complementar con la SEGUFIX®-Sujeción-tórax adicional.
- Advertencia: En pacientes con marcapasos se debe respetar una distancia de seguridad de 10 cm entre el marcapasos y el SEGUFIX®-Sistema de cierre magnético negro/ Sistema de cierre magnético giratorio patentado verde (alternativa: utilizar el Cierre a presión).
- Las cintas de fijación y los mecanismos de movimientos de camas, colchones, colchones con cambios de presión o similares se pueden perjudicar mutuamente. Consecuencias: daños materiales, el mal funcionamiento de éstos y peligro de lesiones.
- Más información sobre los productos en [www.segufix.com](http://www.segufix.com) o [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)

SEGUFIX®-Sujeción-tórax									Ancho de la cinta	Longitud de la cinta	
Talla	Art.	kg	Art.	kg	Art.	kg	Pieza por separado	kg	mm	Cinta a mm	Cinta b mm
XS	2203	0,24	2303	0,28	2403	0,28	2103	0,22	35	600	770
S	2203	0,48	2303	0,52	2403	0,52	2103	0,44	45	860	1190
M	2203	0,52	2303	0,56	2403	0,56	2103	0,50	45	1010	1450
L	2203	0,56	2303	0,60	2403	0,60	2103	0,54	45	1170	1650
XS	2203/r	0,26	2303/r	0,30	2403/r	0,30	2103/r	0,24	35	600	770
S	2203/r	0,47	2303/r	0,51	2403/r	0,51	2103/r	0,46	45	860	1190
M	2203/r	0,55	2303/r	0,59	2403/r	0,59	2103/r	0,53	45	1010	1450
L	2203/r	0,59	2303/r	0,63	2403/r	0,63	2103/r	0,57	45	1170	1650
XL	2203/r	0,63	2303/r	0,67	2403/r	0,69	2103/r	0,61	45	1420	1870

Tablas: medidas y pesos aproximados – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)



Ejemplo de aplicación:  
La SEGUFIX®-Sujeción-tórax y la SEGUFIX®-Sujeción-tórax adicional impiden la elevación del torso en la cama (requiere de una supervisión continua)

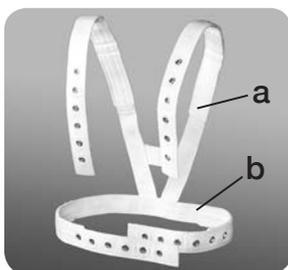

Longitud cinta a y cinta b, ver tabla arriba



SEGUFIX®-Sujeción-tórax  
vista desde atrás, tallas XS / S



SEGUFIX®-Sujeción-tórax  
vista desde atrás, tallas M / L / XL



## SEGUFIX® - Sistema de cierre magnético negro

Artículo	Consta de:
1206	1 Botón magnético negro / segufix.com 1 Vástago metálico
1208	1 Llave magnética roja
1204	1 Botón magnético negro / segufix.com
1205	1 Vástago metálico
1209	1 Llave magnética roja con llavero



## SEGUFIX® - Sistema de cierre magnético giratorio verde

Artículo	Consta de:
1306	1 Botón magnético giratorio patentado verde 1 Vástago cuadrado
1308	1 Llave magnética giratoria amarilla
1304	1 Botón magnético giratorio patentado verde
1305	1 Vástago cuadrado



## Sistema de cierre a presión

Artículo	Consta de:
1406	1 Botón del cierre a presión 1 Vástago del cierre a presión
1408	1 Llave para el cierre a presión
1404	1 Botón del cierre a presión
1405	1 Vástago del cierre a presión

### Uso previsto (cierre):

Para cerrar de forma segura los sistemas SEGUFIX®.

### Uso previsto (llave):

Para abrir rápidamente los cierres.

### Atención:

Los componentes de los distintos sistemas de cierre no son compatibles entre ellos.



**Advertencia:** Antes de usar los SEGUFIX® -Sistemas de cierre, lea las Instrucciones de seguridad.

- No sumerja los cierres en líquido, de lo contrario dejarán de funcionar.
- Los cierres y las llaves no deben ser lavados en la lavadora.
- Antes de cada uso, verifique el correcto funcionamiento del cierre.
- Examine si la cabeza del vástago está dañada o desgastada.
- Una vez cerrado el cierre, el botón debe encajar en el vástago; no se debe poder desprender más.
- Para poder abrir los cierres, debe garantizarse la movilidad entre el punto superior e inferior del punto de anclaje del cierre (art. 1206). Por consiguiente, sobreponga máximo 4 cintas por cierre. (Excepción: productos marcados con «r» o «f» en el número de identificación del artículo, los cuales poseen cintas más gruesas. En estos casos, sobreponga máximo 3 cintas por cierre!). El cierre magnético giratorio patentado verde (art. 1306) permite sobreponer un máximo de 4 cintas por cierre! El cierre a presión (art. 1406) permite sobreponer un máximo de 3 cintas por cierre!
- Si los cierres defectuosos no logran ser abiertos con su llave, se pueden cortar las cintas con tijera o con un cortador de cintas.
- Más información sobre los productos en [www.segufix.com](http://www.segufix.com) o [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)

## Instrucciones de uso para los SEGUFIX® -Sistemas de cierre:

**Art. 1206 / 1208** (SEGUFIX®-Cierre magnético negro)

**Art. 1306 / 1308** (SEGUFIX®-Cierre magnético giratorio patentado verde)

**Art. 1406 / 1408** (Cierre a presión)

### Abrir los cierres:

#### Art. 1206 / 1208

- Con un leve golpe, coloque la llave roja encima del cierre magnético negro.
- Retire la llave junto con el botón negro del vástago (imagen 1).



#### Art. 1306 / 1308

- Coloque la llave amarilla encima del cierre magnético verde.
- Abra el cierre girando la llave junto con el botón verde del vástago (imagen 3).



#### Art. 1406 / 1408

- Inserte y presione la llave en los orificios del botón del cierre a presión.
- Retire la llave junto con el botón del vástago (imagen 2).



### Cerrar los cierres:

- Encaje el orificio del botón sobre su correspondiente vástago.
- Verifique el correcto funcionamiento del cierre: el botón no se debe poder desprender más del vástago.

**Atención:** Los componentes de los distintos sistemas de cierre no son compatibles entre ellos.

**Consulte las SEGUFIX®-Instrucciones de seguridad en las páginas 8 - 11**

Las instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso únicamente son válidas para productos originales SEGUFIX®. No utilice el sistema SEGUFIX® si no ha leído y entendido todas las instrucciones y las medidas de seguridad.

Utilice únicamente las instrucciones de uso actualizadas y guarde las instrucciones. Producto e instrucciones de uso deben coincidir. El uso inadecuado del sistema SEGUFIX® puede ocasionar lesiones graves inclusive la muerte. La seguridad de su paciente depende del uso correcto del sistema SEGUFIX®.

## 1. Condiciones de uso

El uso correcto del producto, tomando en cuenta las disposiciones legales nacionales, corresponde a la organización que aplica el sistema SEGUFIX®. Respete siempre los reglamentos internos para la inmovilización médica, sus protocolos de sujeción y la legislación pertinente vigente. Deben cumplirse las instrucciones de uso.

Los productos SEGUFIX® únicamente deben ser aplicados por personal capacitado, debidamente entrenado. Disposiciones legales e indicaciones médicas deben respetarse estrictamente! El médico tratante debe asegurar que el paciente tenga un estado de salud que permita la aplicación del sistema SEGUFIX®.

## 2. Uso previsto

Los productos SEGUFIX® deben ser utilizados exclusivamente para fines medicinales.

## 3. Retire objetos peligrosos

Retire todos los objetos al alcance del paciente con los que se pueda autolesionar o con los cuales el paciente pueda dañar las cintas (por ejemplo: gafas, joyas, objetos afilados o punzantes).

## 4. Inspeccione el sistema de sujeción antes de cada uso



Antes de utilizar el producto, revise que el producto no tenga: costuras lacerantes, partes deterioradas u ojales dañados. Productos defectuosos pueden implicar limitaciones en sus funciones y causar lesiones. No utilice productos defectuosos y/o deteriorados.

## 5. Los cierres no deben estar bajo presión

Para poder abrir los cierres, debe garantizarse la movilidad entre la parte superior e inferior del punto de anclaje del cierre (art. 1206). Por consiguiente, sobreponga máximo 4 cintas por cierre (excepción: productos con «r» o «f» en el número de identificación del artículo los cuales son fabricados con cintas más gruesas. En este caso: ¡sobreponga máximo 3 cintas por cierre!). El SEGUFIX®-Cierre magnético giratorio patentado verde (art. 1306) permite sobreponer un máximo de 4 cintas por cierre. El cierre a presión (art. 1406) permite sobreponer un máximo de 3 cintas por cierre.



## 6. Utilice las fijaciones laterales

No utilice el sistema SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal o con fijador-muslos sin las fijaciones laterales. Sin las fijaciones laterales, el paciente puede rotar con el cinturón abdominal puesto o deslizarse del borde de la cama con la posibilidad de sufrir una compresión torácica y fallecer. Si algunos pacientes logran alcanzar el borde de la cama, a pesar de haber implementado las fijaciones laterales y haber subido las barandillas de la cama, es necesario recurrir a otras medidas adicionales de sujeción.

**Importante:** Introduzca las fijaciones laterales – antes de amarrar – por sus respectivos pasadores ubicados en la cinta ancha de cama (ver instrucciones de uso).

## 7. Preste atención en camas, asientos y camillas:


- Los productos SEGUFIX® sólo deben ser utilizados en camas, asientos estables y en camillas que permitan una instalación conforme a las instrucciones de uso.
- Los productos SEGUFIX® deben ser instalados de forma que no se puedan deslizar.
- Los sistemas de sujeción y los mecanismos de movimientos de camas, colchones, colchones con cambios de presión etc., camillas o asientos pueden perjudicarse mutuamente. Consecuencias: daños materiales, el mal funcionamiento de éstos y peligro de lesiones.
- Los puntos de fijación elegidos no deben presentar bordes afilados.
- Los productos SEGUFIX® no impiden que las camas, asientos y camillas se vuelquen o se desplacen de su sitio.

De gran ayuda en este contexto:

Norma para camas: DIN EN 60601-2-52

Norma para sillas de ruedas: DIN EN 12182 y DIN EN 12183

## 8. Las barandillas de la cama deben estar elevadas

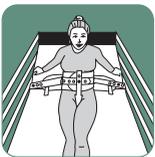

Para evitar accidentes durante la sujeción, es necesario subir las barandillas de la cama (excepción: sujeción de 5 puntos).

Atención: En caso de barandillas discontinuas, es necesario aplicar una pieza adicional protectora “gap protector” con el fin de evitar el deslizamiento del paciente a través de la abertura. Con barandillas discontinuas es posible que el paciente, a pesar de estar sujetado, resbale a través de

la abertura – con el riesgo de sufrir una compresión torácica.

## 9. Supervise los pacientes inmovilizados



Pacientes inmovilizados deben ser supervisados constantemente.

Pacientes agresivos, agitados e inquietos, o aquellos que corren peligro de ahogamiento, requieren de una supervisión continua.

## 10. Inspeccione los sistemas de cierre antes de cada uso



Inspeccione si los SEGUFIX®-Cierres magnéticos negros/segufix.com, los SEGUFIX®-Cierres magnéticos giratorios patentados verdes, los cierres a presión, los cierres clic, los cierres Velcro® y los cierres de hebilla funcionan y cierran correctamente. No sumerja los cierres en líquidos. Los cierres podrían dejar de funcionar o funcionar de forma defectuosa. Si los cierres defectuosos no logran ser abiertos con su llave, puede cortar las cintas con tijera o con un cortador de cintas. Examine si la cabeza del vástago está dañada o desgastada.

## 11. Advertencia referente a marcapasos



En pacientes con marcapasos debe respetarse una distancia de seguridad de 10 cm entre el marcapasos y los cierres magnéticos/llaves magnéticas, ya que éstos podrían ocasionar taquicardias (alternativa: cierre a presión). Referente a posibles perjuicios causados por imanes en otros tipos de implantes, lea las instrucciones del fabricante correspondiente.

## 12. Verifique la instalación de las cintas

Verifique regularmente si las cintas de fijación están correctamente instaladas a la cama. Las cintas deben estar ajustadas firmemente al marco de la cama o, en camas ortopédicas, fije las cintas a las partes móviles. Las cintas no deben deslizarse.

## 13. Utilice únicamente productos SEGUFIX® originales

Por motivos de seguridad, los productos SEGUFIX® no deben ser modificados ni utilizados en combinación con productos de otras marcas. En caso de incumplimiento, se pierde cualquier derecho de reclamación y queda anulada la garantía.

## 14. Uso del sistema SEGUFIX® en vehículos



En automóviles, los cinturones de transporte SEGUFIX® no sustituyen el uso obligatorio de los cinturones de seguridad (cinturón de tres puntos y pelvis). Los cinturones de transporte sólo deben ser utilizados de apoyo adicional o para la sujeción del paciente. Asegúrese de que en caso de emergencia el paciente pueda ser rescatado rápidamente (colocar los cortadores de cintas al alcance de la vista y de la mano).

## 15. Seguro, pero sin apretar

La sujeción tiene que estar bien ajustada sin afectar la respiración y la circulación de la sangre del paciente. Productos poco tensados pueden comprometer la seguridad del paciente. Compruebe regularmente si la sujeción se encuentra en la posición correcta.



## 16. Almacenamiento

Con la finalidad de alargar la vida útil del producto, almacene las cintas y los sistemas de cierre en un lugar seco y sombreado a una temperatura normal de 20 °C.

## 17. Inflamabilidad de los sistemas de cama SEGUFIX®



Según la norma DIN EN 71-2 sección 4.3, las cintas no son inflamables. Según la norma DIN 75200 la velocidad de inflamación es nula. Se sobreentiende que los productos SEGUFIX® no deben entrar en contacto con cigarrillos encendidos, ni ser expuestos a llamas que pueden ser perjudicial para la salud y ocasionar daños materiales.

## 18. Elija siempre la talla adecuada

Elija siempre la talla correcta según el tamaño y la cintura del paciente (ver tabla de tallas). Productos muy grandes / muy pequeños perjudican la comodidad y la seguridad del paciente.

## 19. Reciclaje de residuos

Los cartones deben ser reciclados en el contenedor azul de reciclado de papeles, los embalajes y empaques de plásticos en el contenedor amarillo destinado al reciclaje de envases plásticos y los productos defectuosos en el contenedor negro de desechos residuales.

## 20. Declaración de conformidad

Puede conseguir la declaración de conformidad bajo:  
[https://www.segufix.com/conformity\\_es.php](https://www.segufix.com/conformity_es.php)

## 21. Recomendaciones para evitar accidentes

(Prof. Dr.-Ing. U. Boenick, Universidad Técnica de Berlín):

1. Instale las fijaciones laterales
2. Suba las barandillas de la cama (Excepción: Sujeción de 5-puntos)
3. Es posible que sea necesario implementar más elementos de fijación, para evitar la huida del paciente de la cama.

## 22. Importante antes de cada uso

- Verificar el estado y el correcto funcionamiento de los cierres
- Verificar el estado de las cintas: ojales, pasadores textiles, cierres de Velcro®, cierres clic y cierres de hebilla
- Utilizar sólo con indicaciones suficientes
- Verificar los requerimientos legales

# Instrucciones de mantenimiento

- **Las cintas SEGUFIX®** (blanco natural) compuestas de una mezcla de algodón y viscosilla, pueden ser lavadas en la lavadora a una temperatura máxima de 95 °C.  
Temperaturas bajas y redes de lavado alargan la duración de vida del producto. No es indicado el uso de trenes de lavado y prensado, ya que los ojales de las cintas pueden dañarse. Las cintas no están prelavadas, la posibilidad de encogimiento es de un 8 %.  
Almacene las cintas una vez secas.  
Detergente: no agresivo, sin suavizante y sin blanqueadores (cloro/lejía).  
Secadora: ciclo delicado, a temperatura baja y preferiblemente en red de lavado.  
Desinfección: Se puede aplicar el proceso de desinfección termoquímico de tejidos.  
Sobredosis de detergente daña el material de las cintas.
- **Los cinturones de transporte SEGUFIX®** (colorido/negro) compuestos de poliéster pueden ser lavados en la lavadora a una temperatura máxima de 30 °C.  
Temperaturas bajas y redes de lavado alargan la duración de vida del producto. No es indicado el uso de trenes de lavado y prensado, ya que los ojales de las cintas pueden dañarse. Almacene las cintas una vez secas.  
Detergente: no agresivo, sin suavizante y sin blanqueadores (cloro/lejía).  
Secadora: ciclo delicado, a temperatura baja y preferiblemente en red de lavado.
- **Retire todos los SEGUFIX®-Cierres y vástagos** antes del lavado. Cierres lavados por error, dejarán de funcionar y de ser confiables. Limpie y desinfecte los cierres con un paño húmedo. Nunca sumerja los cierres en líquido.
- **Los cierres de Velcro®** deben ser cerrados antes del lavado y secado en máquina, para evitar la acumulación de pelusas en los ganchos del Velcro®. Para eliminar las pelusas, pase un cepillo duro sobre el cierre del Velcro®. Es normal que debido al uso diario del cierre, se acumulen pelusas en los ganchos del Velcro®. Esto puede reducir su capacidad de adherencia. Antes de cada uso, revise la capacidad de adherencia del Velcro®.
- **La durabilidad** depende de la intensidad de su uso y puede ser prolongada utilizando procedimientos de lavado delicados (detergentes/red de lavado).

Edición 15 · 2019-10

© by SEGUFIX®-Bandagen, 2019

Aplican nuestras condiciones generales de contratación y de suministro:

<https://www.segufix.com/PDFs/AGBs/>

Condiciones\_generales.pdf

Queda reservado el derecho a realizar cambios en los productos. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier modificación de nuestros productos con relación a las ilustraciones y descripciones del presente catálogo.

Quedan reservados todos los derechos.

La reproducción o difusión a través de sistemas electrónicos/soportes de datos, también en forma parcial, sólo se permitirá con el previo consentimiento expreso por escrito.

Todas las consultas deben ser dirigidas a:

**SEGUFIX®-Bandagen**

Das Humane System GmbH & Co. KG

Allerbeeksring 33 · D-21266 Jesteburg · Alemania

Teléfono: +49 (0) 41 83 500-0

Telefax: +49 (0) 41 83 500-200

E-mail: [export@segufix.de](mailto:export@segufix.de)

[www.segufix.com](http://www.segufix.com) · [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)