



Art. 2204 / Art. 2304 / Art. 2404

Consta de:
 2 SEGUFIX® - Fijadores-muñecas
 2 SEGUFIX® - Cierres (sin llave)

Pieza por separado: art. 2104
 (para una mano, sin cierre y sin llave)
Tallas: S / M / L / XL



Art. 2224 / Art. 2324 / Art. 2424

Consta de:
 2 SEGUFIX® - Fijadores-muñecas
 alargados
 4 SEGUFIX® - Cierres
 1 SEGUFIX® - Llave

Pieza por separado: art. 2124
 (para una mano, sin cierre y sin llave)
Tallas: S / M / L / XL

Modelos:
 modelo básico / r



Art. 2724 Sujeción-muñecas Velcro® alargada

Consta de:
 2 SEGUFIX® - Fijadores-muñecas
 Velcro® alargados
 (con cierre de hebilla)

Pieza por separado: art. 2824
 (para una mano)
Talla: M



La SEGUFIX® - Sujeción-muñecas (etiqueta amarilla) forma parte del SEGUFIX® - Sistema de cama y está compuesta de una mezcla de algodón y viscosa.

3 variantes → SEGUFIX® - Cierres:

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| | | |
| 1206 / 1208 | 1306 / 1308 | 1406 / 1408 |
| Art. 2204 | Art. 2304 | Art. 2404 |
| Art. 2224 | Art. 2324 | Art. 2424 |

| Índice | Página |
|--|--------|
| SEGUFIX® - Sujeción-muñecas con cierre – Instrucciones de uso | 2 - 4 |
| SEGUFIX® - Sujeción-muñecas con Velcro® – Instrucciones de uso | 4 - 5 |
| Tabla: modelos, tallas, dimensiones y peso | 5 |
| SEGUFIX® - Sistemas de cierre | 6 - 7 |
| SEGUFIX® - Instrucciones de seguridad y advertencias | 8 - 11 |
| Instrucciones de mantenimiento / Información corporativa | 12 |

Modelos – número de artículo / identificación

| Nº art. / modelo | Características del producto |
|------------------|-----------------------------------|
| ... | modelo básico |
| .../r | reforzado, para mayor resistencia |

3 variantes de cierres:

Art. 2204 / 2304 / 2404

Art. 2224 / 2324 / 2424

Con cierre de Velcro® / de hebilla

Art. 2724

Uso previsto:

- sujeción flexible de una o ambas manos en la cama
- para la aplicación de medidas privativas de libertad (p. ej. en cuadros clínicos o discapacidades que requieren de determinado posicionamiento en cama, para restringir movimientos dañinos y evitar lesiones autoinflingidas, o a terceros, en estados de agitación)

Uso previsto:

- posicionamiento de una o ambas manos en la cama
 - indicado para el uso en camillas
 - no se considera una sujeción debido al Velcro®
- Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Art. 2204 / 2304 / 2404

SEGUFIX®-Sujeción-muñecas



Art. 2224 / 2324 / 2424

SEGUFIX®-Sujeción-muñecas alargada



Art. 2724

SEGUFIX®-Sujeción-muñecas Velcro® alargada




Instrucciones de uso para Art. 2204 / 2304 / 2404 y 2104




Para cierres y llaves ver páginas 6 y 7

Importante: Requiere del SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal / fijador-muslos. Instale inicialmente el SEGUFIX®-Estándar a la cama y al paciente. Las indicaciones detalladas para su instalación las consiguen en sus respectivas instrucciones de uso.

Instalar el fijador-muñeca a la cinta de cama:

- Inserte el vástago del cierre (1) en el ojal que se encuentra en el bolsillo para el vástago, ubicado en la parte acolchada del fijador-muñeca (A).
- En la cinta ancha de cama del SEGUFIX®-Estándar se encuentra el pasador (B). Introduzca la parte acolchada del fijador-muñeca (A) en este pasador – parte acolchada hacia arriba y en dirección paciente – hasta que el pasador (B) se encuentre entre la hebilla metálica (2) y el vástago del cierre (1) del fijador-muñeca.

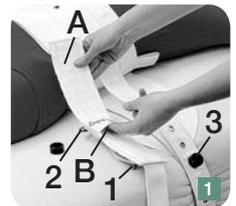

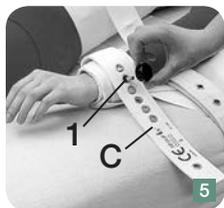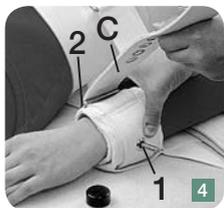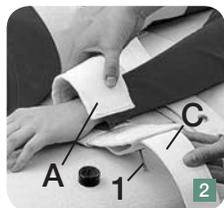


Colocar el fijador-muñeca en las articulaciones del paciente:

- Coloque la parte acolchada del fijador-muñeca (A) ajustadamente alrededor de la muñeca del paciente. Una vez cerrado, el cierre de Velcro® evita que el fijador-muñeca se deslice.
- Introduzca la cinta de ojal (C) en la hebilla metálica (2) y llévala – ahora en dirección contraria – de vuelta por encima de la hebilla.
- Encaje la cinta de ojal (C) firmemente sobre el vástago del cierre (1), eligiendo un ojal. Cierre el cierre (1).
- Fije el ojal (4) al cierre (3) de la cinta de fijación del Estándar.
- Repita el procedimiento para instalar el segundo fijador-muñeca, de ser requerido.
- El fijador-muñeca debe quedar bien ajustado, sin restringir la circulación de la sangre.
- Verifique que todos los cierres estén cerrados correctamente. A continuación, suba las barandillas de la cama.



Instalación alternativa para el fijador-muñeca:

- Coloque el fijador-muñeca, sin pasarlo previamente por el pasador (B) del SEGUFIX®-Estándar.
- Ahora puede fijar la sujeción-muñeca, con el ojal (4), en cualquier cierre. Esto permite fijar la mano o el brazo, según indicación.

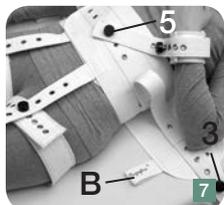

Desinstalar el sistema de sujeción del paciente:

En la página 7 se explica el proceso de apertura de los respectivos sistemas de cierre.

- Abra los cierres (1, 3 y 5) del fijador-muñeca y del cinturón abdominal y desprenda las cintas de los vástagos.
- Retire el fijador-muñeca del paciente y del cinturón abdominal.

Instrucciones de uso para Art. 2224 / 2324 / 2424 y 2124


Para cierres y llaves ver páginas 6 y 7

Puede ser utilizado **sin** el SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal/fijador-muslos.

Instalar la SEGUFIX®-Sujeción-muñecas alargada:

- Inserte los vástagos de los cierres (1 y 3, ver página 4) en uno de los ojales que se encuentran en sus respectivos bolsillos para el vástago.
- Coloque el fijador-muñeca alargado, tal como se describe en las imágenes 2-5 (ver arriba), **sin** introducirlo en el pasador del SEGUFIX®-Estándar.

- Lleve la cinta alargada de fijación (A) – desde adentro hacia afuera – alrededor del marco de la cama o, en camas eléctricas, del marco regulable de la cabecera. Instale la cinta de fijación en un lugar de la cama del cual no se pueda deslizar.
- Elija un ojal al final de la cinta y encájelo sobre el vástago del cierre (3). Debido a los numerosos ojales, se puede regular gradualmente la libertad de movimiento del paciente.
- Cierre el cierre (3).
- Repita el procedimiento para instalar el segundo fijador-muñeca alargado, de ser requerido.
- Verifique que todos los cierres estén cerrados correctamente. A continuación, suba las barandillas de la cama.

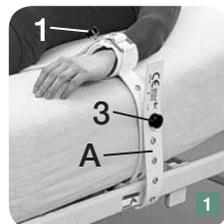

Desinstalar el sistema de sujeción del paciente y de la cama:

En la página 7 se explica el proceso de apertura de los respectivos sistemas de cierre.

- Abra los cierres (1 y 3) del fijador-muñeca y retire las cintas de los vástagos.
- Retire el fijador-muñeca del paciente y de la cama.

Consulte las SEGUFIX®-Instrucciones de seguridad en las páginas 8 - 11


Instrucciones de uso para Art. 2724

Puede ser utilizado **sin** el SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal / fijador-muslos.

Instalar la SEGUFIX®-Sujeción-muñecas Velcro® alargada:

Aviso: Este producto no se considera una sujeción ya que el cierre de Velcro® y los cierres de hebilla pueden ser abiertos por el paciente.

- Coloque la parte acolchada del fijador-muñeca – con la parte acolchada señalando hacia arriba – ajustadamente alrededor de la muñeca del paciente. Una vez cerrado, el cierre de Velcro® evita que el fijador-muñeca se deslice.
- Introduzca la cinta (A) del fijador-muñeca por ambas hebillas metálicas del cierre de hebilla (1), llévela – ahora en dirección contraria – por encima de la segunda hebilla y atravesando la primera. Instale el cierre de hebilla según la imagen 2.
- Lleve la cinta de fijación alargada (B), desde adentro hacia afuera, al rededor del marco de la cama o, en camas eléctricas, al rededor del marco regulable de la cabecera. Instale la cinta de fijación en un lugar de la cama del cual no se pueda deslizar.
- Introduzca el extremo de la cinta alargada de fijación (B) en el cierre de hebilla (2) y ajuste al halar.
- Repita el procedimiento para instalar el segundo fijador-muñeca, de ser requerido.
- El fijador-muñeca debe quedar bien ajustado, sin restringir la circulación de la sangre.
- Verifique que todos los cierres de hebilla estén cerrados correctamente. A continuación, suba las barandillas de la cama.

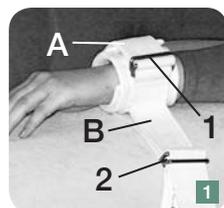

Desinstalar las cintas del paciente y de la cama:

- Abra el cierre de hebilla (1) del fijador-muñeca para poder retirar el producto del paciente.
- Desprenda la cinta de fijación alargada del cierre de hebilla (2) y retire de la cama.

Consulte las **SEGUFIX®-Instrucciones de seguridad en las páginas 8 - 11**

Advertencia: Antes de usar la SEGUFIX®-Sujeción-muñecas, lea las Instrucciones de seguridad.

- La SEGUFIX®-Sujeción-muñecas sólo puede ser utilizada en combinación con el SEGUFIX®-Estándar. Las versiones alargadas de la sujeción de muñecas, tienen cintas alargadas para la fijación directa al marco de la cama y pueden ser utilizadas sin el SEGUFIX®-Estándar.
- La SEGUFIX®-Sujeción-muñecas alargada Velcro® no se considera una sujeción ya que puede ser abierta por medio del paciente. Aviso: Productos con cierres de Velcro® pueden ser considerados como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no logra liberarse por sí mismo.
- Las cintas de fijación y los mecanismos de movimientos de camas, colchones, colchones con cambios de presión o similares se pueden perjudicar mutuamente. Consecuencias: daños materiales, el mal funcionamiento de éstos y peligro de lesiones.
- Más información sobre los productos en www.segufix.com o www.segufix-shop.com

| SEGUFIX®-Sujeción-muñecas | | | | | | | | | Ancho de la cinta | Longitud de la cinta | Circunferencia muñeca |
|---------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------------------|------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Talla | Art. | kg | Art. | kg | Art. | kg | Pieza por separado | kg | mm | mm | mm |
| S | 2204 | 0,33 | 2304 | 0,37 | 2404 | 0,37 | 2104 | 0,15 | 45 | 620 | 120 - 190 |
| M | 2204 | 0,38 | 2304 | 0,42 | 2404 | 0,42 | 2104 | 0,17 | 45 | 770 | 160 - 240 |
| L | 2204 | 0,41 | 2304 | 0,45 | 2404 | 0,45 | 2104 | 0,18 | 45 | 810 | 220 - 290 |
| XL | 2204 | 0,44 | 2304 | 0,48 | 2404 | 0,48 | 2104 | 0,21 | 45 | 1100 | 260 - 340 |
| S | 2204/r | 0,36 | 2304/r | 0,40 | 2404/r | 0,40 | 2104/r | 0,16 | 45 | 620 | 120 - 190 |
| M | 2204/r | 0,40 | 2304/r | 0,44 | 2404/r | 0,44 | 2104/r | 0,18 | 45 | 770 | 160 - 240 |
| L | 2204/r | 0,42 | 2304/r | 0,46 | 2404/r | 0,46 | 2104/r | 0,19 | 45 | 810 | 220 - 290 |
| XL | 2204/r | 0,45 | 2304/r | 0,49 | 2404/r | 0,49 | 2104/r | 0,21 | 45 | 1100 | 260 - 340 |
| S | 2224 | 0,62 | 2324 | 0,70 | 2424 | 0,70 | 2124 | 0,27 | 45 | 1360 | 120 - 190 |
| M | 2224 | 0,67 | 2324 | 0,75 | 2424 | 0,75 | 2124 | 0,29 | 45 | 1360 | 160 - 240 |
| L | 2224 | 0,72 | 2324 | 0,80 | 2424 | 0,80 | 2124 | 0,30 | 45 | 1490 | 220 - 290 |
| S | 2224/r | 0,66 | 2324/r | 0,75 | 2424/r | 0,75 | 2124/r | 0,28 | 45 | 1360 | 120 - 190 |
| M | 2224/r | 0,71 | 2324/r | 0,79 | 2424/r | 0,79 | 2124/r | 0,30 | 45 | 1360 | 160 - 240 |
| L | 2224/r | 0,77 | 2324/r | 0,85 | 2424/r | 0,85 | 2124/r | 0,33 | 45 | 1490 | 220 - 290 |
| XL | 2224/r | 0,83 | 2324/r | 0,91 | 2424/r | 0,91 | 2124/r | 0,36 | 45 | 1640 | 260 - 340 |
| M | 2724 | 0,48 | - | - | - | - | 2824 | 0,24 | 45 | 1420 | 160 - 240 |

Tablas: medidas y pesos aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)



SEGUFIX® - Sistema de cierre magnético negro

| Artículo | Consta de: |
|----------|---|
| 1206 | 1 Botón magnético negro / segufix.com 1 Vástago metálico |
| 1208 | 1 Llave magnética roja |
| 1204 | 1 Botón magnético negro / segufix.com |
| 1205 | 1 Vástago metálico |
| 1209 | 1 Llave magnética roja con llavero |



SEGUFIX® - Sistema de cierre magnético giratorio verde

| Artículo | Consta de: |
|----------|---|
| 1306 | 1 Botón magnético giratorio patentado verde 1 Vástago cuadrado |
| 1308 | 1 Llave magnética giratoria amarilla |
| 1304 | 1 Botón magnético giratorio patentado verde |
| 1305 | 1 Vástago cuadrado |



Sistema de cierre a presión

| Artículo | Consta de: |
|----------|--|
| 1406 | 1 Botón del cierre a presión 1 Vástago del cierre a presión |
| 1408 | 1 Llave para el cierre a presión |
| 1404 | 1 Botón del cierre a presión |
| 1405 | 1 Vástago del cierre a presión |

Uso previsto (cierre):

Para cerrar de forma segura los sistemas SEGUFIX®.

Uso previsto (llave):

Para abrir rápidamente los cierres.

Atención:

Los componentes de los distintos sistemas de cierre no son compatibles entre ellos.



Advertencia: Antes de usar los SEGUFIX® -Sistemas de cierre, lea las Instrucciones de seguridad.

- No sumerja los cierres en líquido, de lo contrario dejarán de funcionar.
- Los cierres y las llaves no deben ser lavados en la lavadora.
- Antes de cada uso, verifique el correcto funcionamiento del cierre.
- Examine si la cabeza del vástago está dañada o desgastada.
- Una vez cerrado el cierre, el botón debe encajar en el vástago; no se debe poder desprender más.
- Para poder abrir los cierres, debe garantizarse la movilidad entre el punto superior e inferior del punto de anclaje del cierre (art. 1206). Por consiguiente, sobreponga máximo 4 cintas por cierre. (Excepción: productos marcados con «r» o «f» en el número de identificación del artículo, los cuales poseen cintas más gruesas. En estos casos, sobreponga máximo 3 cintas por cierre!). El cierre magnético giratorio patentado verde (art. 1306) permite sobreponer un máximo de 4 cintas por cierre! El cierre a presión (art. 1406) permite sobreponer un máximo de 3 cintas por cierre!
- Si los cierres defectuosos no logran ser abiertos con su llave, se pueden cortar las cintas con tijera o con un cortador de cintas.
- Más información sobre los productos en www.segufix.com o www.segufix-shop.com

Instrucciones de uso para los SEGUFIX® -Sistemas de cierre:

Art. 1206 / 1208 (SEGUFIX®-Cierre magnético negro)

Art. 1306 / 1308 (SEGUFIX®-Cierre magnético giratorio patentado verde)

Art. 1406 / 1408 (Cierre a presión)

Abrir los cierres:

Art. 1206 / 1208

- Con un leve golpe, coloque la llave roja encima del cierre magnético negro.
- Retire la llave junto con el botón negro del vástago (imagen 1).



Art. 1306 / 1308

- Coloque la llave amarilla encima del cierre magnético verde.
- Abra el cierre girando la llave junto con el botón verde. Retire la llave junto con el botón verde del vástago cuadrado (imagen 3).



Art. 1406 / 1408

- Inserte y presione la llave en los orificios del botón del cierre a presión.
- Retire la llave junto con el botón del vástago (imagen 2).



Cerrar los cierres:

- Encaje el orificio del botón sobre su correspondiente vástago.
- Verifique el correcto funcionamiento del cierre: el botón no se debe poder desprender más del vástago.

Atención: Los componentes de los distintos sistemas de cierre no son compatibles entre ellos.

Consulte las SEGUFIX® -Instrucciones de seguridad en las páginas 8 - 11

Las instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso únicamente son válidas para productos originales SEGUFIX®. No utilice el sistema SEGUFIX® si no ha leído y entendido todas las instrucciones y las medidas de seguridad.

Utilice únicamente las instrucciones de uso actualizadas y guarde las instrucciones. Producto e instrucciones de uso deben coincidir. El uso inadecuado del sistema SEGUFIX® puede ocasionar lesiones graves inclusive la muerte. La seguridad de su paciente depende del uso correcto del sistema SEGUFIX®.

1. Condiciones de uso

El uso correcto del producto, tomando en cuenta las disposiciones legales nacionales, corresponde a la organización que aplica el sistema SEGUFIX®. Respete siempre los reglamentos internos para la inmovilización médica, sus protocolos de sujeción y la legislación pertinente vigente. Deben cumplirse las instrucciones de uso.

Los productos SEGUFIX® únicamente deben ser aplicados por personal capacitado, debidamente entrenado. Disposiciones legales e indicaciones médicas deben respetarse estrictamente! El médico tratante debe asegurar que el paciente tenga un estado de salud que permita la aplicación del sistema SEGUFIX®.

2. Uso previsto

Los productos SEGUFIX® deben ser utilizados exclusivamente para fines medicinales.

3. Retire objetos peligrosos

Retire todos los objetos al alcance del paciente con los que se pueda autolesionar o con los cuales el paciente pueda dañar las cintas (por ejemplo: gafas, joyas, objetos afilados o punzantes).

4. Inspeccione el sistema de sujeción antes de cada uso



Antes de utilizar el producto, revise que el producto no tenga: costuras lacerantes, partes deterioradas u ojales dañados. Productos defectuosos pueden implicar limitaciones en sus funciones y causar lesiones. No utilice productos defectuosos y/o deteriorados.

5. Los cierres no deben estar bajo presión

Para poder abrir los cierres, debe garantizarse la movilidad entre la parte superior e inferior del punto de anclaje del cierre (art. 1206). Por consiguiente, sobreponga máximo 4 cintas por cierre (excepción: productos con «r» o «f» en el número de identificación del artículo los cuales son fabricados con cintas más gruesas. En este caso: ¡sobreponga máximo 3 cintas por cierre!). El SEGUFIX® -Cierre magnético giratorio patentado verde (art. 1306) permite sobreponer un máximo de 4 cintas por cierre. El cierre a presión (art. 1406) permite sobreponer un máximo de 3 cintas por cierre.



6. Utilice las fijaciones laterales

No utilice el sistema SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal o con fijador-muslos sin las fijaciones laterales. Sin las fijaciones laterales, el paciente puede rotar con el cinturón abdominal puesto o deslizarse del borde de la cama con la posibilidad de sufrir una compresión torácica y fallecer. Si algunos pacientes logran alcanzar el borde de la cama, a pesar de haber implementado las fijaciones laterales y haber subido las barandillas de la cama, es necesario recurrir a otras medidas adicionales de sujeción.

Importante: Introduzca las fijaciones laterales – antes de amarrar – por sus respectivos pasadores ubicados en la cinta ancha de cama (ver instrucciones de uso).

7. Preste atención en camas, asientos y camillas:


- Los productos SEGUFIX® sólo deben ser utilizados en camas, asientos estables y en camillas que permitan una instalación conforme a las instrucciones de uso.
- Los productos SEGUFIX® deben ser instalados de forma que no se puedan deslizar.
- Los sistemas de sujeción y los mecanismos de movimientos de camas, colchones, colchones con cambios de presión etc., camillas o asientos pueden perjudicarse mutuamente. Consecuencias: daños materiales, el mal funcionamiento de éstos y peligro de lesiones.
- Los puntos de fijación elegidos no deben presentar bordes afilados.
- Los productos SEGUFIX® no impiden que las camas, asientos y camillas se vuelquen o se desplacen de su sitio.

De gran ayuda en este contexto:

Norma para camas: DIN EN 60601-2-52

Norma para sillas de ruedas: DIN EN 12182 y DIN EN 12183

8. Las barandillas de la cama deben estar elevadas

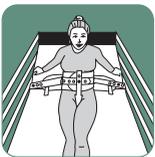

Para evitar accidentes durante la sujeción, es necesario subir las barandillas de la cama (excepción: sujeción de 5 puntos).

Atención: En caso de barandillas discontinuas, es necesario aplicar una pieza adicional protectora “gap protector” con el fin de evitar el deslizamiento del paciente a través de la abertura. Con barandillas discontinuas es posible que el paciente, a pesar de estar sujetado, resbale a través de

la abertura – con el riesgo de sufrir una compresión torácica.

9. Supervise los pacientes inmovilizados



Pacientes inmovilizados deben ser supervisados constantemente.

Pacientes agresivos, agitados e inquietos, o aquellos que corren peligro de ahogamiento, requieren de una supervisión continua.

10. Inspeccione los sistemas de cierre antes de cada uso



Inspeccione si los SEGUFIX®-Cierres magnéticos negros/segufix.com, los SEGUFIX®-Cierres magnéticos giratorios patentados verdes, los cierres a presión, los cierres clic, los cierres Velcro® y los cierres de hebilla funcionan y cierran correctamente. No sumerja los cierres en líquidos. Los cierres podrían dejar de funcionar o funcionar de forma defectuosa. Si los cierres defectuosos no logran ser abiertos con su llave, puede cortar las cintas con tijera o con un cortador de cintas. Examine si la cabeza del vástago está dañada o desgastada.

11. Advertencia referente a marcapasos



En pacientes con marcapasos debe respetarse una distancia de seguridad de 10 cm entre el marcapasos y los cierres magnéticos/llaves magnéticas, ya que éstos podrían ocasionar taquicardias (alternativa: cierre a presión). Referente a posibles perjuicios causados por imanes en otros tipos de implantes, lea las instrucciones del fabricante correspondiente.

12. Verifique la instalación de las cintas

Verifique regularmente si las cintas de fijación están correctamente instaladas a la cama. Las cintas deben estar ajustadas firmemente al marco de la cama o, en camas ortopédicas, fije las cintas a las partes móviles. Las cintas no deben deslizarse.

13. Utilice únicamente productos SEGUFIX® originales

Por motivos de seguridad, los productos SEGUFIX® no deben ser modificados ni utilizados en combinación con productos de otras marcas. En caso de incumplimiento, se pierde cualquier derecho de reclamación y queda anulada la garantía.

14. Uso del sistema SEGUFIX® en vehículos



En automóviles, los cinturones de transporte SEGUFIX® no sustituyen el uso obligatorio de los cinturones de seguridad (cinturón de tres puntos y pelvis). Los cinturones de transporte sólo deben ser utilizados de apoyo adicional o para la sujeción del paciente. Asegúrese de que en caso de emergencia el paciente pueda ser rescatado rápidamente (colocar los cortadores de cintas al alcance de la vista y de la mano).

15. Seguro, pero sin apretar

La sujeción tiene que estar bien ajustada sin afectar la respiración y la circulación de la sangre del paciente. Productos poco tensados pueden comprometer la seguridad del paciente. Compruebe regularmente si la sujeción se encuentra en la posición correcta.



16. Almacenamiento

Con la finalidad de alargar la vida útil del producto, almacene las cintas y los sistemas de cierre en un lugar seco y sombreado a una temperatura normal de 20 °C.

17. Inflamabilidad de los sistemas de cama SEGUFIX®



Según la norma DIN EN 71-2 sección 4.3, las cintas no son inflamables. Según la norma DIN 75200 la velocidad de inflamación es nula. Se sobreentiende que los productos SEGUFIX® no deben entrar en contacto con cigarrillos encendidos, ni ser expuestos a llamas que pueden ser perjudicial para la salud y ocasionar daños materiales.

18. Elija siempre la talla adecuada

Elija siempre la talla correcta según el tamaño y la cintura del paciente (ver tabla de tallas). Productos muy grandes / muy pequeños perjudican la comodidad y la seguridad del paciente.

19. Reciclaje de residuos

Los cartones deben ser reciclados en el contenedor azul de reciclado de papeles, los embalajes y empaques de plásticos en el contenedor amarillo destinado al reciclaje de envases plásticos y los productos defectuosos en el contenedor negro de desechos residuales.

20. Declaración de conformidad

Puede conseguir la declaración de conformidad bajo:
https://www.segufix.com/conformity_es.php

21. Recomendaciones para evitar accidentes

(Prof. Dr.-Ing. U. Boenick, Universidad Técnica de Berlín):

1. Instale las fijaciones laterales
2. Suba las barandillas de la cama (Excepción: Sujeción de 5-puntos)
3. Es posible que sea necesario implementar más elementos de fijación, para evitar la huida del paciente de la cama.

22. Importante antes de cada uso

- Verificar el estado y el correcto funcionamiento de los cierres
- Verificar el estado de las cintas: ojales, pasadores textiles, cierres de Velcro®, cierres clic y cierres de hebilla
- Utilizar sólo con indicaciones suficientes
- Verificar los requerimientos legales

Instrucciones de mantenimiento

- **Las cintas SEGUFIX®** (blanco natural) compuestas de una mezcla de algodón y viscosilla, pueden ser lavadas en la lavadora a una temperatura máxima de 95 °C.
Temperaturas bajas y redes de lavado alargan la duración de vida del producto. No es indicado el uso de trenes de lavado y prensado, ya que los ojales de las cintas pueden dañarse. Las cintas no están prelavadas, la posibilidad de encogimiento es de un 8 %.
Almacene las cintas una vez secas.
Detergente: no agresivo, sin suavizante y sin blanqueadores (cloro/lejía).
Secadora: ciclo delicado, a temperatura baja y preferiblemente en red de lavado.
Desinfección: Se puede aplicar el proceso de desinfección termoquímico de tejidos.
Sobredosis de detergente daña el material de las cintas.
- **Los cinturones de transporte SEGUFIX®** (colorido/negro) compuestos de poliéster pueden ser lavados en la lavadora a una temperatura máxima de 30 °C.
Temperaturas bajas y redes de lavado alargan la duración de vida del producto. No es indicado el uso de trenes de lavado y prensado, ya que los ojales de las cintas pueden dañarse. Almacene las cintas una vez secas.
Detergente: no agresivo, sin suavizante y sin blanqueadores (cloro/lejía).
Secadora: ciclo delicado, a temperatura baja y preferiblemente en red de lavado.
- **Retire todos los SEGUFIX®-Cierres y vástagos** antes del lavado. Cierres lavados por error, dejarán de funcionar y de ser confiables. Limpie y desinfecte los cierres con un paño húmedo. Nunca sumerja los cierres en líquido.
- **Los cierres de Velcro®** deben ser cerrados antes del lavado y secado en máquina, para evitar la acumulación de pelusas en los ganchos del Velcro®. Para eliminar las pelusas, pase un cepillo duro sobre el cierre del Velcro®. Es normal que debido al uso diario del cierre, se acumulen pelusas en los ganchos del Velcro®. Esto puede reducir su capacidad de adherencia. Antes de cada uso, revise la capacidad de adherencia del Velcro®.
- **La durabilidad** depende de la intensidad de su uso y puede ser prolongada utilizando procedimientos de lavado delicados (detergentes/red de lavado).

Edición 15 · 2019-10

© by SEGUFIX®-Bandagen, 2019

Aplican nuestras condiciones generales de contratación y de suministro:

<https://www.segufix.com/PDFs/AGBs/>

Condiciones_generales.pdf

Queda reservado el derecho a realizar cambios en los productos. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier modificación de nuestros productos con relación a las ilustraciones y descripciones del presente catálogo.

Quedan reservados todos los derechos.

La reproducción o difusión a través de sistemas electrónicos/soportes de datos, también en forma parcial, sólo se permitirá con el previo consentimiento expreso por escrito.

Todas las consultas deben ser dirigidas a:

SEGUFIX®-Bandagen

Das Humane System GmbH & Co. KG

Allerbeeksring 33 · D-21266 Jesteburg · Alemania

Teléfono: +49 (0) 41 83 500-0

Telefax: +49 (0) 41 83 500-200

E-mail: export@segufix.de

www.segufix.com · www.segufix-shop.com