

# SEGUFIX® -Cinturón-multiuso



**Art. 6256 / Art. 6356 / Art. 6456**

**Consta de:**  
 1 SEGUFIX® -Cinturón-multiuso  
 1 SEGUFIX® -Cierre  
 1 SEGUFIX® -Llave

**3 variantes → SEGUFIX® -Cierres:**

1206 / 1208	1306 / 1308	1406 / 1408
Art. 6256	Art. 6356	Art. 6456



**Art. 6750**

**Consta de:**  
 1 SEGUFIX® -Cinturón-multiuso Velcro®

**Pieza por separado:** art. 6156  
 (sin cierre y sin llave)

**Tallas:** XS / S / M / L

El SEGUFIX® -Cinturón-multiuso (etiqueta blanca) forma parte del SEGUFIX® -Sistema de transporte y está compuesto de poliéster.



# SEGUFIX® -Funda protectora



**Art. 8013**

**Consta de:**  
 1 SEGUFIX® -Funda protectora



# Antideslizante



**Art. 8017**

**Consta de:**  
 1 Antideslizante



Índice	Página
SEGUFIX® -Cinturón-multiuso – Instrucciones de uso, medidas	2 - 3
SEGUFIX® -Funda protectora – Instrucciones de uso, medidas	4
Antideslizante – Instrucciones de uso, medidas	5
SEGUFIX® -Sistemas de cierre	6 - 7
SEGUFIX® -Instrucciones de seguridad y advertencias	8 - 11
Instrucciones de mantenimiento / Información corporativa	12

3 variantes de cierres:

Art. 6256 / 6356 / 6456

## Uso previsto:

- cinturón de soporte con cierre de Velcro® y ojales para un SEGUFIX®-Cierre.
- ayuda a sostener a pacientes en sillas, sillones y otros asientos adecuados
- indicado para camillas de emergencia o para sostener a pacientes en sillas de ducha (utilizar en la ducha sin cierre)
- para la aplicación de medidas privativas de libertad



Con cierre de Velcro®:

Art. 6750

## Uso previsto:

- cinturón de soporte con cierre de Velcro®
- ayuda a sostener a pacientes en sillas, sillones y otros asientos adecuados
- indicado para camillas de emergencia o para sostener a pacientes en sillas de ducha
- para garantizar su adherencia, el Velcro® tiene que estar sobrepuesto un mínimo de 250 mm
- no se considera una sujeción debido al Velcro® – Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.



## Instrucciones de uso para Art. 6256 / 6356 / 6456

Art. 6156 (pieza por separado)

Art. 6750 (con cierre de Velcro®)

Para cierres y llaves ver páginas 6 y 7

## Instalar el SEGUFIX®-Cinturón-multiuso al asiento y al paciente:

SEGUFIX®-Cinturón-multiuso con cierre de Velcro® y ojales (Art. 6256 / 6356 / 6456):

- Inserte el vástago del cierre (1) en uno de los ojales que se encuentran en el bolsillo para el vástago.
- Coloque el SEGUFIX®-Cinturón-multiuso (A) – a la altura de la cintura – alrededor del paciente y del respaldo y cierre el cierre de Velcro®.
- El SEGUFIX®-Cinturón-multiuso (A) debe quedar bien ajustado, sin dificultar la respiración del paciente. Debe ser posible introducir una mano extendida entre el paciente y el cinturón.
- Cierre el cierre (1).
- Verifique que el cierre esté cerrado correctamente.



### SEGUFIX®-Cinturón-multiuso Velcro® (Art. 6750):

- Coloque el SEGUFIX®-Cinturón-multiuso (A) – a la altura de la cintura – alrededor del paciente y del respaldo y cierre el cierre de Velcro®.
- El SEGUFIX®-Cinturón-multiuso (A) debe quedar bien ajustado, sin dificultar la respiración del paciente. Debe ser posible introducir una mano extendida entre el paciente y el cinturón.
- Verifique que el cierre de Velcro® esté cerrado correctamente. Para garantizar su adherencia, se recomienda sobreponer el Velcro® un mínimo de 250 mm.



### Desinstalar el SEGUFIX®-Cinturón-multiuso del paciente y del asiento:

En la página 7 se explica el proceso de apertura de los respectivos sistemas de cierre.

- Abra el cierre (1) – si aplica – y el cierre de Velcro®.
- Retire el producto del paciente y del asiento

### Consulte las SEGUFIX®-Instrucciones de seguridad en las páginas 8 - 11

**Advertencia:** Antes de usar el SEGUFIX®-Cinturón-multiuso, lea las Instrucciones de seguridad

- El SEGUFIX®-Cinturón multiuso no impide que el asiento (o la camilla) se vuelque o se desplace de su sitio.
- El SEGUFIX®-Sistema de transporte no sustituye el uso obligatorio de los cinturones de seguridad en automóviles. Los cinturones de transporte sólo deben ser utilizados de apoyo adicional para los pacientes.
- Más información sobre los productos en [www.segufix.com](http://www.segufix.com) o [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)

SEGUFIX®-Cinturón-multiuso								Longitud (cinta)	Ancho (cinta)	Circunferencia total	
Talla	Art.	kg	Art.	kg	Art.	kg	Pieza por separado	kg	mm	mm	Paciente + asiento mm
XS	6256	0,30	6356	0,33	6456	0,32	6156	0,24	1600	140	1100 - 1500
S	6256	0,32	6356	0,35	6456	0,34	6156	0,27	1800	140	1300 - 1700
M	6256	0,35	6356	0,38	6456	0,37	6156	0,30	2000	140	1500 - 1900
L	6256	0,39	6356	0,42	6456	0,41	6156	0,35	2400	140	1900 - 2300
XS	6750	0,20	-	-	-	-	-	-	1600	140	1000 - 1350
S	6750	0,26	-	-	-	-	-	-	1800	140	1200 - 1550
M	6750	0,25	-	-	-	-	-	-	2000	140	1350 - 1750
L	6750	0,28	-	-	-	-	-	-	2400	140	1750 - 2150

Tablas: medidas y pesos aproximados – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)

## Art. 8013

### Uso previsto:

la SEGUFIX®-Funda protectora previene el ensuciamiento de los siguientes SEGUFIX®-Cinturones de transporte:

#### - SEGUFIX®-Cinturón-multiuso

Art. 6256 / 6356 / 6456 / 6156 (pieza por separado) y Art. 6750 (con cierre de Velcro®)  
la funda protectora sólo puede ser utilizada **sin** cierre

#### - SEGUFIX®-Cinturón-pelvis

Art. 6266 / 6366 / 6466 / 6166 (pieza por separado) y Art. 6760 (con cierre clic)  
la funda protectora puede ser utilizada **con** cierre




SEGUFIX®-Funda protectora y SEGUFIX®-Cinturón-pelvis

## Instrucciones de uso para Art. 8013

- Coloque la funda protectora (A) sobre el cinturón (B), de forma que el logo verde SEGUFIX® sea visible.

Para instalar el SEGUFIX®-Cinturón-multiuso o el SEGUFIX®-Cinturón-pelvis, lea las instrucciones de uso correspondientes.

## Consulte las SEGUFIX®-Instrucciones de seguridad en las páginas 8 - 11

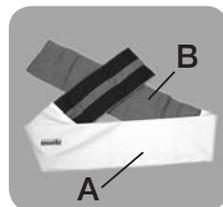

### Características:

- lavable hasta 95 °C, esterilizable al vapor
- resistente a bacterias

### Material:

- interior: 100% poliéster
- revestimiento: 100% poliuretano

SEGUFIX®-Funda protectora		
Longitud mm	Ancho mm	Peso kg
790	140	0,07

Tabla: medidas y pesos aproximados – pueden haber desviaciones ligeras (cintas no prelavadas)

**Advertencia:** Antes de usar la SEGUFIX®-Funda protectora, lea las Instrucciones de seguridad.

- La SEGUFIX®-Funda protectora no se puede pasar por encima de un cierre (p. ej. SEGUFIX®-Cinturón-multiuso).
- La SEGUFIX®-Funda protectora no impide que el asiento (o camilla) se vuelque o se desplace de su sitio.
- Más información sobre los productos en [www.segufix.com](http://www.segufix.com) o [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)

# Antideslizante

## Art. 8017

### Uso previsto:

- fue desarrollado para impedir el deslizamiento del asiento
- altamente recomendado su uso en sillas, sillones, sillas de ruedas, camas, sillas de oficinas etc.
- permite únicamente un desplazamiento en dirección flecha, no más „deslizar“ del asiento!
- no es indicado para pacientes agitados
- el Antideslizante no funciona en estado mojado o húmedo



## Instrucciones de uso para Art. 8017

- Coloque el antideslizante – con la flecha señalando en dirección respaldar – sobre el asiento.
- El antideslizante permite un fácil desplazamiento en dirección flecha. Esto facilita que el paciente sentado sea arrimado hacia el respaldar. En dirección opuesta a la flecha, el antideslizante se desplaza muy difícilmente, dificultando un deslizamiento del asiento.

La función del antideslizante se optimiza si se utiliza en combinación con el SEGUFIX®-Cinturón-pelvis o el SEGUFIX®-Cinturón-multiuso.

## Consulte las SEGUFIX®-Instrucciones de seguridad en las páginas 8 - 11



Antideslizante y SEGUFIX®-Cinturón-pelvis

### Características:

- lavable a una temperatura máx. de 80 °C
- no utilizar suavizantes o cloro / lejía.
- no puede ser desinfectado
- después de ser lavado, el antideslizante debe estar completamente seco, para garantizar su función.
- indicado para secadoras (temperaturas bajas)
- resiste máximo 150 kg

### Material:

- compuesto de nylon

Antideslizante	
Medidas mm	Peso kg
370 x 430	0,28

Tabla: medidas y pesos aproximados – pueden haber desviaciones ligeras (cintas no prelavadas)

## Advertencia: Antes de usar el antideslizante, lea las Instrucciones de seguridad.

- El antideslizante no impide que el asiento se vuelque o se desplace de su sitio.
- No indicado para pacientes agitados.
- El antideslizante debe estar completamente seco (p. ej. después del lavado), para garantizar su función. No funciona en estado mojado o húmedo.
- Resiste máximo 150 kg.
- Más información sobre los productos en [www.segufix.com](http://www.segufix.com) o [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)

 <b>SEGUFIX® - Sistema de cierre magnético negro</b>	
Artículo	Consta de:
1206	1 Botón magnético negro / segufix.com 1 Vástago metálico
1208	1 Llave magnética roja
1204	1 Botón magnético negro / segufix.com
1205	1 Vástago metálico
1209	1 Llave magnética roja con llavero

 <b>SEGUFIX® - Sistema de cierre magnético giratorio verde</b>	
Artículo	Consta de:
1306	1 Botón magnético giratorio patentado verde 1 Vástago cuadrado
1308	1 Llave magnética giratoria amarilla
1304	1 Botón magnético giratorio patentado verde
1305	1 Vástago cuadrado

 <b>Sistema de cierre a presión</b>	
Artículo	Consta de:
1406	1 Botón del cierre a presión 1 Vástago del cierre a presión
1408	1 Llave para el cierre a presión
1404	1 Botón del cierre a presión
1405	1 Vástago del cierre a presión

### Uso previsto (cierre):

Para cerrar de forma segura los sistemas SEGUFIX®.

### Uso previsto (llave):

Para abrir rápidamente los cierres.

### Atención:

Los componentes de los distintos sistemas de cierre no son compatibles entre ellos.



**Advertencia:** Antes de usar los SEGUFIX® -Sistemas de cierre, lea las Instrucciones de seguridad.

- No sumerja los cierres en líquido, de lo contrario dejarán de funcionar.
- Los cierres y las llaves no deben ser lavados en la lavadora.
- Antes de cada uso, verifique el correcto funcionamiento del cierre.
- Examine si la cabeza del vástago está dañada o desgastada.
- Una vez cerrado el cierre, el botón debe encajar en el vástago; no se debe poder desprender más.
- Para poder abrir los cierres, debe garantizarse la movilidad entre el punto superior e inferior del punto de anclaje del cierre (art. 1206). Por consiguiente, sobreponga máximo 4 cintas por cierre. (Excepción: productos marcados con «r» o «f» en el número de identificación del artículo, los cuales poseen cintas más gruesas. En estos casos, sobreponga máximo 3 cintas por cierre!). El cierre magnético giratorio patentado verde (art. 1306) permite sobreponer un máximo de 4 cintas por cierre! El cierre a presión (art. 1406) permite sobreponer un máximo de 3 cintas por cierre!
- Si los cierres defectuosos no logran ser abiertos con su llave, se pueden cortar las cintas con tijera o con un cortador de cintas.
- Más información sobre los productos en [www.segufix.com](http://www.segufix.com) o [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)

## Instrucciones de uso para los SEGUFIX®-Sistemas de cierre:

**Art. 1206 / 1208** (SEGUFIX®-Cierre magnético negro)

**Art. 1306 / 1308** (SEGUFIX®-Cierre magnético giratorio patentado verde)

**Art. 1406 / 1408** (Cierre a presión)

### Abrir los cierres:

#### Art. 1206 / 1208

- Con un leve golpe, coloque la llave roja encima del cierre magnético negro.
- Retire la llave junto con el botón negro del vástago (imagen 1).



#### Art. 1306 / 1308

- Coloque la llave amarilla encima del cierre magnético verde.
- Abra el cierre girando la llave junto con el botón verde del vástago (imagen 3).



#### Art. 1406 / 1408

- Inserte y presione la llave en los orificios del botón del cierre a presión.
- Retire la llave junto con el botón del vástago (imagen 2).



### Cerrar los cierres:

- Encaje el orificio del botón sobre su correspondiente vástago.
- Verifique el correcto funcionamiento del cierre: el botón no se debe poder desprender más del vástago.

**Atención:** Los componentes de los distintos sistemas de cierre no son compatibles entre ellos.

**Consulte las SEGUFIX®-Instrucciones de seguridad en las páginas 8 - 11**

Las instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso únicamente son válidas para productos originales SEGUFIX®. No utilice el sistema SEGUFIX® si no ha leído y entendido todas las instrucciones y las medidas de seguridad.

Utilice únicamente las instrucciones de uso actualizadas y guarde las instrucciones. Producto e instrucciones de uso deben coincidir. El uso inadecuado del sistema SEGUFIX® puede ocasionar lesiones graves inclusive la muerte. La seguridad de su paciente depende del uso correcto del sistema SEGUFIX®.

## 1. Condiciones de uso

El uso correcto del producto, tomando en cuenta las disposiciones legales nacionales, corresponde a la organización que aplica el sistema SEGUFIX®. Respete siempre los reglamentos internos para la inmovilización médica, sus protocolos de sujeción y la legislación pertinente vigente. Deben cumplirse las instrucciones de uso.

Los productos SEGUFIX® únicamente deben ser aplicados por personal capacitado, debidamente entrenado. Disposiciones legales e indicaciones médicas deben respetarse estrictamente! El médico tratante debe asegurar que el paciente tenga un estado de salud que permita la aplicación del sistema SEGUFIX®.

## 2. Uso previsto

Los productos SEGUFIX® deben ser utilizados exclusivamente para fines medicinales.

## 3. Retire objetos peligrosos

Retire todos los objetos al alcance del paciente con los que se pueda autolesionar o con los cuales el paciente pueda dañar las cintas (por ejemplo: gafas, joyas, objetos afilados o punzantes).

## 4. Inspeccione el sistema de sujeción antes de cada uso



Antes de utilizar el producto, revise que el producto no tenga: costuras lacerantes, partes deterioradas u ojales dañados. Productos defectuosos pueden implicar limitaciones en sus funciones y causar lesiones. No utilice productos defectuosos y/o deteriorados.

## 5. Los cierres no deben estar bajo presión

Para poder abrir los cierres, debe garantizarse la movilidad entre la parte superior e inferior del punto de anclaje del cierre (art. 1206). Por consiguiente, sobreponga máximo 4 cintas por cierre (excepción: productos con «r» o «f» en el número de identificación del artículo los cuales son fabricados con cintas más gruesas. En este caso: ¡sobreponga máximo 3 cintas por cierre!). El SEGUFIX®-Cierre magnético giratorio patentado verde (art. 1306) permite sobreponer un máximo de 4 cintas por cierre. El cierre a presión (art. 1406) permite sobreponer un máximo de 3 cintas por cierre.



## 6. Utilice las fijaciones laterales

No utilice el sistema SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal o con fijador-muslos sin las fijaciones laterales. Sin las fijaciones laterales, el paciente puede rotar con el cinturón abdominal puesto o deslizarse del borde de la cama con la posibilidad de sufrir una compresión torácica y fallecer. Si algunos pacientes logran alcanzar el borde de la cama, a pesar de haber implementado las fijaciones laterales y haber subido las barandillas de la cama, es necesario recurrir a otras medidas adicionales de sujeción.

**Importante:** Introduzca las fijaciones laterales – antes de amarrar – por sus respectivos pasadores ubicados en la cinta ancha de cama (ver instrucciones de uso).

## 7. Preste atención en camas, asientos y camillas:


- Los productos SEGUFIX® sólo deben ser utilizados en camas, asientos estables y en camillas que permitan una instalación conforme a las instrucciones de uso.
- Los productos SEGUFIX® deben ser instalados de forma que no se puedan deslizar.
- Los sistemas de sujeción y los mecanismos de movimientos de camas, colchones, colchones con cambios de presión etc., camillas o asientos pueden perjudicarse mutuamente. Consecuencias: daños materiales, el mal funcionamiento de éstos y peligro de lesiones.
- Los puntos de fijación elegidos no deben presentar bordes afilados.
- Los productos SEGUFIX® no impiden que las camas, asientos y camillas se vuelquen o se desplacen de su sitio.

De gran ayuda en este contexto:

Norma para camas: DIN EN 60601-2-52

Norma para sillas de ruedas: DIN EN 12182 y DIN EN 12183

## 8. Las barandillas de la cama deben estar elevadas

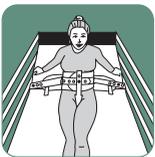

Para evitar accidentes durante la sujeción, es necesario subir las barandillas de la cama (excepción: sujeción de 5 puntos).

Atención: En caso de barandillas discontinuas, es necesario aplicar una pieza adicional protectora “gap protector” con el fin de evitar el deslizamiento del paciente a través de la abertura. Con barandillas discontinuas es posible que el paciente, a pesar de estar sujetado, resbale a través de

la abertura – con el riesgo de sufrir una compresión torácica.

## 9. Supervise los pacientes inmovilizados



Pacientes inmovilizados deben ser supervisados constantemente.

Pacientes agresivos, agitados e inquietos, o aquellos que corren peligro de ahogamiento, requieren de una supervisión continua.

## 10. Inspeccione los sistemas de cierre antes de cada uso



Inspeccione si los SEGUFIX®-Cierres magnéticos negros/segufix.com, los SEGUFIX®-Cierres magnéticos giratorios patentados verdes, los cierres a presión, los cierres clic, los cierres Velcro® y los cierres de hebilla funcionan y cierran correctamente. No sumerja los cierres en líquidos. Los cierres podrían dejar de funcionar o funcionar de forma defectuosa. Si los cierres defectuosos no logran ser abiertos con su llave, puede cortar las cintas con tijera o con un cortador de cintas. Examine si la cabeza del vástago está dañada o desgastada.

## 11. Advertencia referente a marcapasos



En pacientes con marcapasos debe respetarse una distancia de seguridad de 10 cm entre el marcapasos y los cierres magnéticos/llaves magnéticas, ya que éstos podrían ocasionar taquicardias (alternativa: cierre a presión). Referente a posibles perjuicios causados por imanes en otros tipos de implantes, lea las instrucciones del fabricante correspondiente.

## 12. Verifique la instalación de las cintas

Verifique regularmente si las cintas de fijación están correctamente instaladas a la cama. Las cintas deben estar ajustadas firmemente al marco de la cama o, en camas ortopédicas, fije las cintas a las partes móviles. Las cintas no deben deslizarse.

## 13. Utilice únicamente productos SEGUFIX® originales

Por motivos de seguridad, los productos SEGUFIX® no deben ser modificados ni utilizados en combinación con productos de otras marcas. En caso de incumplimiento, se pierde cualquier derecho de reclamación y queda anulada la garantía.

## 14. Uso del sistema SEGUFIX® en vehículos



En automóviles, los cinturones de transporte SEGUFIX® no sustituyen el uso obligatorio de los cinturones de seguridad (cinturón de tres puntos y pelvis). Los cinturones de transporte sólo deben ser utilizados de apoyo adicional o para la sujeción del paciente. Asegúrese de que en caso de emergencia el paciente pueda ser rescatado rápidamente (colocar los cortadores de cintas al alcance de la vista y de la mano).

## 15. Seguro, pero sin apretar

La sujeción tiene que estar bien ajustada sin afectar la respiración y la circulación de la sangre del paciente. Productos poco tensados pueden comprometer la seguridad del paciente. Compruebe regularmente si la sujeción se encuentra en la posición correcta.



## 16. Almacenamiento

Con la finalidad de alargar la vida útil del producto, almacene las cintas y los sistemas de cierre en un lugar seco y sombreado a una temperatura normal de 20 °C.

## 17. Inflamabilidad de los sistemas de cama SEGUFIX®



Según la norma DIN EN 71-2 sección 4.3, las cintas no son inflamables. Según la norma DIN 75200 la velocidad de inflamación es nula. Se sobreentiende que los productos SEGUFIX® no deben entrar en contacto con cigarrillos encendidos, ni ser expuestos a llamas que pueden ser perjudicial para la salud y ocasionar daños materiales.

## 18. Elija siempre la talla adecuada

Elija siempre la talla correcta según el tamaño y la cintura del paciente (ver tabla de tallas). Productos muy grandes / muy pequeños perjudican la comodidad y la seguridad del paciente.

## 19. Reciclaje de residuos

Los cartones deben ser reciclados en el contenedor azul de reciclado de papeles, los embalajes y empaques de plásticos en el contenedor amarillo destinado al reciclaje de envases plásticos y los productos defectuosos en el contenedor negro de desechos residuales.

## 20. Declaración de conformidad

Puede conseguir la declaración de conformidad bajo:  
[https://www.segufix.com/conformity\\_es.php](https://www.segufix.com/conformity_es.php)

## 21. Recomendaciones para evitar accidentes

(Prof. Dr.-Ing. U. Boenick, Universidad Técnica de Berlín):

1. Instale las fijaciones laterales
2. Suba las barandillas de la cama (Excepción: Sujeción de 5-puntos)
3. Es posible que sea necesario implementar más elementos de fijación, para evitar la huida del paciente de la cama.

## 22. Importante antes de cada uso

- Verificar el estado y el correcto funcionamiento de los cierres
- Verificar el estado de las cintas: ojales, pasadores textiles, cierres de Velcro®, cierres clic y cierres de hebilla
- Utilizar sólo con indicaciones suficientes
- Verificar los requerimientos legales

# Instrucciones de mantenimiento

- **Las cintas SEGUFIX®** (blanco natural) compuestas de una mezcla de algodón y viscosilla, pueden ser lavadas en la lavadora a una temperatura máxima de 95 °C.  
Temperaturas bajas y redes de lavado alargan la duración de vida del producto. No es indicado el uso de trenes de lavado y prensado, ya que los ojales de las cintas pueden dañarse. Las cintas no están prelavadas, la posibilidad de encogimiento es de un 8 %.  
Almacene las cintas una vez secas.  
Detergente: no agresivo, sin suavizante y sin blanqueadores (cloro/lejía).  
Secadora: ciclo delicado, a temperatura baja y preferiblemente en red de lavado.  
Desinfección: Se puede aplicar el proceso de desinfección termoquímico de tejidos.  
Sobredosis de detergente daña el material de las cintas.
- **Los cinturones de transporte SEGUFIX®** (colorido/negro) compuestos de poliéster pueden ser lavados en la lavadora a una temperatura máxima de 30 °C.  
Temperaturas bajas y redes de lavado alargan la duración de vida del producto. No es indicado el uso de trenes de lavado y prensado, ya que los ojales de las cintas pueden dañarse. Almacene las cintas una vez secas.  
Detergente: no agresivo, sin suavizante y sin blanqueadores (cloro/lejía).  
Secadora: ciclo delicado, a temperatura baja y preferiblemente en red de lavado.
- **Retire todos los SEGUFIX®-Cierres y vástagos** antes del lavado. Cierres lavados por error, dejarán de funcionar y de ser confiables. Limpie y desinfecte los cierres con un paño húmedo. Nunca sumerja los cierres en líquido.
- **Los cierres de Velcro®** deben ser cerrados antes del lavado y secado en máquina, para evitar la acumulación de pelusas en los ganchos del Velcro®. Para eliminar las pelusas, pase un cepillo duro sobre el cierre del Velcro®. Es normal que debido al uso diario del cierre, se acumulen pelusas en los ganchos del Velcro®. Esto puede reducir su capacidad de adherencia. Antes de cada uso, revise la capacidad de adherencia del Velcro®.
- **La durabilidad** depende de la intensidad de su uso y puede ser prolongada utilizando procedimientos de lavado delicados (detergentes/red de lavado).

Edición 15 · 2019-11

© by SEGUFIX®-Bandagen, 2019

Aplican nuestras condiciones generales de contratación y de suministro:

<https://www.segufix.com/PDFs/AGBs/>

Condiciones\_generales.pdf

Queda reservado el derecho a realizar cambios en los productos. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier modificación de nuestros productos con relación a las ilustraciones y descripciones del presente catálogo.

Quedan reservados todos los derechos.

La reproducción o difusión a través de sistemas electrónicos/soportes de datos, también en forma parcial, sólo se permitirá con el previo consentimiento expreso por escrito.

Todas las consultas deben ser dirigidas a:

## SEGUFIX®-Bandagen

Das Humane System GmbH & Co. KG

Allerbeeksring 33 · D-21266 Jesteburg · Alemania

Teléfono: +49 (0) 41 83 500-0

Telefax: +49 (0) 41 83 500-200

E-mail: [export@segufix.de](mailto:export@segufix.de)

[www.segufix.com](http://www.segufix.com) · [www.segufix-shop.com](http://www.segufix-shop.com)