
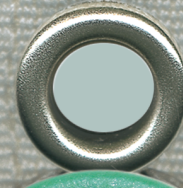
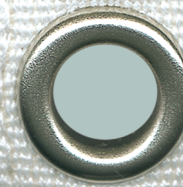


El Sistema SEGUFIX[®]

- El sistema más humano, más ético y más práctico -

SEGUFIX[®] - el método seguro

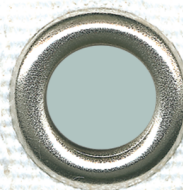

Catálogo 2025



Dar calidad humana a lo indispensable

Un problema antiguo

Desde los tiempos antiguos se sabe, que la inmovilización de pacientes contribuye a su recuperación. Sin embargo, la inmovilización de las extremidades frecuentemente retrasaban el proceso curativo de heridas ocasionadas por desgarres y ansiedad. A través de los años, no ocurrió un desarrollo en los métodos de sujeción, hasta que, en el año de 1960, un padre preocupado tuvo una simple y brillante idea que revolucionó la sujeción de pacientes.

La situación extrema de un niño

Dicho padre tuvo un hijo de dos años de edad que padecía de neumonía. Debido a los rechazos del niño de guardar reposo en cama, los médicos se vieron obligados a amarrar al pequeño de manos y pies. Completamente alterado y asustado, el niño se opuso a la ingesta de alimentos. En vista a este nuevo problema, los médicos ordenaron la alimentación forzada. Los padres desesperados, no soportaron esta situación y se llevaron su hijo a casa, bajo su propia responsabilidad.

El amor da pie a la creatividad

En la comodidad de su hogar, el pequeño fue recuperándose rápidamente, pero seguía sin querer permanecer en cama. Confrontado con esta situación, el padre tuvo la idea de crear un arnés para sujetar al pequeño a la cama permitiéndole gran libertad de movimiento, liberando sobre todo sus manos y pies. El niño aceptó este arnés, se quedó en cama y pudo recuperarse pronto.

Una solución para muchos

Algunos años después, el padre se enteró de la amplitud del problema de la sujeción de pacientes a nivel mundial. Reconoció que un gran número de pacientes sufrían por no guardar reposo en cama o por caerse de ella. Un problema que ya él había resuelto años atrás para su hijo.

Renombrados médicos reconocieron el beneficio para pacientes y para el personal sanitario. El Prof. Dr. h.c. Bürger-Prinz introdujo la innovadora sujeción en el Hospital Universitario de Hamburgo (UK Eppendorf). El sistema SEGUFIX® inmediatamente fue aprobado por los profesionales, y poco después, establecido internacionalmente como el método de fijación de pacientes.

Máxima libertad – mínima inmovilización

Los casos de inmovilización médica son muy diversos y a veces es necesario inmovilizar los miembros de un paciente. Para satisfacer las demandas individuales, constantemente complementamos nuestra gama de productos en colaboración estrecha con el personal especializado del campo medicinal. Todos nuestros productos nuevos son desarrollados bajo nuestro lema: “máxima libertad de movimiento con un mínimo de fijación.”

Una sujeción humana

En este sentido, el sistema SEGUFIX® responde a todas las necesidades de pacientes y del personal sanitario concernientes al posicionamiento y a la sujeción. Por primera vez, estas soluciones innovadoras permiten una sujeción indicada y renuncian a los métodos degradantes de antes. Por este motivo, desde su introducción en los círculos facultativos, el sistema SEGUFIX® fue aprobado y declarado unánimemente como el sistema de “sujeción humana”. En todos los aspectos del cuidado de pacientes, especialmente en situaciones difíciles de su cuidado, el sistema SEGUFIX® aporta un alivio significativo para todas las personas afectadas.

Constancia en los cuidados médicos diarios

Como inventores y fabricantes del sistema SEGUFIX®, nos alegramos de proveerles con productos que le ayudarán a realizar sus tareas de cuidado de manera segura y confiable. Con más de 50 años de experiencia, nuestra empresa familiar continuará asistiéndole con continuidad, calidad y profesionalidad.

Cordialmente,

su familia Sánchez-Wysozki

Grupos de productos

SEGUFIX®-Sistemas de cierre – grupo de productos 1000



SEGUFIX®-Sistema de cama – grupo de productos 2000



SEGUFIX®-Cintas adicionales – grupo de productos 3000



SEGUFIX®-Sistema de fijación rápida – grupo de productos 4000



SEGUFIX®-Sistema móvil – grupo de productos 5000



SEGUFIX®-Sistema de transporte – grupo de productos 6000



SEGUFIX®-Sistema de cinturones de asiento – grupo de productos 7000



SEGUFIX®-Accesorios y artículos en piel de oveja – grupo de productos 8000



Información general

SEGUFIX®-	Página
La historia de SEGUFIX®: Dar calidad humana a lo indispensable	2
Vista general de los grupos de productos 1000 - 8000	3
índice	4 - 5
Sistema-semáforo	6 - 7
Instrucciones de seguridad y advertencias	8 - 9
Estándares de calidad	10
Instrucciones de mantenimiento	11
Tipos de modelos / Abreviaturas de los diferentes tipos de modelos	15
Información corporativa	48

SEGUFIX®-Sistemas de cierre

grupo de productos 1000

Número de artículo	Denominación del producto	Página
1206, 1216	• SEGUFIX®-Cierre magnético negro / segufix.com	12
1208, 1218	• SEGUFIX®-Llave magnética roja	12
1306, 1316	• SEGUFIX®-Cierre magnético giratorio verde	13
1307, 1317	• SEGUFIX®-Llave magnética giratoria amarilla	13
1406, 1416	• Cierre a presión	14
1407, 1417	• Llave para el cierre a presión	14

SEGUFIX®-Sistema de cama

grupo de productos 2000

			Velcro® clic / etc.	Denominación del producto	Página
2203	2303	2403	–	• SEGUFIX®-Sujeción-tórax	20
2204	2304	2404	–	• SEGUFIX®-Sujeción-muñecas	21
2205	2305	2405	2705	• SEGUFIX®-Sujeción-tobillos	22 - 23
2211	2311	2411	2711	• SEGUFIX®-Sujeción-muslos	22 - 23
2212	2312	2412	–	• SEGUFIX®-Sujeción-tórax adicional	20
2217	2317	2417	–	• SEGUFIX®-Posicionamiento-cabeza	24
2221	2321	2421	2721	• SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal	16
2222	2322	2422	–	• SEGUFIX®-Completo con cinta-perineal	17
2224	2324	2424	2724	• SEGUFIX®-Sujeción-muñecas alargada	21, 23, 31
2231	2331	2431	2731	• SEGUFIX®-Estándar con fijador-muslos	18
2232	2332	2432	–	• SEGUFIX®-Completo con fijador-muslos	19
2250/r	2350/r	2450/r	–	• SEGUFIX®-Compacto	25

SEGUFIX®-Cintas adicionales

grupo de productos 3000

			Velcro® clic / etc.	Denominación del producto	Página
–	–	–	3110/r	• SEGUFIX®-Cinta-sobre-piernas	27
3240 - 3244	3340 - 3344	3440 - 3444	–	• SEGUFIX®-Cintas de alargamiento	26
–	–	–	3745	• SEGUFIX®-Cinta de alargamiento con cierre clic	26

SEGUFIX®-Sistema de fijación rápida

grupo de productos 4000



			Velcro® clic / etc.	Denominación del producto	Página
4213/r	4313/r	4413/r	–	• SEGUFIX®-Fijador-rápido-hombros	28
4214/r	4314/r	4414/r	–	• SEGUFIX®-Fijador-rápido-muñecas	28
4215/r	4315/r	4415/r	–	• SEGUFIX®-Fijador-rápido-tobillos	29

SEGUFIX®-Sistema móvil				grupo de productos 5000	
			Velcro® clic / etc.	Denominación del producto	Página
5204/r	5304/r	5404/r	–	• SEGUFIX® -Cinturón-fijación-muñecas	32
5218	5318	5418	5718	• SEGUFIX® -Ayuda de fijación	33
5243	5343	5443	–	• SEGUFIX® -Fijador-hombros-camilla	30
5245	5345	5445	–	• SEGUFIX® -Fijador-tobillos-camilla	30
–	–	–	5745	• SEGUFIX® -Posicionamiento-tobillos-camilla Velcro®	31
SEGUFIX®-Sistema de transporte				grupo de productos 6000	
			Velcro® clic / etc.	Denominación del producto	Página
6216	6316	6416	6710	• SEGUFIX® -Cinturón abdominal de transporte	34
–	–	–	6720	• SEGUFIX® -Arnés	35
–	–	–	6730	• SEGUFIX® -Cinta-respalda	35
6240	6340	6440	–	• SEGUFIX® -Sujeción-torso	36
6244	6344	6444	–	• SEGUFIX® -Sujeción-torso con protector-perineal	36
6256	6356	6456	6750	• SEGUFIX® -Cinturón-multiuso	37
6266	6366	6466	6760	• SEGUFIX® -Cinturón-pelvis	38 - 39
6276	6376	6476	–	• SEGUFIX® -Cinturón-pelvis con cinta-perineal	39
SEGUFIX®-Sistema de cinturones de asiento				grupo de productos 7000	
			Velcro® clic / etc.	Denominación del producto	Página
7240	7340	7440	7740	• SEGUFIX® -Asiento	40 - 41
7246	7346	7446	–	• SEGUFIX® -Asiento	40
7250	7350	7450	–	• SEGUFIX® -Asiento con cinta-perineal	42
7256	7356	7456	–	• SEGUFIX® -Asiento con cinta-perineal	42
7260	7360	7460	–	• SEGUFIX® -Asiento con fijador-muslos	43
7266	7366	7466	–	• SEGUFIX® -Asiento con fijador-muslos	43
–	–	–	7770	• SEGUFIX® -Fijador-muñeca-transporte Velcro®	44
7280	7380	7480	7780	• SEGUFIX® -Sujeción-tobillos-transporte	44
SEGUFIX®-Accesorios y artículos en piel de oveja				grupo de productos 8000	
Número de artículo				Denominación del producto	Página
8010				• SEGUFIX® -Piel de oveja para cama	45
8011				• SEGUFIX® -Piel de oveja para silla de ruedas	45
8012				• SEGUFIX® -Piel de oveja para SEGUFIX® -Estándar con cinta-perineal /fijador-muslos	45
8013				• SEGUFIX® -Funda protectora	38
8014				• SEGUFIX® -Bolso de transporte	46
8015				• SEGUFIX® -Maletín de guardia	46
8016				• SEGUFIX® -Ayuda para sentarse	46
8017				• Antideslizante	47
8022				• SEGUFIX® -Red de lavado	27, 47

Etiquetado de productos

Las etiquetas coloridas SEGUFIX® le ayudan a clasificar fácilmente los diferentes productos, ofreciendo las siguientes ventajas:

- Orientación rápida y confiable en la asignación de los diferentes cinturones a través de etiquetas llamativas
- División de las partes del cuerpo según los colores del semáforo: rojo / amarillo / verde (ver ilustración)
- Clara identificación de los cinturones mediante el número del artículo y la denominación del producto (en varios idiomas)
- Una elección rápida de la talla (S / M / L / XL) por medio de su posicionamiento llamativo en la etiqueta
- Etiquetado de las instrucciones de mantenimiento de textiles según DIN EN ISO 3758:2013-12

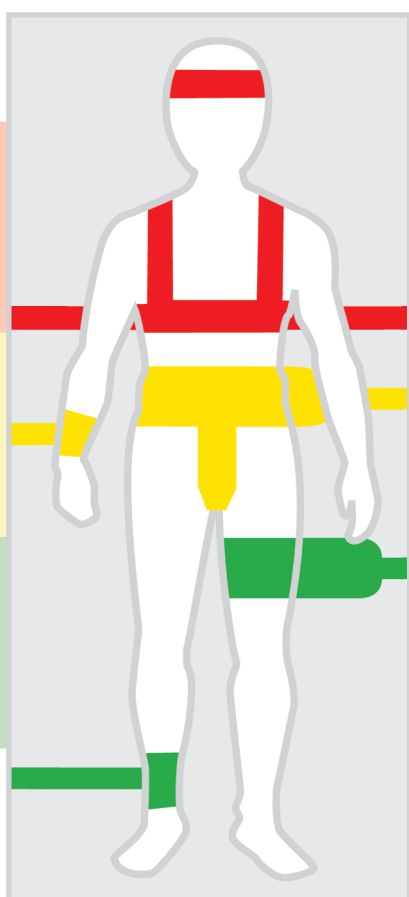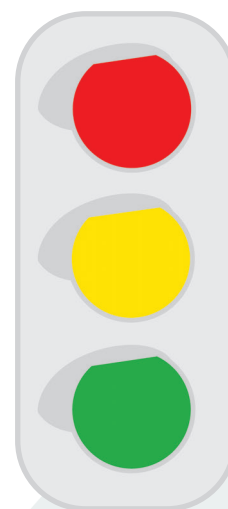

ROJO
Tórax y cabeza



AMARILLO
Cintura y mano



VERDE
Muslo y pie



AZUL
Cintas adicionales




BLANCO
Transporte



SEGUFIX® – Productos clasificados según el sistema-semáforo

ROJO Tórax y cabeza	AMARILLO Cintura y mano	VERDE Muslo y pie
Sujeción-tórax	Estándar con cinta-perineal	Sujeción-muslos
Sujeción-tórax adicional	Estándar con fijador-muslos	Sujeción-tobillos
Posicionamiento-cabeza	Sujeción-muñecas	Cinta de conexión
Fijador-rápido-hombros	Fijador-rápido-muñecas	Fijador-rápido-tobillos
Fijador-hombros-camilla	Compacto	Fijador-tobillos-camilla
	Cinturón-fijación-muñecas	Cinta-sobre-piernas
	Ayuda de fijación	

BLANCO Transporte	AZUL Cintas adicionales
Asiento	Cintas de alargamiento
Sujeción-torso	
Cinturón-pelvis	
Cinturón-multiuso	
Cinturón abdominal de transporte	
Cinta-respaldar	
Arnés	

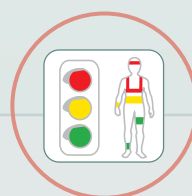

El Sistema-semáforo SEGUFIX® le acompaña por este catálogo orientándole en la búsqueda de los diferentes productos.

Clasificación de las etiquetas según los colores del semáforo, rojo – amarillo – verde.

Cada color de etiqueta corresponde a una sección del cuerpo humano (ver tabla arriba).



Las instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso únicamente son válidas para productos originales SEGUFIX®. No utilice el sistema SEGUFIX® si no ha leído y entendido todas las instrucciones y las medidas de seguridad.

Utilice únicamente las instrucciones de uso actualizadas y guarde las instrucciones. Producto e instrucciones de uso deben coincidir. El uso inadecuado del sistema SEGUFIX® puede ocasionar lesiones graves inclusive la muerte. La seguridad de su paciente depende del uso correcto del sistema SEGUFIX®.

SEGUFIX® - Indicaciones de seguridad y advertencias para el cuidado del paciente

1. Condiciones de uso

El uso correcto del producto, tomando en cuenta las disposiciones legales nacionales, corresponde a la organización que aplica el sistema SEGUFIX®. Respete siempre los reglamentos internos para la inmovilización médica, sus protocolos de sujeción y la legislación pertinente vigente. Deben cumplirse las instrucciones de uso.

Los productos SEGUFIX® únicamente deben ser aplicados por personal capacitado, debidamente entrenado. Disposiciones legales e indicaciones médicas deben respetarse estrictamente. El médico tratante debe asegurar que el paciente tenga un estado de salud que permita la aplicación del sistema SEGUFIX®.

2. Uso previsto

Los productos SEGUFIX® deben ser utilizados exclusivamente para fines medicinales.

3. Retire objetos peligrosos

Retire todos los objetos al alcance del paciente con los que se pueda autolesionar o con los cuales el paciente pueda dañar las cintas (por ejemplo: gafas, joyas, objetos afilados o punzantes).

4. Inspeccione el sistema de sujeción antes de cada uso



Antes de utilizar el producto, revise que el producto no tenga: costuras lacerantes, partes deterioradas u ojales dañados. Productos defectuosos pueden implicar limitaciones

en sus funciones y causar lesiones. No utilice productos defectuosos y/o deteriorados.

5. Los cierres no deben estar bajo presión

Para poder abrir los cierres, debe garantizarse la movilidad entre la parte superior e inferior del punto de anclaje del cierre (art. 1206). Por consiguiente, sobreponga máximo 4 cintas por cierre (excepción: productos con "r" o "f" en el número de identificación del artículo los cuales son fabricados con cintas más gruesas. En este caso: sobreponga máximo 3 cintas por cierre!). El SEGUFIX®-Cierre magnético giratorio verde (art.1306) permite sobreponer un máximo de 4 cintas por cierre. El cierre a presión (art. 1406) permite sobreponer un máximo de 3 cintas por cierre.

6. Utilice las fijaciones laterales

No utilice el sistema SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal o con fijador-muslos sin las fijaciones laterales. Sin las fijaciones laterales, el paciente puede rotar con el cinturón abdominal puesto o deslizarse del borde de la cama con la posibilidad de sufrir una compresión torácica y fallecer. Si algunos pacientes logran alcanzar el borde de la cama, a pesar de haber implementado las fijaciones laterales y haber subido las barandillas de la cama, es necesario recurrir a otras medidas adicionales de sujeción. Importante: Introduzca las fijaciones laterales – antes de amarrar – por los pasadores ubicados en la cinta ancha de cama (ver instrucciones de uso).

7. Preste atención en camas, asientos y camillas


- Los productos SEGUFIX® sólo deben ser utilizados en camas, asientos estables y en camillas que permitan una instalación conforme a las instrucciones de uso.
- Los productos SEGUFIX® deben ser instalados de forma que no se puedan deslizar.
- Los sistemas de sujeción y los mecanismos de movimientos de camas, colchones, colchones con cambios de presión etc., camillas o asientos pueden perjudicarse mutuamente. Consecuencias: daños materiales, el mal funcionamiento de éstos y peligro de lesiones.
- Los puntos de fijación elegidos no deben presentar bordes afilados.
- Los productos SEGUFIX® no impiden que las camas, asientos y camillas se vuelquen o se desplacen de su sitio.

De gran ayuda en este contexto:

Norma para camas: DIN EN 60601-2-52

Norma para sillas de ruedas: DIN EN 12182 y DIN EN 12183

8. Las barandillas de la cama deben estar elevadas

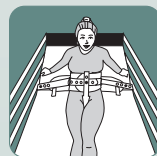

Para evitar accidentes durante la sujeción, es necesario subir las barandillas de la cama (excepción: sujeción de 5 puntos).

Atención: En caso de barandillas discontinuas, es necesario aplicar una pieza adicional protectora "gap protector" con el fin de evitar el deslizamiento del paciente a través de la abertura. Con barandillas discontinuas es posible que el paciente, a pesar de estar sujetado, resbale a través de la abertura con el riesgo de sufrir una compresión torácica.

9. Supervise los pacientes inmovilizados



Pacientes inmovilizados deben ser supervisados constantemente. Pacientes agresivos, agitados e inquietos, o aquellos que corren peligro de ahogamiento, requieren de una supervisión continua.

10. Inspeccione los sistemas de cierre antes de cada uso



Inspeccione si los SEGUFIX®-Cierres magnéticos negros / segufix.com, los SEGUFIX®-Cierres magnéticos giratorios verdes, los cierres a presión, los cierres clic, los cierres

Velcro® y los cierres de hebilla funcionan y cierran correctamente. No sumerja los cierres en líquido. Los cierres podrían dejar de funcionar o funcionar de forma defectuosa. Si los cierres defectuosos no logran ser abiertos con su llave, corte las cintas con tijera o con un cortador de cintas. Examine si la cabeza del vástago está dañada o desgastada.

11. Advertencia referente a marcapasos



En pacientes con marcapasos debe respetarse una distancia de seguridad de 10 cm entre el marcapasos y los cierres magnéticos / llaves magnéticas, ya que éstos podrían ocasionar taquicardias (alternativa:

cierre a presión). Referente a posibles perjuicios causados por imanes en otros tipos de implantes, lea las instrucciones del fabricante correspondiente.

12. Verifique la instalación de las cintas

Verifique regularmente si las cintas de fijación están correctamente instaladas a la cama. Las cintas deben estar ajustadas firmemente al marco de la cama o, en camas ortopédicas: fije las cintas a las partes móviles. Las cintas no deben deslizarse.

13. Utilice únicamente productos SEGUFIX® originales

Por motivos de seguridad, los productos SEGUFIX® no deben ser modificados ni utilizados en combinación con productos de otras marcas. En caso de incumplimiento, se pierde cualquier derecho de reclamación y queda anulada la garantía.

14. Uso del sistema SEGUFIX® en vehículos



En automóviles, los cinturones de transporte SEGUFIX® no sustituyen el uso obligatorio de los cinturones de seguridad (cinturón de tres puntos y pelvis). Los cinturones de transporte sólo deben ser utilizados

de apoyo adicional o para la sujeción del paciente. Asegúrese de que en caso de emergencia el paciente pueda ser rescatado rápidamente (colocar los cortadores de cintas al alcance de la vista y de la mano).

15. Seguro, pero sin apretar

La sujeción tiene que estar bien ajustada sin afectar la respiración y la circulación de la sangre del paciente. Productos poco tensados pueden comprometer la seguridad del paciente. Compruebe regularmente si la sujeción se encuentra en la posición correcta.

16. Almacenamiento

Con la finalidad de alargar la vida útil del producto, almacene las cintas y los sistemas de cierre en un lugar seco y sombreado a una temperatura normal de 20 °C.

17. Inflamabilidad de los sistemas de cama SEGUFIX®



Según la norma DIN EN 71-2 sección 4.3, las cintas no son inflamables.

Según la norma DIN 75200 la velocidad de inflamación es nula.

Se sobreentiende que los productos SEGUFIX® no deben entrar en contacto con cigarrillos encendidos, ni ser expuestos a llamas que pueden ser perjudicial para la salud y ocasionar daños materiales.

18. Elija siempre la talla adecuada

Elija siempre la talla correcta según el tamaño y la cintura del paciente (ver tabla de tallas). Productos muy grandes / muy pequeños perjudican la comodidad y la seguridad del paciente.

19. Reciclaje de residuos

Los cartones deben ser reciclados en el contenedor azul de reciclado de papeles, los embalajes y empaques de plásticos en el contenedor amarillo destinado al reciclaje de envases plásticos y los productos defectuosos en el contenedor negro de desechos residuales.

20. Declaración de conformidad

Puede conseguir la declaración de conformidad bajo: https://www.segufix.com/conformity_es.php

21. Recomendaciones para evitar accidentes

(Prof. Dr.-Ing. U. Boenick, Universidad Técnica de Berlín):

1. Instale las fijaciones laterales
2. Suba las barandillas de la cama (Excepción: sujeción de 5-puntos)
3. Es posible que sea necesario implementar más elementos de fijación, para evitar la huida del paciente de la cama.

22. Importante antes de cada uso

- Verificar el estado y el correcto funcionamiento de los cierres
- Verificar el estado de: cintas, ojales, pasadores textiles, cierres de Velcro®, cierres clic y de hebilla
- Utilizar sólo con indicaciones suficientes
- Verificar los requerimientos legales

- **La calidad SEGUFIX® se mantiene**

La marca de fábrica SEGUFIX® responde a más de 50 años de calidad sostenida de sus productos, elaborados con materia prima de primera calidad, fabricados sólida y minuciosamente logrando una funcionalidad eficaz. Controles regulares de calidad garantizan el más alto estándar de seguridad.

- **Fabricado en Alemania**

Desde su fundación, la empresa familiar produce los sistemas SEGUFIX® en la República Federal de Alemania.

- **Ley de productos médicos**

El sistema SEGUFIX® cumple con las exigencias legales según la ley de productos médicos.

- **Instrucciones de uso – Instrucciones de seguridad – etiquetado de productos**

Las instrucciones de uso detalladas e ilustradas, con sus indicaciones de seguridad y advertencias, explican el uso correcto del sistema SEGUFIX®. Los productos SEGUFIX® llevan en su etiquetado las instrucciones de lavado y el distintivo CE reglamentario. El sistema tricolor de las etiquetas, según el sistema semáforo, ofrecen una orientación rápida y confiable en la aplicación del producto.

- **Las cintas SEGUFIX® son difícilmente inflamables**

Las cintas cumplen con las estrictas normas de la industria automovilística correspondiente a la normativa alemana DIN 75200 “Especificación de la inflamabilidad de los materiales utilizados para el equipamiento interior de vehículos” así como la normativa alemana DIN EN 71-2 sección 4.3 “Seguridad de Juguetes – Inflamabilidad”.

- **Innovación de productos – fabricación por encargo**

SEGUFIX® cuenta con un departamento para el desarrollo de nuevos productos. En colaboración estrecha con hospitales, centros de rehabilitación y otros establecimientos, los problemas han sido solucionados a lo largo de los años. Estas soluciones permitieron la creación de productos nuevos muy útiles para el cuidado de pacientes. Productos hoy en día indispensables en la práctica diaria. Desarrollamos y elaboramos modelos especiales según sus necesidades, sean simples o complicados, por encargo.

- **Asesoría competente**

Nuestro personal entrenado gustosamente le asesorará sobre todas las preguntas relacionadas con nuestros productos.

- **Ferias y/o exposiciones**

En la feria MEDICA le ofrecemos información sobre innovaciones en nuestros productos y asesoría individual.

- **Precios estables**

Gracias a nuestro innovador y racional proceso de producción, logramos mantener nuestros precios estables desde hace más de 20 años. Hemos logrado que nuestros clientes se beneficien de las ventajas de nuestra política de producción.

- **Entregas rápidas y confiables**

Todos los productos SEGUFIX® se encuentran en almacén, disponibles para su envío.

- **SEGUFIX® online**

Información sobre nuestros productos en nuestra página web: www.segufix.com

- **Las cintas SEGUFIX®** (blanco natural)

compuestas de una mezcla de algodón y viscosa, pueden ser lavadas en la lavadora a una temperatura máxima de 95 °C. Temperaturas bajas y redes de lavado alargan la vida útil del producto. No es indicado el uso de trenes de lavado y prensado, ya que los ojales de las cintas pueden dañarse. Las cintas no están prelavadas, la posibilidad de encogimiento es de un 8 %. Almacene las cintas una vez secas.

Detergente: no agresivo, sin suavizante y sin blanqueadores (cloro/lejía).

Secadora: ciclo delicado, a temperatura baja y preferiblemente en red de lavado.

Desinfección: Se puede aplicar el proceso de desinfección termoquímico de tejidos.

Sobredosis de detergente daña el material de las cintas.

- **Los cinturones de transporte SEGUFIX®** (colorido/negro)

compuestos de poliéster pueden ser lavados en la lavadora a una temperatura máxima de 30 °C. Temperaturas bajas y redes de lavado alargan la vida útil del producto. No es indicado el uso de trenes de lavado y prensado, ya que los ojales de las cintas pueden dañarse. Almacene las cintas una vez secas.

Detergente: no agresivo, sin suavizante y sin blanqueadores (cloro/lejía).

Secadora: ciclo delicado, a temperatura baja y preferiblemente en red de lavado.

- **Retire todos los SEGUFIX®-Cierres y vástagos**

antes del lavado. Cierres lavados por error, dejarán de funcionar y de ser confiables.

Limpie y desinfecte los cierres con un paño húmedo. Nunca sumerja los cierres en líquido.

- **Los cierres de Velcro®**

deben ser cerrados antes del lavado y secado en máquina, para evitar la acumulación de pelusas en los ganchos del Velcro®. Para eliminar las pelusas, pase un cepillo duro sobre el cierre del Velcro®. Es normal que debido al uso diario del cierre, se acumulen pelusas en los ganchos del Velcro®. Esto puede reducir su capacidad de adherencia. Antes de cada uso, revise la capacidad de adherencia del Velcro®.

- **La durabilidad**

depende de la intensidad de su uso y puede ser prolongada utilizando procedimientos de lavado delicados (detergentes/red de lavado).

- **SEGUFIX®-Artículos forrados en piel de oveja**

Lavadora: Lave entre 30 - 40 °C, no centrifugar. Utilice detergente especial para lana.

Lavado a mano: Lave rápidamente con agua tibia (30 - 40 °C) y detergente de lana, aclare en agua tibia y oscura.

Secado: Seque en secadora o cuelgue en un ambiente ventilado.

Atención: No exponer a plena luz del sol.

Antes que el forro de piel de oveja esté completamente seco, extiéndalo nuevamente a su forma original y – de ser necesario – peine la piel suavemente con un cepillo metálico.

Aviso: Velar que la piel de oveja no permanezca demasiado tiempo sumergida en agua (no dejar remojar).



Red de lavado:

La SEGUFIX®-Red de lavado protege el material de los cinturones durante el lavado.

Más información ver páginas 27 y 47.



Fabricación especial:

Como fabricantes e inventores del sistema SEGUFIX® también producimos artículos con desviaciones en las medidas estándares de nuestros productos, según sus instrucciones.



SEGUFIX®-Cierre magnético negro / segufix.com

Art. 1206

para cerrar los sistemas SEGUFIX®



Art. 1216

10 unidades
SEGUFIX®-Cierre magnético
negro / segufix.com



SEGUFIX®-Llave magnética roja

Art. 1208

para abrir rápidamente el SEGUFIX®-Cierre
magnético negro / segufix.com



Art. 1218

10 unidades
SEGUFIX®-Llave magnética
roja



SEGUFIX®-Botón magnético negro / segufix.com

Art. 1204

sin SEGUFIX®-Vástago metálico



Art. 1214

10 unidades
SEGUFIX®-Botón magnético
negro / segufix.com



SEGUFIX®-Vástago metálico

Art. 1205

para el SEGUFIX®-Botón magnético negro /
segufix.com



Art. 1215

10 unidades
SEGUFIX®-Vástago metálico

**Nuevo
empaque práctico
de 10 unidades**



SEGUFIX®-Cierre magnético giratorio verde

Art. 1306

para cerrar los sistemas SEGUFIX®
(para artículos fabricados a partir de abril 2003)



Art. 1316

10 unidades
SEGUFIX®-Cierre magnético giratorio verde



SEGUFIX®-Llave magnética giratoria amarilla

Art. 1307

para abrir rápidamente el SEGUFIX®-Cierre magnético giratorio verde



Art. 1317

10 unidades
SEGUFIX®-Llave magnética giratoria amarilla



SEGUFIX®-Botón magnético giratorio verde

Art. 1304

sin SEGUFIX®-Vástago cuadrado



Art. 1314

10 unidades
SEGUFIX®-Botón magnético giratorio verde



SEGUFIX®-Vástago cuadrado

Art. 1305

para el SEGUFIX®-Botón magnético giratorio verde



Art. 1315

10 unidades
SEGUFIX®-Vástago cuadrado

SEGUFIX®-Sistema de cierre magnético negro



- cierre de seguridad a base de imanes (mecanismo especial)
- seguro y rápido para cerrar los sistemas SEGUFIX®
- alta capacidad de resistencia

SEGUFIX®-Sistema de cierre magnético giratorio verde



- cierre de seguridad a base de imanes (mecanismo especial)
- seguro y rápido para cerrar los sistemas SEGUFIX®
- mayor fuerza de tracción y de seguridad
- llave magnética codificada

Sistema de cierre a presión



- cierre de seguridad para usos que deban prescindir de imanes
- seguro y rápido para cerrar los sistemas SEGUFIX®
- alta capacidad de resistencia



Cierre a presión

Art. 1406

- para cerrar los sistemas SEGUFIX®
- sin mecanismo magnético
- puede ser utilizado en la proximidad de un marcapasos



Art. 1416


10 unidades
Cierre a presión



Llave para el cierre a presión

Art. 1407

para abrir el cierre a presión

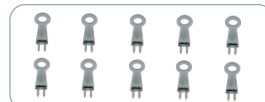

Art. 1417

10 unidades
Llave para el cierre a presión



Botón del cierre a presión

Art. 1404

(sin vástago del cierre a presión)



Art. 1414

10 unidades
Botón del cierre a presión



Vástago del cierre a presión

Art. 1405

para el botón del cierre a presión



Art. 1415

10 unidades
Vástago del cierre a presión

Abreviaturas de los diferentes tipos de modelos

Modelo básico → cinta de fijación: longitud mediana

- Envergadura* de las cintas de fijación a la cama:
sistema de cierre (con ojales): apróx. 1200 - 1450 mm
productos Velcro® (sin ojales): apróx. 950 - 1540 mm

ejemplo del n° de artículo: 2221 - M (talla M)



Modelo b → cinta de fijación: corta

- envergadura* de las cintas de fijación a la cama:
sistema de cierre (con ojales): apróx. 1000 - 1200 mm
productos Velcro® (sin ojales): apróx. 920 - 1330 mm
- las cintas de fijación son apróx. 130 mm más cortas en cada lado que las del modelo básico

ejemplo del n° de artículo: 2221/b - M (talla M)



*Envergadura de las cintas de fijación:
distancia entre ambos puntos de
fijación a la cama

Modelo e → cinta de fijación: larga

- envergadura* de las cintas de fijación a la cama:
sistema de cierre (con ojales): apróx. 1450 - 1700 mm
productos Velcro® (sin ojales): apróx. 950 - 1800 mm
- las cintas de fijación son apróx. 200 mm más largas en cada lado que las del modelo básico

ejemplo del n° de artículo: 2221/e - M (talla M)



Modelo f → forrado

- para piel sensible
- 100 % puro algodón

ejemplo del n° de artículo: 2221/f - M (talla M)



Modelo r → reforzado

- cinta de ojales reforzada, para mayor resistencia

ejemplo del n° de artículo: 2221/r - M (talla M)



Aviso productos con cierre Velcro®:

No se considera una sujeción debido al Velcro® –
Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.



SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal

Art. 2221 / Art. 2321 / Art. 2421

Uso previsto:

- sujeción de pacientes, ayuda para posicionar a pacientes en la cama
- para la aplicación de medidas privativas de libertad


Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal y fijaciones laterales integradas
- 3 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L / XL / XXL* (a partir de XL sólo en versión "r")

Modelos: modelo básico / b / e / f / r

Pieza por separado: art. 2121 (sin cierre y sin llave)

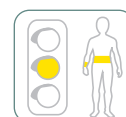

SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 2221

Estándar con cinta-perineal y sistema de cierre magnético negro



Art. 2321

Estándar con cinta-perineal y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 2421

Estándar con cinta-perineal y sistema de cierre a presión



Modelos – número de artículo / identificación			
Nº art. modelo	Características del producto	Envergadura* (con ojales)	Envergadura* productos Velcro® (sin ojales)
...	cinta de fijación: mediana	1200 - 1450 mm	950 - 1540 mm
... /b	cinta de fijación: corta	1000 - 1200 mm	920 - 1330 mm
... /e	cinta de fijación: larga	1450 - 1700 mm	950 - 1800 mm
... /f	forado, para piel sensible, 100 % puro algodón		–
... /r	reforzado, para mayor resistencia		–

*Envergadura: distancia entre ambos puntos de fijación a la cama

Tabla de tallas			
Talla	Circunferencia cintura	Cinturón ① abdominal	Cinta ② ancha de cama
S	520 - 820 mm	140 mm	180 mm
M	800 - 1200 mm	180 mm	180 mm
L	1160 - 1560 mm	180 mm	180 mm
XL	1360 - 1800 mm	180 mm	180 mm
XXL*	1560 - 1980 mm	180 mm	180 mm

*talla XXL por encargo

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)



SEGUFIX®-Estándar Velcro® con cinta-perineal

Art. 2721

Uso previsto:


- ayuda para posicionar a pacientes en la cama, da estabilidad a pacientes
- no se considera una sujeción debido al Velcro®
Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Estándar Velcro® con cinta-perineal y fijaciones laterales integradas (con cierre de hebilla)

Tallas: S / M / L

Modelos: modelo básico / b / e

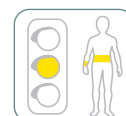



SEGUFIX®-Completo con cinta-perineal

Art. 2222 / Art. 2322 / Art. 2422

Uso previsto:


- sujeción de 5 puntos
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal (página 16)
- 1 SEGUFIX®-Sujeción-tórax (página 20)
- 2 SEGUFIX®-Fijadores-muñecas (página 21)
- 2 SEGUFIX®-Fijadores-tobillos (página 22)
- 1 SEGUFIX®-Cinta de conexión (página 22)
- 11 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L / XL
(a partir de XL sólo en versión "r")

Modelos: modelo básico / b / e / r

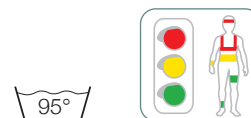

SEGUFIX®-Completo con cinta-perineal – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 2222

Completo con cinta-perineal y sistema de cierre magnético negro



Art. 2322

Completo con cinta-perineal y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 2422

Completo con cinta-perineal y sistema de cierre a presión



Tabla de tallas			
Talla	Circunferencia cintura	Circunferencia muñeca	Circunferencia tobillo
S	520 - 820 mm	120 - 190 mm	170 - 250 mm
M	800 -1200 mm	160 - 240 mm	220 - 300 mm
L	1160 -1560 mm	220 - 290 mm	270 - 330 mm
XL	1360 -1800 mm	260 - 340 mm	300 - 380 mm

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)

Modelos – número de artículo / identificación		
Nº art. modelo	Características del producto	Envergadura*
...	cinta de fijación: mediana	1200 - 1450 mm
... /b	cinta de fijación: corta	1000 - 1200 mm
... /e	cinta de fijación: larga	1450 - 1700 mm
... /r	reforzado, para mayor resistencia	

*Envergadura: distancia entre ambos puntos de fijación a la cama



SEGUFIX® – Ejemplos de aplicación con el SEGUFIX®-Cierre magnético negro




SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal (art. 2221) y SEGUFIX®-Sujeción-tórax (art. 2203)



SEGUFIX®-Completo con cinta-perineal (art. 2222), SEGUFIX®-Sujeción-muslos (art. 2211), SEGUFIX®-Sujeción-tórax adicional (art. 2212)



SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal (art. 2221) y SEGUFIX®-Piel de oveja para el Estándar (art. 8012)

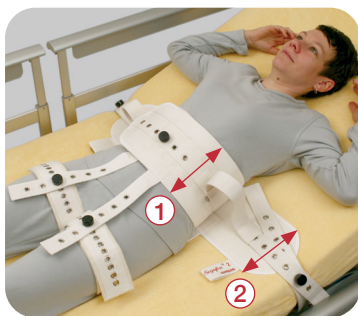

SEGUFIX®-Estándar con fijador-muslos

Art. 2231 / Art. 2331 / Art. 2431

Uso previsto:

- sujeción de pacientes, ayuda para posicionar a pacientes en la cama
- para la aplicación de medidas privativas de libertad


Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Estándar con fijador-muslos y fijaciones laterales integradas
- 5 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L / XL (a partir de XL sólo en versión "r")

Modelos: modelo básico / b / e / f / r

Pieza por separado: art. 2131 (sin cierre y sin llave)

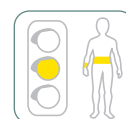

SEGUFIX®-Estándar con fijador-muslos – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 2231

Estándar con fijador-muslos y sistema de cierre magnético negro



Art. 2331

Estándar con fijador-muslos y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 2431

Estándar con fijador-muslos y sistema de cierre a presión




Modelos – número de artículo / identificación			
Nº art. modelo	Características del producto	Envergadura* (con ojales)	Envergadura* productos Velcro® (sin ojales)
...	cinta de fijación: mediana	1200 - 1450 mm	950 - 1540 mm
... /b	cinta de fijación: corta	1000 - 1200 mm	920 - 1330 mm
... /e	cinta de fijación: larga	1450 - 1700 mm	950 - 1800 mm
... /f	forrado, para piel sensible, 100 % puro algodón		–
... /r	reforzado, para mayor resistencia		–

*Envergadura: distancia entre ambos puntos de fijación a la cama

Tabla de tallas				
Talla	Circunferencia cintura mm	Circunferencia muslo mm	Cinturón abdominal mm ①	Cinta ancha de cama mm ②
S	520 - 820	380 - 520	140	180
M	800 - 1200	500 - 720	180	180
L	1160 - 1560	580 - 880	180	180
XL	1360 - 1800	850 - 1150	180	180

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)

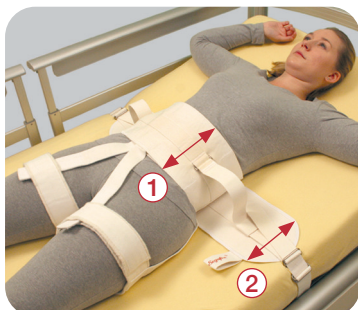

SEGUFIX®-Estándar Velcro® con fijador-muslos

Art. 2731

Uso previsto:


- ayuda para posicionar a pacientes en la cama, da estabilidad a pacientes
- no se considera una sujeción debido al Velcro®
Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Estándar Velcro® con fijador-muslos y fijaciones laterales integradas (con cierre de hebilla)

Tallas: S / M / L

Modelos: modelo básico / b / e

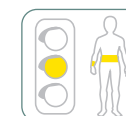



SEGUFIX®-Completo con fijador-muslos

Art. 2232 / Art. 2332 / Art. 2432

Uso previsto:

- sujeción de 5 puntos
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Estándar con fijador-muslos (página 18)
- 1 SEGUFIX®-Sujeción-tórax (página 20)
- 2 SEGUFIX®-Fijadores-muñecas (página 21)
- 2 SEGUFIX®-Fijadores-tobillos (página 22)
- 1 SEGUFIX®-Cinta de conexión (página 22)
- 13 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L / XL
(a partir de XL sólo en versión "r")

Modelos: modelo básico / b / e / r



SEGUFIX®-Completo con fijador-muslos – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 2232

Completo con fijador-muslos y sistema de cierre magnético negro



Art. 2332

Completo con fijador-muslos y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 2432

Completo con fijador-muslos y sistema de cierre a presión



Tabla de tallas				
Talla	Circunferencia cintura	Circunferencia muñeca	Circunferencia tobillo	Circunferencia muslo
S	520 - 820 mm	120 - 190 mm	170 - 250 mm	380 - 520 mm
M	800 - 1200 mm	160 - 240 mm	220 - 300 mm	500 - 720 mm
L	1160 - 1560 mm	220 - 290 mm	270 - 330 mm	580 - 880 mm
XL	1360 - 1800 mm	260 - 340 mm	300 - 380 mm	850 - 1150 mm


Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)

Modelos – número de artículo / identificación		
Nº art. modelo	Características del producto	Envergadura*
...	cinta de fijación: mediana	1200 - 1450 mm
... /b	cinta de fijación: corta	1000 - 1200 mm
... /e	cinta de fijación: larga	1450 - 1700 mm
... /r	reforzado, para mayor resistencia	


* Envergadura: distancia entre ambos puntos de fijación a la cama



SEGUFIX® – Ejemplos de aplicación con el SEGUFIX®-Cierre magnético negro

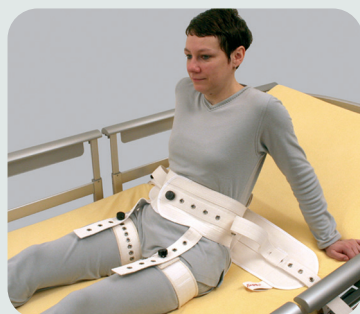

SEGUFIX®-Estándar con fijador-muslos (art. 2231)

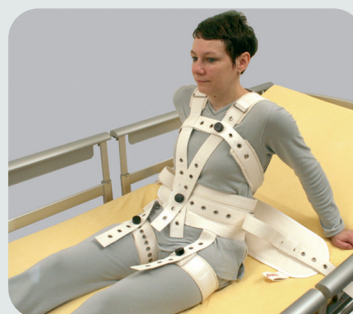

SEGUFIX®-Estándar con fijador-muslos (art. 2231) y SEGUFIX®-Sujeción-tórax (art. 2203)



SEGUFIX®-Sujeción-tórax

Art. 2203 / Art. 2303 / Art. 2403

Uso previsto:


- impide el deslizamiento del paciente hacia arriba
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal / fijador-muslos

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Sujeción-tórax
- 2 SEGUFIX®-Cierres (sin llave)

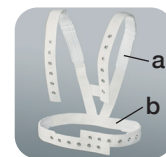

Talla	Cinta a	Cinta b
XS	600 mm	770 mm
S	860 mm	1190 mm
M	1010 mm	1450 mm
L	1170 mm	1650 mm
XL	1420 mm	1870 mm



tallas XS / S




tallas M / L / XL

Tallas: XS / S / M / L / XL (a partir de XL sólo en versión "r")

Modelos: modelo básico / r

Pieza por separado: art. 2103 (sin cierre y sin llave)

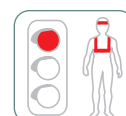

SEGUFIX®-Sujeción-tórax – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 2203

Sujeción-tórax y sistema de cierre magnético negro



Art. 2303

Sujeción-tórax y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 2403

Sujeción-tórax y sistema de cierre a presión



modelos: ver tabla página 21

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)



SEGUFIX®-Sujeción-tórax adicional

Art. 2212 / Art. 2312 / Art. 2412

Uso previsto:

- impide la elevación del torso en la cama (requiere de una supervisión continua)
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal / fijador-muslos
- SEGUFIX®-Sujeción-tórax


longitud total: apróx. 1140 mm (por cinta)

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Sujeción-tórax adicional (2 cintas)
- 2 SEGUFIX®-Cierres (sin llave)

Modelos: modelo básico / r

Pieza por separado: art. 2112 (2 cintas) (sin cierre y sin llave)

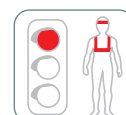

Indicado para SEGUFIX®-

- Sujeción-tórax (no compatible con la talla XS)
- Fijador-rápido-hombros
- Compacto

SEGUFIX®-Sujeción-tórax adicional – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 2212

Sujeción-tórax adicional y sistema de cierre magnético negro



Art. 2312

Sujeción-tórax adicional y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 2412

Sujeción-tórax adicional y sistema de cierre a presión





Circunferencia muñeca	
S	120 - 190 mm
M	160 - 240 mm
L	220 - 290 mm
XL	260 - 340 mm

SEGUFIX®-Sujeción-muñecas

Art. 2204 / Art. 2304 / Art. 2404

Uso previsto:

- sujeción flexible de una o de ambas manos en la cama
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal / fijador-muslos


Consta de:

- 2 SEGUFIX®-Fijadores-muñecas
- 2 SEGUFIX®-Cierres (sin llave)

Tallas: S / M / L / XL (a partir de XL sólo en versión "r")

Modelos: modelo básico / r

Pieza por separado: art. 2104 (para una mano)
(sin cierre y sin llave)

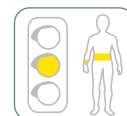

SEGUFIX®-Sujeción-muñecas – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 2204

Sujeción-muñecas
y sistema de cierre magnético negro



Art. 2304

Sujeción-muñecas y sistema
de cierre magnético giratorio verde



Art. 2404

Sujeción-muñecas
y sistema de cierre a presión



Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de
encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)

Modelos – número de artículo / identificación

Nº art. / modelo	Características del producto
...	modelo básico
... /r	reforzado, para mayor resistencia



Circunferencia muñeca	
S	120 - 190 mm
M	160 - 240 mm
L	220 - 290 mm
XL	260 - 340 mm

SEGUFIX®-Sujeción-muñecas alargada

Art. 2224 / Art. 2324 / Art. 2424

Uso previsto:

- sujeción flexible de una o de ambas manos en la cama
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

puede ser utilizado sin el SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal / fijador-muslos


Consta de:

- 2 SEGUFIX®-Fijadores-muñecas alargados
- 4 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L / XL (a partir de XL sólo en versión "r")

Modelos: modelo básico / r

Pieza por separado: art. 2124 (para una mano)
(sin cierre y sin llave)

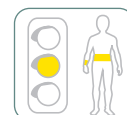

SEGUFIX®-Sujeción-muñecas alargada – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 2224

Sujeción-muñecas
alargada
y sistema de cierre magnético negro



Art. 2324

Sujeción-muñecas alargada
y sistema de cierre
magnético giratorio verde



Art. 2424

Sujeción-muñecas
alargada
y sistema de cierre a presión





Circunferencia tobillo

S	170 - 250 mm
M	220 - 300 mm
L	270 - 330 mm
XL	300 - 380 mm

SEGUFIX®-Sujeción-tobillos

Art. 2205 / Art. 2305 / Art. 2405

Uso previsto:

- sujeción aflojada o ajustada de uno o ambos pies en la cama
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Consta de:

- 2 SEGUFIX®-Fijadores-tobillos
- 1 SEGUFIX®-Cinta de conexión
- 4 SEGUFIX®-Cierres (sin llave)


Tallas: S / M / L / XL (a partir de XL sólo en versión "r")

Modelos: modelo básico / b / e / r

Piezas por separado: (sin cierre y sin llave)

art. 2105 (para un pie)

art. 2005 (Cinta de conexión)

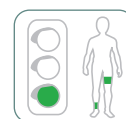

SEGUFIX®-Sujeción-tobillos – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 2205

Sujeción-tobillos
y sistema de cierre magnético negro



Art. 2305

Sujeción-tobillos y sistema de
cierre magnético giratorio verde



Art. 2405

Sujeción-tobillos
y sistema de cierre a presión



Nota:

La SEGUFIX®-Cinta-sobre-
piernas permite una
restricción adicional de
movimiento (ver página 27)

Modelos – número de artículo / identificación

Nº art. modelo	Características del producto	Envergadura*
...	cinta de fijación: mediana	1200 - 1450 mm
... /b	cinta de fijación: corta	1000 - 1200 mm
... /e	cinta de fijación: larga	1450 - 1700 mm
... /r	reforzado, para mayor resistencia	

*Envergadura: distancia entre
ambos puntos de fijación
a la cama

Tablas: medidas aproximadas –
posibilidad de encogimiento
del 8 % (cintas no prelavadas)



Circunferencia muslo

S	200 - 360 mm
M	340 - 580 mm
L	580 - 750 mm

SEGUFIX®-Sujeción-muslos

Art. 2211 / Art. 2311 / Art. 2411

Uso previsto:

- restricción adicional del movimiento de las piernas en la cama
- complemento para la sujeción de 5 puntos
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Consta de:


- 1 SEGUFIX®-Sujeción-muslos (para ambas piernas)
- 4 SEGUFIX®-Cierres (sin llave)

Tallas: S / M / L

Modelos: modelo básico / b / e / r

Pieza por separado: (sin cierre y sin llave)

art. 2111 (para ambas piernas)

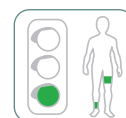

SEGUFIX®-Sujeción-muslos – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 2211

Sujeción-muslos
y sistema de cierre magnético negro



Art. 2311

Sujeción-muslos y sistema de
cierre magnético giratorio verde



Art. 2411

Sujeción-muslos
y sistema de cierre a presión



Productos con cierre Velcro®

Sistemas de cierre
Art. 1204 - 1417

Sistema de cama
Art. 2203 - 2905

Cintas adicionales
Art. 3110/r - 3745

Sistema de fijación rápida
Art. 4213/r - 4415/r

Sistema móvil
Art. 5204/r - 5745

Sistema de transporte
Art. 6040 - 6760

Cinturones de asiento
Art. 7240 - 7780

Accesorios
Art. 8010 - 8029



Circunferencia muñeca	
M	160 - 240 mm

SEGUFIX®-Sujeción-muñecas Velcro® alargada

Art. 2724

Uso previsto:

- posicionamiento de una o de ambas manos en la cama
- indicado para el uso en camillas
- no se considera una sujeción debido al Velcro®

Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.


puede ser utilizado sin el SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal / fijador-muslos

Consta de:

2 SEGUFIX®-Fijadores-muñecas Velcro® alargados (con cierre de hebilla)

Talla: M

Pieza por separado: art. 2824 (para una mano)

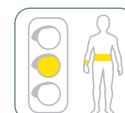

Circunferencia tobillo	
S	170 - 250 mm
M	220 - 300 mm

SEGUFIX®-Sujeción-tobillos Velcro®

Art. 2705

Uso previsto:

- posicionamiento aflojado o ajustado de uno o ambos pies en la cama
- no se considera una sujeción debido al Velcro®

Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Consta de:

2 SEGUFIX®-Fijadores-tobillos Velcro® (con cierre de hebilla)


1 SEGUFIX®-Cinta de conexión (con cierre de hebilla)

Tallas: S / M

Modelos: modelo básico / b / e

Piezas por separado: art. 2805 (para un pie)

art. 2905 (Cinta de conexión)

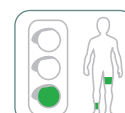

Modelos – número de artículo / identificación

Nº art. modelo	Características del producto	Envergadura* productos Velcro® (sin ojales)
...	cinta de fijación: mediana	950 - 1540 mm
... /b	cinta de fijación: corta	920 - 1330 mm
... /e	cinta de fijación: larga	950 - 1800 mm

* Envergadura: distancia entre ambos puntos de fijación a la cama

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)

Nota:

SEGUFIX®-Estándar Velcro® con cinta perineal o con fijador-muslos ver páginas 16 y 18



Circunferencia muslo	
S	200 - 360 mm
M	340 - 580 mm
L	580 - 750 mm

SEGUFIX®-Sujeción-muslos Velcro®

Art. 2711

Uso previsto:

- restricción adicional del movimiento de las piernas en la cama
- complemento para la sujeción de 5 puntos
- no se considera una sujeción debido al Velcro®


Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Consta de:

1 SEGUFIX®-Sujeción-muslos Velcro® (para ambas piernas) (con cierre de hebilla)

Tallas: S / M / L

Modelos: modelo básico / b / e

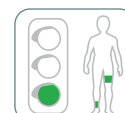



SEGUFIX®-Posicionamiento-cabeza

Art. 2217 / Art. 2317 / Art. 2417

Uso previsto:

- para posicionar la cabeza en la cama (requiere de una supervisión continua)
 - requisito indispensable: sujeción de 5 puntos (explicación: ver nota importante abajo)
 - no se considera una sujeción debido al Velcro®
- Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Consta de:


- 1 SEGUFIX®-Cinta ancha de cama con cinta frontal
- 1 SEGUFIX®-Cinta mentón
- 1 SEGUFIX®-Cinta de posicionamiento
- 2 SEGUFIX®-Cierres (sin llave)

Modelos: modelo básico / b / e

Pieza por separado: art. 2117

- 1 SEGUFIX®-Cinta ancha de cama con cinta frontal
 - 1 SEGUFIX®-Cinta mentón
 - 1 SEGUFIX®-Cinta de posicionamiento
- (sin cierre y sin llave)

95°

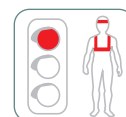

SEGUFIX®-Posicionamiento-cabeza – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 2217

Posicionamiento-cabeza y sistema de cierre magnético negro



Art. 2317

Posicionamiento-cabeza y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 2417

Posicionamiento-cabeza y sistema de cierre a presión



Nota importante:

- El SEGUFIX®-Posicionamiento-cabeza no es un producto para fijar a pacientes, sino una ayuda para posicionar la cabeza.
- El SEGUFIX®-Posicionamiento-cabeza sirve para sostener la cabeza en determinada posición.
- Para evitar lesiones en la columna vertebral, en el cuello y en la nuca, el SEGUFIX®-Posicionamiento-cabeza sólo debe ser aplicado con una sujeción de 5 puntos (p. ej. SEGUFIX®-Estándar con cinta-perineal o con fijador-muslos, sujeción-muñecas y sujeción-tobillos).
- Es necesaria la supervisión continua del paciente al implementar el SEGUFIX®-Posicionamiento-cabeza, debido a que los movimientos intencionados o no intencionados podrían ocasionar lesiones en el área de la nuca o de la columna vertebral.

Medidas

cinta frontal	circunferencia	480 - 800 mm
cinta mentón	circunferencia	700 - 800 mm
cinta de posicionamiento	longitud	1200 mm

Modelos – número de artículo / identificación

Nº art. modelo	Características del producto	Envergadura*
...	cinta de fijación: mediana	1200 - 1450 mm
... /b	cinta de fijación: corta	1000 - 1200 mm
... /e	cinta de fijación: larga	1450 - 1700 mm

*Envergadura: distancia entre ambos puntos de fijación a la cama

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)



SEGUFIX®-Compacto

Art. 2250/r / Art. 2350/r / Art. 2450/r

Uso previsto:

- para la sujeción de pacientes en la cama
- impide la huida del paciente por arriba o por debajo permitiendo máxima libertad de movimiento a las extremidades
- para la aplicación de medidas privativas de libertad


Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Compacto
- 7 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L

Modelos: r / rb / re

Pieza por separado: art. 2150/r (sin cierre y sin llave)

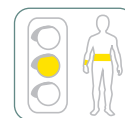

SEGUFIX®-Compacto – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 2250/r

Compacto
y sistema de cierre magnético negro



Art. 2350/r

Compacto y sistema de
cierre magnético giratorio verde



Art. 2450/r

Compacto
y sistema de cierre a presión



Tabla de tallas				
talla	torso diagonal mm	circunferencia pecho mm	circunferencia cintura mm	circunferencia muslo mm
S	1340 - 1540	480 - 880	520 - 820	380 - 520
M	1640 - 1740	750 - 1150	800 - 1200	500 - 720
L	1940 - 2040	1030 - 1430	1160 - 1560	580 - 880

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)

Modelos – número de artículo / identificación		
Nº art. modelo	Características del producto	Envergadura*
... /r	reforzado, cinta de fijación: mediana	1200 - 1450 mm
... /rb	reforzado, cinta de fijación: corta	1000 - 1200 mm
... /re	reforzado, cinta de fijación: larga	1450 - 1700 mm

*Envergadura: distancia entre ambos puntos de fijación a la cama

Modelo r: reforzado, para mayor resistencia


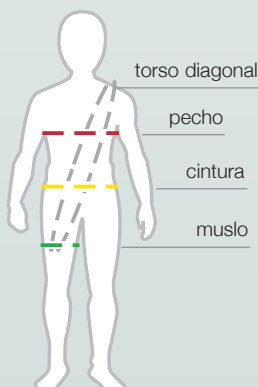


imagen con SEGUFIX®-Sistema de cierre magnético negro

Características del producto:

- plena libertad de movimiento para brazos y piernas
- previene puntos de presión en el área genital, gracias al fijador-muslos del modelo compacto
- acolchamiento confortable
- permite una apertura rápida en casos de emergencia – únicamente tiene 5 cierres
- totalmente compatible con otros productos del sistema SEGUFIX®

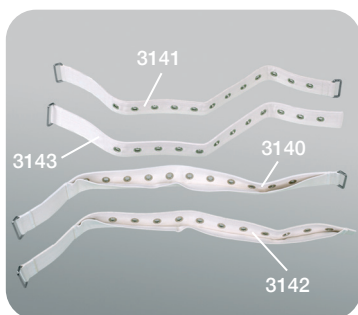

art. 3140 - 3143 (piezas por separado)

SEGUFIX®-Cintas de alargamiento

Art. 3240 - Art. 3444

Uso previsto:

- alarga las cintas de fijación para la instalación en camas anchas o respaldares anchos
- no indicado para modificar tallas (p. ej. cinturón abdominal)

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Cinta de alargamiento
- 1 SEGUFIX®-Cierre
- 1 SEGUFIX®-Llave



art. 3144
(pieza por separado)

Modelos: modelo básico / r

Piezas por separado: (sin cierre y sin llave)

art. 3140, 3141, 3142, 3143, 3144



SEGUFIX®-Cinta de alargamiento – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 3240 / 3241 / 3242
3243 / 3244



Cinta de alargamiento
y sistema de cierre magnético negro

Art. 3340 / 3341 / 3342
3343 / 3344



Cinta de alargamiento y sistema de
cierre magnético giratorio verde

Art. 3440 / 3441 / 3442
3443 / 3444



Cinta de alargamiento
y sistema de cierre a presión

Modelos – número de artículo / identificación

Nº art. modelo	Características del producto
...	modelo básico
... /r	reforzado, para mayor resistencia

Cinta de alargamiento	3240 3340 3440 3140	3241 3341 3441 3141	3242 3342 3442 3142	3243 3343 3443 3143	3244 3344 3444 3144
longitud total	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	1200 mm
hebillas metálicas	2	2	1	1	0
12 ojales	X	X	X	X	–
26 ojales	–	–	–	–	X
bolsillo del vástago	X	–	X	–	–

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 %
(cintas no prelavadas)



SEGUFIX®-Cinta de alargamiento con cierre clic

Art. 3745

Uso previsto:

- alarga las cintas de fijación de los SEGUFIX®-Cinturones de asiento con cierres clic
- únicamente para ser utilizado en productos con cierre clic
- permite la instalación en respaldares anchos

Adecuado para:


- SEGUFIX®-Asiento Velcro® (página 41)
- SEGUFIX®-Asiento (página 40)
- SEGUFIX®-Asiento con cinta-perineal (página 42)
- SEGUFIX®-Asiento con fijador-muslos (página 43)

longitud total: apróx. 800 mm

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Cinta de alargamiento con cierre clic



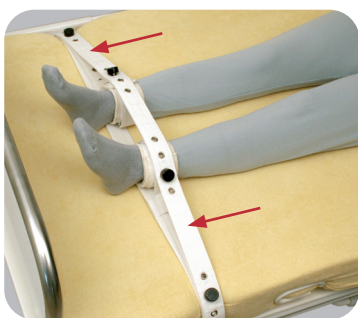

SEGUFIX®-Cinta-sobre-piernas

Art. 3110/r

Uso previsto:

- restricción adicional de movimiento
- para la aplicación de medidas privativas de libertad


Adecuado para:

- SEGUFIX®-Sujeción-tobillos (página 22)
- SEGUFIX®-Sujeción-muslos (página 22)
- SEGUFIX®-Fijador-rápido-tobillos (página 29)

longitud total: apróx. 1240 mm

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Cinta-sobre-piernas
(sin cierre y sin llave)

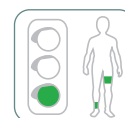

Modelos – número de artículo / identificación

Nº art. modelo	Características del producto
... /r	reforzado, para mayor resistencia

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 %
(cintas no prelavadas)



SEGUFIX®-Red de lavado

Art. 8022

Uso previsto:

- protege el material de los cinturones durante el lavado

medida: apróx. 600 mm x 400 mm

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Red de lavado
con freno de cuerda





SEGUFIX®-Fijador-rápido-hombros

Art. 4213/r / Art. 4313/r / Art. 4413/r

Uso previsto:

- sujeción rápida de pacientes en la cama en casos de urgencia
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- el SEGUFIX®-Fijador-rápido-hombros sólo debe ser utilizado en combinación con elementos adicionales de sujeción que fijen manos y pies


Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Fijador-rápido-hombros
- 5 SEGUFIX®-Cierres (sin llave)

Tallas: S / M / L / XL

Modelos: r / rb / re

Pieza por separado: art. 4113/r (sin cierre y sin llave)

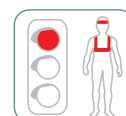

Circunferencia pecho

S	430 - 740 mm
M	720 - 1200 mm
L	1130 - 1540 mm
XL	1470 - 1890 mm

SEGUFIX®-Fijador-rápido-hombros – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 4213/r

Fijador-rápido-hombros y sistema de cierre magnético negro



Art. 4313/r

Fijador-rápido-hombros y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 4413/r

Fijador-rápido-hombros y sistema de cierre a presión



Modelos – número de artículo / identificación

Nº art. modelo	Características del producto	Envergadura*
... /r	reforzado, cinta de fijación: mediana	1200 - 1450 mm
... /rb	reforzado, cinta de fijación: corta	1000 - 1200 mm
... /re	reforzado, cinta de fijación: larga	1450 - 1700 mm

*Envergadura: distancia entre ambos puntos de fijación a la cama

Modelo r: reforzado, para mayor resistencia

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)



SEGUFIX®-Fijador-rápido-muñecas

Art. 4214/r / Art. 4314/r / Art. 4414/r

Uso previsto:

- sujeción de una o ambas manos en la cama en casos de urgencia
- para la aplicación de medidas privativas de libertad


Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Fijador-rápido-muñecas (para ambas manos)
- 4 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L

Modelos: r / rb / re

Pieza por separado: art. 4114/r (para ambas manos, sin cierre y sin llave)

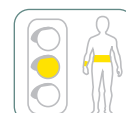

Circunferencia muñeca

S	120 - 190 mm
M	160 - 240 mm
L	220 - 290 mm

SEGUFIX®-Fijador-rápido-muñecas – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 4214/r

Fijador-rápido-muñecas y sistema de cierre magnético negro



Art. 4314/r

Fijador-rápido-muñecas y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 4414/r

Fijador-rápido-muñecas y sistema de cierre a presión





Circunferencia tobillo	
S	170 - 250 mm
M	220 - 300 mm
L	270 - 330 mm

SEGUFIX®-Fijador-rápido-tobillos

Art. 4215/r / Art. 4315/r / Art. 4415/r

Uso previsto:

- sujeción de uno o ambos pies en la cama en casos de urgencia
- para la aplicación de medidas privativas de libertad


Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Fijador-rápido-tobillos (para ambos pies)
- 4 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L

Modelos: r / rb / re

Pieza por separado: art. 4115/r (para ambos pies)
(sin cierre y sin llave)

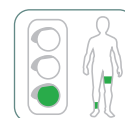

SEGUFIX®-Fijador-rápido-tobillos – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 4215/r

Fijador-rápido-tobillos
y sistema de cierre magnético negro



Art. 4315/r

Fijador-rápido-tobillos y sistema
de cierre magnético giratorio verde



Art. 4415/r

Fijador-rápido-tobillos
y sistema de cierre a presión



Modelos – número de artículo / identificación

Nº art. modelo	Características del producto	Envergadura*
... /r	reforzado, cinta de fijación: mediana	1200 - 1450 mm
... /rb	reforzado, cinta de fijación: corta	1000 - 1200 mm
... /re	reforzado, cinta de fijación: larga	1450 - 1700 mm

*Envergadura: distancia entre ambos puntos de fijación a la cama

Modelo r: reforzado,
para mayor resistencia

Tablas: medidas aproximadas –
posibilidad de encogimiento del 8 %
(cintas no prelavadas)




El SEGUFIX®-Sistema de fijación rápida puede ser complementado con los siguientes productos:



SEGUFIX®-
Sujeción-tórax adicional
(art. 2212)
página 20



SEGUFIX®-
Sujeción-muslos
(art. 2211)
página 22

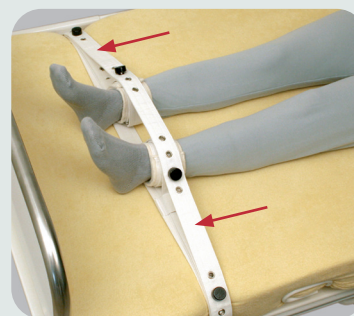

SEGUFIX®-
Cinta-sobre-piernas
(art. 3110/r)
página 27

imágenes con SEGUFIX®-Sistema de cierre magnético negro



Ancho de la camilla:
aprox. 400 mm a 800 mm

Circunferencia pecho	
S	430 - 740 mm
M	740 - 1140 mm
L	920 - 1320 mm

SEGUFIX®-Fijador-hombros-camilla

Art. 5243 / Art. 5343 / Art. 5443

Uso previsto:

- sujeción de pacientes en camillas
- indicado para el servicio de rescate y ambulancias
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:


- SEGUFIX®-Sujeción-muñecas alargada
- SEGUFIX®-Fijador-tobillos-camilla

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Fijador-hombros-camilla
- 3 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L

Pieza por separado: art. 5143 (sin cierre y sin llave)

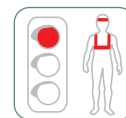

SEGUFIX®-Fijador-hombros-camilla – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 5243

Fijador-hombros-camilla
y sistema de cierre magnético negro



Art. 5343

Fijador-hombros-camilla y sistema
de cierre magnético giratorio verde



Art. 5443

Fijador-hombros-camilla
y sistema de cierre a presión



SEGUFIX® – Ejemplo de aplicación:



SEGUFIX®-
Fijador-hombros-camilla
(art. 5243),
Sujeción-muñecas Velcro®
alargada (art. 2724),
Posicionamiento-tobillos-
camilla Velcro® (art. 5745)

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelasvadas)

Modelos – número de artículo / identificación

Nº art. modelo	Características del producto
...	modelo básico
... /r	reforzado, para mayor resistencia



Ancho de la camilla: aprox. 400 a 800 mm

Circunferencia tobillo	
S	170 - 250 mm
M	220 - 300 mm
L	270 - 330 mm

SEGUFIX®-Fijador-tobillos-camilla

Art. 5245 / Art. 5345 / Art. 5445

Uso previsto:


- sujeción de uno o ambos pies en camillas
- indicado para el servicio de rescate y ambulancias
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Fijador-tobillos-camilla (para ambos pies)
- 2 SEGUFIX®-Cierres (sin llave)

Talla: M

Pieza por separado: art. 5145
(para ambos pies, sin cierre y sin llave)

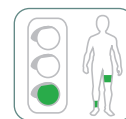

SEGUFIX®-Fijador-tobillos-camilla – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 5245

Fijador-tobillos-camilla
y sistema de cierre magnético negro



Art. 5345

Fijador-tobillos-camilla y sistema
de cierre magnético giratorio verde



Art. 5445

Fijador-tobillos-camilla
y sistema de cierre a presión





Circunferencia tobillo	
M	220 - 300 mm

Ancho de la camilla:
aprox. 400 mm a 800 mm

SEGUFIX®-Posicionamiento-tobillos-camilla Velcro®

Art. 5745

Uso previsto:


- posicionamiento de uno o ambos pies en camillas
- indicado para el servicio de rescate y ambulancias
- no se considera una sujeción debido al Velcro®

Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Consta de:

1 SEGUFIX®-Posicionamiento-tobillos-camilla Velcro®
(para ambos pies, con cierre de hebilla)

Talla: M

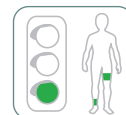

Circunferencia muñeca	
S	120 - 190 mm
M	160 - 240 mm
L	220 - 290 mm
XL	260 - 340 mm

SEGUFIX®-Sujeción-muñecas alargada

Art. 2224 / Art. 2324 / Art. 2424

Uso previsto:

- sujeción flexible de una o ambas manos en camillas
- para la aplicación de medidas privativas de libertad


Consta de:

2 SEGUFIX®-Fijadores-muñecas alargados
4 SEGUFIX®-Cierres
1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L / XL (a partir de XL sólo en versión "r")

Modelos: modelo básico / r

Pieza por separado: art. 2124 (para una mano)
(sin cierre y sin llave)

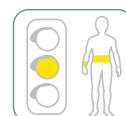

SEGUFIX®-Sujeción-muñecas alargada – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 2224

Sujeción-muñecas
alargada
y sistema de cierre magnético negro



Art. 2324

Sujeción-muñecas alargada
y sistema de cierre
magnético giratorio verde



Art. 2424

Sujeción-muñecas
alargada
y sistema de cierre a presión



Circunferencia muñeca	
M	160 - 240 mm

SEGUFIX®-Sujeción-muñecas Velcro® alargada

Art. 2724

Uso previsto:

- posicionamiento de una o ambas manos en camillas
- indicado para el servicio de rescate y ambulancias
- no se considera una sujeción debido al Velcro®


Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Consta de:

2 SEGUFIX®-Fijadores-muñecas Velcro® alargados
(con cierre de hebilla)

Talla: M

Pieza por separado: art. 2824 (para una mano)

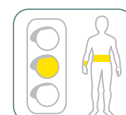



fijación ajustada delante del abdomen



fijación ajustada detrás de la espalda

SEGUFIX®-Cinturón-fijación-muñecas

Art. 5204/r / Art. 5304/r / Art. 5404/r

Uso previsto:

- para la fijación de manos durante el transporte (requiere de una supervisión continua)
- previene lesiones autoinflingidas o a terceros por parte del paciente p. ej. a acompañantes durante el transporte
- para la aplicación de medidas privativas de libertad


Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Cinturón
- 2 SEGUFIX®-Fijadores-muñecas
- 3 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L / XL

Piezas por separado: (sin cierre y sin llave)

art. 5101/r (Cinturón)
art. 5104/r (1 Fijador-muñeca)

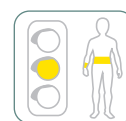

SEGUFIX®-Cinturón-fijación-muñecas – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 5204/r

Cinturón-fijación-muñecas y sistema de cierre magnético negro



Art. 5304/r

Cinturón-fijación-muñecas y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 5404/r

Cinturón-fijación-muñecas y sistema de cierre a presión



fijación aflojada delante del abdomen



fijación aflojada detrás de la espalda

imágenes con SEGUFIX®-Sistema de cierre magnético negro

Tabla de tallas

Talla	Circunferencia cintura	Circunferencia muñeca
S	520 - 820 mm	120 - 190 mm
M	800 - 1200 mm	160 - 240 mm
L	1160 - 1560 mm	220 - 290 mm
XL	1360 - 1800 mm	260 - 360 mm

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encojimiento del 8 % (cintas no prelavadas)

Modelo – número de artículo / identificación

Nº art. modelo	Características del producto
... /r	reforzado, para mayor resistencia



SEGUFIX®-Cinturón-fijación-muñecas (art. 5204/r)



SEGUFIX®-Cinturón-fijación-muñecas (art. 5204/r), Cinta-respalda (art. 6730) y Cinturón abdominal de transporte (art. 6216)

SEGUFIX® - Ejemplo de aplicación:

Previne lesiones autoinflingidas - o a terceros - por parte del paciente, por ejemplo a acompañantes durante el transporte.

Atención:

El SEGUFIX®-Sistema de transporte no sustituye el uso obligatorio de los cinturones de seguridad en automóviles establecido por ley. Los cinturones de transporte sólo deben ser utilizados de apoyo adicional para los pacientes.



SEGUFIX®-Ayuda de fijación

Art. 5218 / Art. 5318 / Art. 5418

Uso previsto:


- provee asistencia durante la sujeción de pacientes en camillas
- una vez finalizada la sujeción, la SEGUFIX®-Ayuda de fijación puede ser retirada
- estabilización adicional del paciente
- puede ser instalada encima de las rodillas
- indicado para el servicio de emergencia y ambulancias
- instalación a la camilla mediante un sistema de cierre
- para la aplicación de medidas privativas de libertad



Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Ayuda de fijación
- 2 SEGUFIX®-Cierres (sin llave)

Pieza por separado: art. 5118
(sin cierre y sin llave)

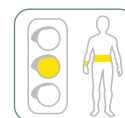

SEGUFIX®-Ayuda de fijación – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 5218

Ayuda de fijación
y sistema de cierre magnético negro



Art. 5318

Ayuda de fijación y sistema
de cierre magnético giratorio verde



Art. 5418

Ayuda de fijación
y sistema de cierre a presión



Tabla de tallas		
Longitud de las cintas	5218 / 5318 / 5418 / 5118	5718
longitud total	2050 mm	2450 mm
longitud del cinturón ancho	590 mm	590 mm
cinta de fijación (en cada lado)	730 mm	930 mm
envergadura* de las cintas (incluyendo al paciente)	920 - 1370 mm	700 - 1430 mm

*Envergadura: distancia entre ambos puntos de fijación incluyendo al paciente

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)



SEGUFIX®-Ayuda de fijación (con cierre de hebilla)

Art. 5718


Uso previsto:

- provee asistencia durante la sujeción de pacientes en camillas
- una vez finalizada la sujeción, la SEGUFIX®-Ayuda de fijación puede ser retirada
- estabilización adicional del paciente
- puede ser instalada encima de las rodillas
- indicado para el servicio de emergencia y ambulancias
- instalación a la camilla mediante un cierre de hebilla
- no se considera una sujeción debido al cierre de hebilla

Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Ayuda de fijación
(con cierre de hebilla)

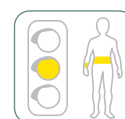



Circunferencia cintura*	
S	380 - 780 mm
M	700 - 1090 mm
L	1070 - 1480 mm

*medidas especiales por encargo

SEGUFIX®-Cinturón abdominal de transporte

Art. 6216 / Art. 6316 / Art. 6416

Uso previsto:

- para sostener y posicionar a pacientes en sillas de ruedas con respaldares estables, automóviles y otros asientos adecuados
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- SEGUFIX®-Cinta-respalda (art. 6730, página 35)
- SEGUFIX®-Arnés (art. 6720, página 35) complemento opcional

ancho del cinturón: aprox. 130 mm

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Cinturón abdominal de transporte, acolchado
- 1 SEGUFIX®-Cierre
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L

Pieza por separado:

art. 6116
(sin cierre y sin llave)



SEGUFIX®-Cinturón abdominal de transporte – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 6216

Cinturón abdominal de transport y sistema de cierre magnético negro



Art. 6316

Cinturón abdominal de transport y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 6416

Cinturón abdominal de transport y sistema de cierre a presión



Tablas: medidas aproximadas



Circunferencia cintura*	
S	440 - 650 mm
M	650 - 920 mm
L	900 - 1300 mm

*medidas especiales por encargo

SEGUFIX®-Cinturón abdominal de transporte Velcro®

Art. 6710

Uso previsto:

- para sostener y posicionar a pacientes en sillas de ruedas con respaldares estables, automóviles y otros asientos adecuados
 - no se considera una sujeción debido al Velcro®
- Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Requisito indispensable:

- SEGUFIX®-Cinta-respalda (art. 6730, página 35)
- SEGUFIX®-Arnés (art. 6720, página 35) complemento opcional
- el Velcro® tiene que estar sobrepuesto un mínimo de 250 mm

ancho del cinturón: aprox. 130 mm

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Cinturón abdominal de transporte Velcro®, acolchado

Tallas: S / M / L



Atención:

El SEGUFIX®-Sistema de transporte no sustituye el uso obligatorio de los cinturones de seguridad en automóviles establecido por ley. Los cinturones de transporte sólo deben ser utilizados de apoyo adicional para los pacientes.



SEGUFIX®-Cinturón abdominal de transporte (art. 6216) con sistema de cierre magnético negro y Cinta-respalda (art. 6730)



SEGUFIX®-Cinturón abdominal de transporte Velcro® (art. 6710) y Cinta-respalda (art. 6730)



Circunferencia torso	
S	890 - 1280 mm
M	1050 - 1950 mm

Pacientes que miden más de 1400 mm requieren la talla M

SEGUFIX®-Arnés

Art. 6720

Uso previsto:

- para sostener y posicionar a pacientes en sillas de ruedas con respaldares estables, automóviles y otros asientos adecuados
 - mantiene una posición erguida del paciente y evita que el paciente se deslice del asiento
 - no se considera una sujeción por tener un cierre clic.
- Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Requisito indispensable:

- SEGUFIX®-Cinta-respaldar (ver abajo)
- SEGUFIX®-Cinturón abdominal de transporte (página 34)

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Arnés (con cierre clic)

Tallas: S / M



Tablas: medidas aproximadas



Circunferencia respaldar	
S	780 - 1030 mm
M	980 - 1230 mm
L	1180 - 1430 mm
XL	1420 - 1680 mm

SEGUFIX®-Cinta-respaldar

Art. 6730

Uso previsto:

- este producto es necesario para la instalación del SEGUFIX®-Cinturón abdominal de transporte y para el SEGUFIX®-Arnés

Requisito indispensable:

- el respaldar debe ser estable, no aplicar en sillas de ruedas plegables que tengan un respaldar inestable
- abertura entre el asiento y el respaldar
- instalación al respaldar mediante un cierre de Velcro®
- el Velcro® tiene que estar sobrepuesto un mínimo de 250 mm

ancho del cinturón: apróx. 180 mm

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Cinta-respaldar (con cierre Velcro®)

Tallas: S / M / L / XL



SEGUFIX® - Ejemplo de aplicación:



SEGUFIX®-
Arnés
(art. 6720),
Cinturón abdominal
de transporte (art. 6216),
Cinta-respaldar
(art. 6730)

Imagen con SEGUFIX®-Sistema de cierre magnético negro

Precio: ver lista de precios página 17



SEGUFIX®-Sujeción-torso

Art. 6240 / Art. 6340 / Art. 6440

Uso previsto:

- sostiene al paciente sentado en asientos adecuados
- sostiene el torso del paciente e impide que el paciente se deslice del asiento
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- abertura entre el asiento y el respaldo
- instalación detrás del respaldo mediante un sistema de cierre

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Sujeción-torso (sin protector-perineal, art. 6040)
- 1 SEGUFIX®-Cierre
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L

Pieza por separado:

art. 6140
(sin cierre y sin llave)



SEGUFIX®-Sujeción-torso – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 6240

Sujeción-torso y sistema de cierre magnético negro



Art. 6340

Sujeción-torso y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 6440

Sujeción-torso y sistema de cierre a presión



Tabla de tallas			
Talla	Circunferencia cinturón abdominal a	Pieza de conexión b	Collar c
S	900 - 1300 mm	100 mm	800 mm
M	900 - 1300 mm	150 mm	800 mm
L	1220 - 1620 mm	150 mm	950 mm

Tabla: medidas aproximadas

- a** circunferencia del paciente – incluyendo el respaldo – a la altura de la cintura
 - b** pieza de conexión entre el cinturón abdominal y el collar
 - c** circunferencia interna del collar
- Tomar todas las medidas con el paciente sentado.



SEGUFIX®-Sujeción-torso con protector-perineal

Art. 6244 / Art. 6344 / Art. 6444

Uso previsto:

- sostiene al paciente sentado
- sostiene el torso del paciente e impide que el paciente se deslice del asiento
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- abertura entre el asiento y el respaldo
- instalación detrás del respaldo mediante un sistema de cierre

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Sujeción-torso
- 1 SEGUFIX®-Protector-perineal
- 1 SEGUFIX®-Cierre
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L

Piezas por separado:

(sin cierre y sin llave)
art. 6140 (Sujeción-torso),
art. 6040 (Protector-perineal)



art. 6040



SEGUFIX®-Sujeción-torso con protector-perineal – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 6244

Sujeción-torso con protector-perineal y sistema de cierre magnético negro



Art. 6344

Sujeción-torso con protector-perineal y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 6444

Sujeción-torso con protector-perineal y sistema de cierre a presión





SEGUFIX®-Cinturón-multiuso

Art. 6256 / Art. 6356 / Art. 6456

Uso previsto:

- cinturón de soporte con cierre de Velcro® y ojales para un SEGUFIX®-Cierre
- ayuda a sostener a pacientes en sillas, sillones y otros asientos adecuados
- indicado para camillas de emergencia o para sostener a pacientes en sillas de ducha (utilizar en la ducha sin cierre)
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Cinturón-multiuso
- 1 SEGUFIX®-Cierre
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: XS / S / M / L

Pieza por separado: art. 6156 (sin cierre y sin llave)



SEGUFIX®-Cinturón-multiuso – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 6256

Cinturón-multiuso y sistema de cierre magnético negro



Art. 6356

Cinturón-multiuso y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 6456

Cinturón-multiuso y sistema de cierre a presión



Tabla de tallas				
Talla	Longitud total	Ancho del cinturón	Circunferencia* con cierre SEGUFIX®	Circunferencia* con cierre Velcro®
XS	1600 mm	140 mm	1100 - 1500 mm	1000 - 1350 mm
S	1800 mm	140 mm	1300 - 1700 mm	1200 - 1550 mm
M	2000 mm	140 mm	1500 - 1900 mm	1350 - 1750 mm
L	2400 mm	140 mm	1900 - 2300 mm	1750 - 2150 mm

Tablas: medidas aproximadas

*Circunferencia total: paciente y respaldo / paciente y camilla



SEGUFIX®-Funda protectora
art. 8013
(ver página 38)



SEGUFIX®-Cinturón-multiuso Velcro®

Art. 6750

Uso previsto:

- cinturón de soporte con cierre de Velcro®
 - ayuda a sostener a pacientes en sillas, sillones y otros asientos adecuados
 - indicado para camillas de emergencia o para sostener a pacientes en sillas de ducha
 - no se considera una sujeción debido al Velcro®
- Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Requisito indispensable:

- el Velcro® tiene que estar sobrepuesto un mínimo de 250 mm

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Cinturón-multiuso Velcro®

Tallas: XS / S / M / L





SEGUFIX®-Cinturón-pelvis

Art. 6266 / Art. 6366 / Art. 6466

Uso previsto:

- cinturón de soporte con ojales para asientos adecuados (p. ej. sillas)
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

ancho del cinturón: aprox. 130 mm

envergadura*: aprox. 1170 - 1360 mm

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Cinturón-pelvis
- 2 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Pieza por separado: art. 6166

(sin cierre y sin llave)



SEGUFIX®-Cinturón-pelvis – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 6266

Cinturón-pelvis
y sistema de cierre magnético negro



Art. 6366

Cinturón-pelvis y sistema de
cierre magnético giratorio verde



Art. 6466

Cinturón-pelvis
y sistema de cierre a presión



*Envergadura: distancia entre ambos puntos de fijación al asiento incluyendo al paciente.



SEGUFIX®-Funda protectora

Art. 8013

Uso previsto:

- la SEGUFIX®-Funda protectora previene el ensuciamiento de los siguientes SEGUFIX®-Cinturones de transporte:

- SEGUFIX®-Cinturón-multiuso, página 37
(sólo puede ser utilizado sin cierre)
- SEGUFIX®-Cinturón-pelvis, página 38 - 39
(puede ser utilizado con cierre)

Características:

- lavable hasta 95 °C, esterilizable al vapor
- resistente a bacterias

Material:

- interior: 100% poliéster
- revestimiento: 100% poliuretano

ancho: aprox. 140 mm

longitud: aprox. 790 mm

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Funda protectora





SEGUFIX®-Cinturón-pelvis con cierre clic

Art. 6760

Uso previsto:

- cinturón de soporte con cierre clic para asientos adecuados (p. ej. sillas)
 - no se considera una sujeción debido al cierre clic
- Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

el cierre clic resiste máximo 70 kg

ancho del cinturón: apróx. 130 mm
envergadura*: apróx. 740 - 1500 mm

Consta de:

1 SEGUFIX®-Cinturón-pelvis con cierre clic



*Envergadura: distancia entre ambos puntos de fijación al asiento incluyendo al paciente.



SEGUFIX® – ejemplo de aplicación:



SEGUFIX®-Cinturón pelvis (art. 6760) y Antideslizante (art. 8017)

más información ver página 47

Antideslizante

- previene un deslizamiento del asiento
- altamente recomendado en asientos y camas
- se desliza únicamente en dirección flecha. El paciente ya no desliza más del asiento!
- lavable hasta máximo 80 °C



SEGUFIX®-Cinturón-pelvis con cinta-perineal

Art. 6276 / Art. 6376 / Art. 6476

Uso previsto:

- cinturón de soporte con ojales para asientos adecuados (p. ej. sillas)
- impide que el paciente se deslice del asiento
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- abertura entre el asiento y el respaldo
- instalación detrás del respaldo mediante un sistema de cierre

ancho del cinturón: apróx. 130 mm
circunferencia total: apróx. 1400 - 1800 mm (paciente y asiento)

Consta de:

1 SEGUFIX®-Cinturón-pelvis con cinta-perineal
1 SEGUFIX®-Cierre
1 SEGUFIX®-Llave

Pieza por separado: art. 6176 (sin cierre y sin llave)



SEGUFIX®-Cinturón-pelvis con cinta-perineal – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 6276

Cinturón-pelvis con cinta-perineal y sistema de cierre magnético negro



Art. 6376

Cinturón-pelvis con cinta-perineal y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 6476

Cinturón-pelvis con cinta-perineal y sistema de cierre a presión





SEGUFIX®-Asiento

Art. 7240 / Art. 7340 / Art. 7440 (con un cierre clic detrás del respaldo)

Uso previsto:

- para sostener y posicionar a pacientes en sillas de ruedas y en otros asientos adecuados
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- instalación detrás del respaldo mediante un cierre clic (resistencia máxima 70 kg)

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Asiento (con un cierre clic detrás del respaldo)
- 1 SEGUFIX®-Cierre
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L

Modelos: modelo básico / f

Pieza por separado:

art. 7140
(sin cierre y sin llave)



SEGUFIX®-Asiento – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 7240

Asiento y sistema de cierre magnético negro



Art. 7340

Asiento y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 7440

Asiento y sistema de cierre a presión



Modelos – número de artículo / identificación

Nº art. / modelo	Características del producto
...	modelo básico
... / f	forrado, para piel sensible, 100 % puro algodón

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)

Tabla de tallas

Talla	Ancho del cinturón	Circunferencia cintura del paciente	Circunferencia respaldo con	
			cierre clic	sistema de cierre
S	140 mm	520 - 820 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm
M	140 mm	800 - 1200 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm
L	140 mm	1160 - 1560 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm



SEGUFIX®-Asiento

Art. 7246 / Art. 7346 / Art. 7446 (sistema de cierre detrás del respaldo)

Uso previsto:

- para sostener y posicionar a pacientes en sillas de ruedas y en otros asientos adecuados
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- instalación detrás del respaldo mediante un sistema de cierre

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Asiento (sistema de cierre detrás del respaldo)
- 2 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L

Modelos: modelo básico / f

Pieza por separado:

art. 7146
(sin cierre y sin llave)



SEGUFIX®-Asiento – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 7246

Asiento y sistema de cierre magnético negro



Art. 7346

Asiento y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 7446

Asiento y sistema de cierre a presión





SEGUFIX®-Asiento Velcro®

Art. 7740 (con un cierre clic detrás del respaldo)

Uso previsto:

- para sostener y posicionar a pacientes en sillas de ruedas y en otros asientos adecuados
 - no se considera una sujeción debido al Velcro®
- Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Requisito indispensable:

- instalación detrás del respaldo mediante un cierre clic (resistencia máxima 70 kg)
- el Velcro® tiene que estar sobrepuesto un mínimo de 250 mm

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Asiento Velcro®
(con un cierre clic detrás del respaldo)

Tallas: S / M / L



Tabla de tallas ver página 40



Los SEGUFIX®-Cinturones de asiento pueden ser alargados con las SEGUFIX®-Cintas de alargamiento detrás del respaldo.



SEGUFIX®-Cinta de alargamiento con ojales (art. 3144, página 26) para productos con sistemas de cierre



SEGUFIX®-Cinta de alargamiento con cierre clic (art. 3745, página 26) para productos con cierre clic



El SEGUFIX®-Sistema de cinturones de asiento puede ser complementado con los siguientes productos:



SEGUFIX®-Fijador-muñeca-transporte Velcro® (art. 7770)



SEGUFIX®-Sujeción-tobillos-transporte Velcro® (art. 7780)



SEGUFIX®-Sujeción-tobillos-transporte (art. 7280)
(imagen con SEGUFIX®-Sistema de cierre magnético negro)

Información adicional de los productos, ver página 44

Precio: ver lista de precios página 19



SEGUFIX®-Asiento con cinta-perineal

Art. 7250 / Art. 7350 / Art. 7450 (con un cierre clic detrás del respaldo)

Uso previsto:

- para sostener y posicionar a pacientes en sillas de ruedas y en otros asientos adecuados
- impide el deslizamiento del paciente del asiento
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- instalación detrás del respaldo mediante un cierre clic (resistencia máxima 70 kg)

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Asiento con cinta-perineal (con un cierre clic detrás del respaldo)
- 1 SEGUFIX®-Cierre
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L

Modelos: modelo básico / f

Pieza por separado:

art. 7150
(sin cierre y sin llave)



SEGUFIX®-Asiento con cinta-perineal – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 7250

Asiento con cinta-perineal y sistema de cierre magnético negro



Art. 7350

Asiento con cinta-perineal y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 7450

Asiento con cinta-perineal y sistema de cierre a presión



Modelos – número de artículo / identificación

Nº art. / modelo	Características del producto
...	modelo básico
... / f	forrado, para piel sensible, 100 % puro algodón

Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)

Tabla de tallas

Talla	Ancho del cinturón	Circunferencia cintura del paciente	Circunferencia respaldo con	
			cierre clic	sistema de cierre
S	140 mm	520 - 820 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm
M	140 mm	800 - 1200 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm
L	140 mm	1160 - 1560 mm	700 - 1500 mm	700 - 1150 mm



SEGUFIX®-Asiento con cinta-perineal

Art. 7256 / Art. 7356 / Art. 7456 (sistema de cierre detrás del respaldo)

Uso previsto:

- para sostener y posicionar a pacientes en sillas de ruedas y en otros asientos adecuados
- impide el deslizamiento del paciente del asiento
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- instalación detrás del respaldo mediante un sistema de cierre

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Asiento con cinta-perineal (sistema de cierre detrás del respaldo)
- 2 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L

Modelos: modelo básico / f

Pieza por separado:

art. 7156
(sin cierre y sin llave)



SEGUFIX®-Asiento con cinta-perineal – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 7256

Asiento con cinta-perineal y sistema de cierre magnético negro



Art. 7356

Asiento con cinta-perineal y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 7456

Asiento con cinta-perineal y sistema de cierre a presión





SEGUFIX®-Asiento con fijador-muslos

Art. 7260 / Art. 7360 / Art. 7460 (con un cierre clic detrás del respaldo)

Uso previsto:

- para sostener y posicionar a pacientes en sillas de ruedas y en otros asientos adecuados
- impide el deslizamiento del paciente del asiento
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- instalación detrás del respaldo mediante un cierre clic (resistencia máxima 70 kg)

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Asiento con fijador-muslos (con un cierre clic detrás del respaldo)
- 3 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L

Modelos: modelo básico / f

Pieza por separado:

art. 7160
(sin cierre y sin llave)



SEGUFIX®-Asiento con fijador-muslos – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 7260

Asiento con fijador-muslos y sistema de cierre magnético negro



Art. 7360

Asiento con fijador-muslos y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 7460

Asiento con fijador-muslos y sistema de cierre a presión



modelos y tabla de tallas:
ver tabla página 42



Talla	Circunferencia muslo
S	380 - 520 mm
M	500 - 720 mm
L	580 - 880 mm

Tablas: medidas aproximadas
– posibilidad de encogimiento
del 8 % (cintas no prelavadas)



SEGUFIX®-Asiento con fijador-muslos

Art. 7266 / Art. 7366 / Art. 7466 (sistema de cierre detrás del respaldo)

Uso previsto:

- para sostener y posicionar a pacientes en sillas de ruedas y en otros asientos adecuados
- impide el deslizamiento del paciente del asiento
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- instalación detrás del respaldo mediante un sistema de cierre

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Asiento con fijador-muslos (sistema de cierre detrás del respaldo)
- 4 SEGUFIX®-Cierres
- 1 SEGUFIX®-Llave

Tallas: S / M / L

Modelos: modelo básico / f

Pieza por separado:

art. 7166
(sin cierre y sin llave)



SEGUFIX®-Asiento con fijador-muslos – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 7266

Asiento con fijador-muslos y sistema de cierre magnético negro



Art. 7366

Asiento con fijador-muslos y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 7466

Asiento con fijador-muslos y sistema de cierre a presión





Circunferencia muñeca
160 - 240 mm

SEGUFIX®-Fijador-muñeca-transporte Velcro®

Art. 7770

Uso previsto:

- para posicionar las manos en los apoyabrazos de sillas de ruedas u otros asientos adecuados
 - no se considera una sujeción debido al Velcro®
- Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Fijador-muñeca-transporte Velcro®
(para una mano)



Circunferencia tobillo
220 - 300 mm

SEGUFIX®-Sujeción-tobillos-transporte Velcro®

Art. 7780

Uso previsto:

- para posicionar los pies en sillas de ruedas u otros asientos adecuados
 - no se considera una sujeción debido al Velcro®
- Atención: Este modelo puede ser considerado como una privativa de libertad, desde el punto de vista jurídico, si el paciente no puede liberarse por sí mismo.

Requisito indispensable:

- instalación a la silla de ruedas mediante un cierre de hebilla (circunferencia: apróx. 800 mm - 1000 mm)

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Sujeción-tobillos-transporte Velcro®
(para ambos pies)



Tablas: medidas aproximadas – posibilidad de encogimiento del 8 % (cintas no prelavadas)



Circunferencia tobillo
220 - 300 mm

SEGUFIX®-Sujeción-tobillos-transporte

Art. 7280 / Art. 7380 / Art. 7480

Uso previsto:

- para posicionar los pies en sillas de ruedas u otros asientos adecuados
- para la aplicación de medidas privativas de libertad

Requisito indispensable:

- instalación a la silla de ruedas mediante un sistema de cierre (circunferencia: apróx. 680 mm - 1120 mm)

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Sujeción-tobillos-transporte (para ambos pies)
3 SEGUFIX®-Cierres
1 SEGUFIX®-Llave

Pieza por separado: art. 7180 (para ambos pies, sin cierre y sin llave)



SEGUFIX®-Sujeción-tobillos-transporte – 3 sistemas de cierre para elegir:

Art. 7280

Sujeción-tobillos-transporte y sistema de cierre magnético negro



Art. 7380

Sujeción-tobillos-transporte y sistema de cierre magnético giratorio verde



Art. 7480

Sujeción-tobillos-transporte y sistema de cierre a presión





Nota:

Instrucciones de mantenimiento para artículos en piel de oveja, ver página 11

Sistemas de cierre
Art. 1204 - 1417

Sistema de cama
Art. 2203 - 2905

Cintas adicionales
Art. 3110/r - 3745

Sistema de fijación rápida
Art. 4213/r - 4415/r

Sistema móvil
Art. 5204/r - 5745

Sistema de transporte
Art. 6040 - 6760

Cinturones de asiento
Art. 7240 - 7780

Accesorios / Piel de oveja
Art. 8010 - 8029



SEGUFIX® -Piel de oveja para cama

Art. 8010

Características:

- agradable para la piel
- efecto regulador de temperatura durante todo el año
- absorción rápida de la humedad resultante de la transpiración
- medida: apróx. 900 mm x 1800 mm

Consta de:

1 SEGUFIX® -Piel de oveja para cama



SEGUFIX® -Piel de oveja para silla de ruedas

Art. 8011

Características:

- agradable para la piel
- efecto regulador de temperatura durante todo el año
- absorción rápida de la humedad resultante de la transpiración
- medida: apróx. 400 mm x 1000 mm

Consta de:

1 SEGUFIX® -Piel de oveja para silla de ruedas



SEGUFIX® -Piel de oveja para el SEGUFIX® -Estándar

Art. 8012

Únicamente para ser utilizado en combinación con:

- SEGUFIX® -Estándar con cinta-perineal (página 16)
- SEGUFIX® -Estándar con fijador-muslos (página 18)

Características:

- agradable para la piel
- efecto regulador de temperatura durante todo el año
- absorción rápida de la humedad resultante de la transpiración



Consta de:

1 SEGUFIX® -Piel de oveja para SEGUFIX® -Estándar

Tallas: S / M / L
(seleccionar acorde a la talla del SEGUFIX® -Estándar)

Talla	Longitud forro	Circunferencia cintura
S	960 mm	520 - 820 mm
M	1310 mm	800 - 1200 mm
L	1620 mm	1160 - 1560 mm



Ejemplo de aplicación con:
SEGUFIX® -Estándar con cinta-perineal y
SEGUFIX® -Cierre magnético negro

Tabla: medidas aproximadas



Información sobre pieles medicinales de oveja

La piel de oveja natural es muy agradable para la piel ya que las sustancias que la componen son muy similares a las de la piel humana; por ende resultan de gran ayuda para pieles sensibles e irritadas.

El personal médico recomienda la piel de oveja natural en caso de llagas, alergias, nervios irritados, nerviosismo, en problemas de circulación, de reuma, de ciática, dolor de espalda y de extremidades.

Otras propiedades positivas de las pieles medicinales

- Absorción inmediata de la humedad resultante de la transpiración devolviéndola al aire siete veces más rápido que los productos sintéticos. Las toxinas corporales, las cuales son expulsadas a través del sudor, son neutralizadas en la piel de oveja.
- La piel de oveja es un producto natural y como tal posee un efecto de autolimpieza.
- La piel de oveja proporciona un calor natural motivo por el cual nunca se siente fría. La respiración de la piel humana está garantizada.
- Adecuada tanto para el verano como para el invierno por su efecto regulador de la temperatura.
- No se carga de electricidad estática.



SEGUFIX®-Bolso de transporte

Art. 8014

Uso previsto:

- ofrece suficiente espacio para guardar los productos del Sistema-SEGUFIX® en las diferentes áreas y secciones
- protege los productos SEGUFIX®
- práctica para el transporte p. ej. entre secciones y/o para cursos de capacitación del personal

Características:

- compartimentos separados en ambos lados
- bandolera (removible) y asas
- medida: apróx. 620 mm x 320 mm x 280 mm
- color: negro (SEGUFIX®-Logo blanco)

Consta de:

1 SEGUFIX®-Bolso de transporte



SEGUFIX®-Maletín de guardia

Art. 8015

Uso previsto:

- al alcance de la mano para una intervención rápida
- protege los productos SEGUFIX®
- para guardar los productos SEGUFIX® de forma ordenada (p. ej. un SEGUFIX®-Sistema de transporte, un Sistema de fijación rápida etc.)
- ahorrador de espacio, permite almacenar varios maletines uno encima de otro

Características:

- compartimentos para: el SEGUFIX®-Manual, cierres y llaves adicionales etc.
- bandolera (removible) y asa
- maletín acolchado
- medida: apróx. 420 mm x 260 mm x 100 mm
- color: rojo / negro (SEGUFIX®-Logo blanco)

Consta de:

1 SEGUFIX®-Maletín de guardia
(sin contenido)



SEGUFIX®-Ayuda para sentarse

Art. 8016

Uso previsto:

- permite incorporarse protegiendo la columna vertebral
- longitud total: apróx. 1600 mm
(posibilidad de encogimiento del 8 %, cintas no prelavadas)

Consta de:

1 SEGUFIX®-Ayuda para sentarse





Consta de:
1 Antideslizante

Antideslizante

Art. 8017

Uso previsto:

- impide que pacientes débiles deslicen del asiento
- altamente recomendado su uso en sillas, sillones, sillas de ruedas, camas, sillas de oficinas etc.
- permite únicamente un desplazamiento en dirección flecha, ¡no más «deslizar» del asiento!
- no es adecuado para pacientes agitados
- el Antideslizante no funciona en estado mojado

Características:

- no utilizar suavizantes o cloro / lejía
- no puede ser desinfectado
- después del lavado, la base antideslizante debe estar completamente seca antes de ser utilizada
- apropiado para la secadora (temperaturas bajas)
- peso corporal máximo: 150 kg
- medida: apróx. 370 mm x 430 mm



SEGUFIX®-Red de lavado

Art. 8022

Uso previsto:

- protege el material de los cinturones durante el lavado

medida: apróx. 600 mm x 400 mm

Consta de:

- 1 SEGUFIX®-Red de lavado
con freno de cuerda





SEGUFIX®

Desde hace más de 50 años:

Competencia

Experiencia

Calidad

Estabilidad

Innovación

Derechos de autor / Aviso de copyright ©

© SEGUFIX®-Bandagen, 2025

Quedan reservados todos los derechos.
La reproducción o difusión a través de sistemas electrónicos/soportes de datos/Internet – en su totalidad o parcialmente – sólo se permitirá con el previo consentimiento expreso por escrito.

Todas las consultas deben ser dirigidas a:
SEGUFIX®-Bandagen
Das Humane System GmbH & Co. KG
Allerbeeksring 33
D-21266 Jesteburg, Alemania

Aplican nuestras condiciones generales de contratación y de suministro:
www.segufix.com/PDFs/AGBs/Condiciones_generales.pdf

Fabricaciones personalizadas por encargo.

Queda reservado el derecho a realizar cambios en los productos.

Nos reservamos el derecho a realizar cualquier modificación de nuestros productos con relación a las ilustraciones y descripciones del presente catálogo.

Velcro® es una marca registrada de Velcro® Industries B.V.

SEGUFIX® es una marca registrada de
SEGUFIX®-Bandagen, Das Humane System
GmbH & Co. KG.

Edición 18 - 2025-03

SEGUFIX®-Bandagen

Das Humane System GmbH & Co. KG
Casilla de Correo 1142 · D-21262 Jesteburg
Allerbeeksring 33 · D-21266 Jesteburg
ALEMANIA

Teléfono: +49 (0) 4183 500-0
Telefax: +49 (0) 4183 500-200
E-mail: export@segufix.de
www.segufix.com
www.segufix-shop.com