

Art. 5243 / 5343 / 5443

Fixateur-civière-épaules, comprend :

- 1 SEGUFIX® Fixateur-civière-épaules
- 3 SEGUFIX® Fermetures
- 1 SEGUFIX® Clé



Tailles : S / M / L

Pièce détachée : Art. 5143*

3 systèmes de fermeture au choix :

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| | | |
| 1206 / 1208 | 1306 / 1308 | 1406 / 1408 |
| Art. 5243 | Art. 5343 | Art. 5443 |
| Art. 2224 | Art. 2324 | Art. 2424 |
| Art. 5245 | Art. 5345 | Art. 5445 |

Art. 2224 / 2324 / 2424

Attache-poignets rallongée, comprend :

- 2 SEGUFIX® Fixateurs-poignets longs
- 4 SEGUFIX® Fermetures
- 1 SEGUFIX® Clé

Tailles : S / M / L / XL (XL : uniquement en « r »)

Modèles : modèle de base / r

Pièce détachée : Art. 2124* (pour une main)

Art. 2724 Attache-poignets Velcro® rallongée

2 SEGUFIX® Fixateurs-poignets Velcro® longs (avec fermeture à passant métallique)

Taille : M

Pièce détachée : Art. 2824 (pour une main)



Art. 5245 / 5345 / 5445

Fixateur-civière-chevilles, comprend :

- 1 SEGUFIX® Fixateur-civière-chevilles (pour les deux pieds)
- 2 SEGUFIX® Fermetures (sans clé)


Taille : M

Pièce détachée : Art. 5145* (pour les deux pieds)

Art. 5745 Positionnement-civière-chevilles Velcro®

1 SEGUFIX® Positionnement-civière-chevilles Velcro® (pour les deux pieds, avec fermeture à passant métallique)

Taille : M

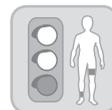

*Pièce détachée : livraison sans fermeture ni clé

Les articles de la SEGUFIX® Fixation-civière (étiquette rouge/jaune/verte) font partie du SEGUFIX® Système mobile et se composent d'un mélange de coton et fibranne.



| Sommaire | Page |
|---|--------|
| SEGUFIX® Fixation-civière – mode d'emploi, mensurations | 2 - 5 |
| SEGUFIX® Systèmes de fermeture | 6 - 7 |
| SEGUFIX® Consignes de sécurité | 8 - 11 |
| Consignes d'entretien / Mentions légales | 12 |

| Caractéristiques des produits | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| N° d'art. Modèle | Caractéristiques des produits |
| ... | modèle de base |
| .../r | renforcée, pour l'usage plus intense |



Exemple : Art. 5243, 2724, 5745

3 systèmes de fermeture au choix :

Art. 5243 / 5343 / 5443 (épaules)

Art. 2224 / 2324 / 2424 (poignets)

Art. 5245 / 5345 / 5445 (chevilles)

Art. 5243 / 5343 / 5443

(épaules : 3 systèmes de fermeture au choix)

Art. 2724 (poignets avec fermeture Velcro®)

Art. 5745 (chevilles avec fermeture Velcro®)



Utilisation :

- fixation des patients sur civières et brancards, utilisable aussi par les services de secours
- n'utilisez le SEGUFIX® Fixateur-civière-épaules que combiné avec la SEGUFIX® Attache-poignets rallongée et le SEGUFIX® Fixateur-civière-chevilles / le SEGUFIX® Positionnement-civière-chevilles Velcro®
- application pour mesures privatives de liberté

Mode d'emploi des articles suivants :

Art. 5243 / 5343 / 5443 (épaules) / **Art. 5143** (pièce détachée épaule)

Art. 5245 / 5345 / 5445 / 5745 (cheville) / **Art. 5145** (pièce détachée cheville)

Pour les fermetures et clés : voir pages 6 et 7

La SEGUFIX® Fixation-civière est appropriée pour des civières avec une largeur de 400 à 800 mm. Installation à la civière par passant métallique.


Installer le SEGUFIX® Fixateur-civière-épaules/-chevilles à la civière :

- Posez le fixateur-civière sur la civière de façon que les sangles-épaules (C) se retrouvent en direction de la tête du lit resp. les fixateurs-chevilles en-dessous.
- Passez la sangle d'attache à la civière (A) de l'intérieur vers l'extérieur autour du cadre de la civière ou de la partie mobile de la civière. Veillez à placer la sangle d'attache à un endroit d'où elle ne peut pas glisser. Tendez la sangle d'attache en tirant vers le bas, remontez-la autour du cadre et fermez-la fermeture à passant métallique (1) (voir Fig. 4).
- Installez la deuxième sangle d'attache de la même façon.
- Veillez à la bonne tenue des fermetures à passant métallique.
- Veillez à ce que les sangles d'attache à la civière soient attachées bien tendues.





Placer le SEGUFIX® Fixateur-civière-épaules au patient :

- Passez les socles des trois fermetures (2) dans les œillets correspondants de la poche du socle de telle sorte qu'ils soient orientés vers le haut lorsque la sangle-thorax est fermée.
- Placez la sangle-thorax (B) autour de la poitrine et posez-la avec l'un des œillets sur l'un des trois socles des fermetures (2). Les nombreux œillets permettent un réglage individuel selon le tour de poitrine du patient.
- Fermez la fermeture (2) centrale.
- Passez les deux sangles-épaules (C) par dessus les épaules et chaque sangle avec l'un des œillets sur les deux socles externes des fermetures (2) de la sangle-thorax (B).
- Fermez les deux fermetures (2) externes.
- Il faut veiller à ce que les sangles (C) ne gênent pas le patient dans le cou ou dans la nuque.
- Les sangles-thorax doivent être fixées bien tendues, mais sans gêner la respiration.

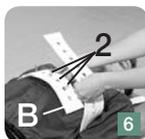

Placer le SEGUFIX® Fixateur-civière-chevilles au patient :

- Passez le socle de la fermeture (3) dans l'œillet de la poche du socle.
- Placez la partie capitonnée du fixateur-cheville (D) fermement autour de la cheville du patient. Le Velcro® à l'extrémité du fixateur empêche tout glissement après sa fermeture.
- Passez la sangle à œillets (E) par le passant métallique (4) et puis en sens inverse de retour.
- Posez la sangle à œillets du fixateur-cheville (E) bien tendue avec l'un des œillets sur le socle de la fermeture (3).
- Fermez la fermeture (3).
- Le fixateur-cheville doit être bien serré, sans cependant bloquer la circulation sanguine.
- Placez le deuxième fixateur-cheville de la même façon.
- Tirez sur toutes les fermetures pour en vérifier le bon enclenchement.

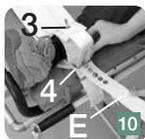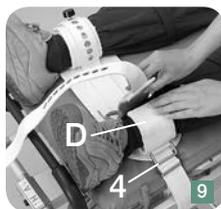

Placer le SEGUFIX® Positionnement-civière-chevilles Velcro® :

- Placez la partie capitonnée du fixateur-cheville (D) fermement autour de la cheville du patient. Le Velcro® à l'extrémité du fixateur empêche tout glissement après sa fermeture.
- Passez l'extrémité de la sangle (E) par le passant métallique (4) et puis en sens inverse de retour.
- Serrez la sangle du fixateur-cheville (E) et fermez la fermeture à passant métallique (4) (voir Fig. 4).
- Le fixateur-cheville doit être bien serré, sans cependant bloquer la circulation sanguine.
- Placez le deuxième fixateur-cheville de la même façon.
- Vérifiez la bonne tenue des fermetures à passant métallique.





Mode d'emploi des articles n° 2224 / 2324 / 2424 et 2124

Pour les fermetures et clés : voir pages 6 et 7

Installer la SEGUFIX® Attache-poignets rallongée :


- Passez le socle de la fermeture (1 et 2) dans les œillets des poches du socle.
- Placez la partie capitonnée du fixateur-poignet (A) fermement autour du poignet du patient. Le Velcro® à l'extrémité du fixateur empêche tout glissement après sa fermeture.
- Passez la sangle à œillets (B) par le passant métallique du fixateur-poignet et puis en sens inverse par-dessus ce même passant.
- Posez la sangle à œillets (B) bien tirée avec l'un des œillets sur le socle de la fermeture (1) et fermez la fermeture.
- Passez la sangle d'attache (C) de l'intérieur vers l'extérieur autour du cadre de la civière. Veillez à placer la sangle à un endroit d'où elle ne peut pas glisser.
- Posez l'un des œillets sur le socle de la fermeture (2) et fermez la fermeture. Les nombreux œillets permettent un réglage individuel.
- Installez le deuxième fixateur-poignet, en cas de besoin, de la même façon.
- Le fixateur-poignet doit être bien serré, sans cependant bloquer la circulation sanguine.
- Tirez sur toutes les fermetures pour en vérifier le bon enclenchement.

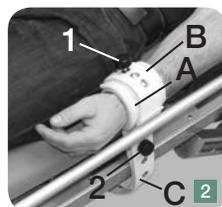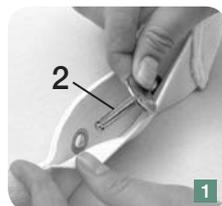

Mode d'emploi de l'article n° 2724 avec fermeture Velcro®

Installer la SEGUFIX® Attache-poignets Velcro® rallongée :

- Placez la partie capitonnée du fixateur-poignet (A) fermement autour du poignet du patient.
- Passez la sangle (B) (voir Fig. 4 page 2) par le passant métallique (1) et serrez-la.
- Passez la sangle d'attache (C) de l'intérieur vers l'extérieur autour du cadre de la civière. Veillez à placer la sangle à un endroit d'où elle ne peut pas glisser.
- Passez l'extrémité de la sangle d'attache par la fermeture à passant métallique (2) et serrez-la.
- Le fixateur-poignet doit être bien serré, sans cependant bloquer la circulation sanguine.
- Installez le deuxième fixateur-poignet, en cas de besoin, de la même façon.
- Vérifier la bonne tenue des fermetures à passant métallique.

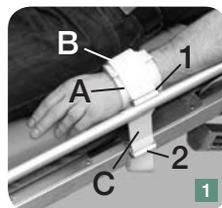

Retirer la SEGUFIX® Fixation-civière :

Déblocage des systèmes de fermeture : voir page 7.


- Ouvrez toutes les fermetures (1, 2, 3) ou les fermetures à passant métallique (1, 2, 4) et détachez les sangles.
- Retirez ensuite les sangles de la civière et du patient.

Veillez à respecter les SEGUFIX® Consignes de sécurité (voir pages 8 – 11).

Avertissement : Lisez les conseils de sécurité avant l'utilisation de la SEGUFIX® Fixation-civière.

- La Fixation-civière n'empêche pas la civière de se renverser ni de se mettre à rouler.
- Utilisez le SEGUFIX® Fixateur-civière-épaules uniquement en appliquant la SEGUFIX® Attache-poignets rallongée et le SEGUFIX® Fixateur-civière-chevilles / le SEGUFIX® Positionnement-civière-chevilles Velcro®.
- L'utilisation de la SEGUFIX® Attache-poignets Velcro® rallongée et le SEGUFIX® Fixateur-civière-chevilles Velcro® ne sont pas une fixation en tant que telle.
Attention : Les modèles avec fermeture Velcro® sont considérés comme une fixation si le patient ne peut pas ouvrir la sangle seul.
- Pour éviter toute détérioration et limitation de la fonctionnalité des produits, veillez à ce que les sangles d'attache et les mécanismes des civières ne se gênent pas mutuellement.

La fixation-civière est appropriée pour les **civière d'une largeur** de 400 mm à 800 mm maximale. Attache à la civière par fermeture à passant métallique.

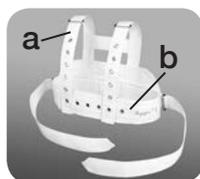

voir tableau ci-dessous :
sangle a /
sangle b

| SEGUFIX® Fixation-civière | | | | | | | | | Largeur de la sangle | | Longueur de la sangle | | Tour |
|--|--------|------|--------|------|--------|------|----------------|------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| taille | Art. | kg | Art. | kg | Art. | kg | pièce détachée | kg | mm | mm | mm | mm | mm |
| SEGUFIX® Fixateur-civière-épaules | | | | | | | | | sangle | | sangle | | poitrine |
| | | | | | | | | | a | b | a | b | |
| S | 5243 | 0,69 | 5343 | 0,84 | 5443 | 0,84 | 5143 | 0,63 | 45 | 75 | 500 | 810 | 430 - 740 |
| M | 5243 | 0,74 | 5343 | 0,89 | 5443 | 0,89 | 5143 | 0,70 | 45 | 75 | 605 | 1230 | 740 - 1140 |
| L | 5243 | 0,82 | 5343 | 0,97 | 5443 | 0,97 | 5143 | 0,70 | 45 | 75 | 710 | 1450 | 920 - 1320 |
| SEGUFIX® Attache-poignets rallongée | | | | | | | | | | | | poignet | |
| S | 2224 | 0,62 | 2324 | 0,70 | 2424 | 0,70 | 2124 | 0,27 | 45 | | 1360 | | 120 - 190 |
| M | 2224 | 0,67 | 2324 | 0,75 | 2424 | 0,75 | 2124 | 0,29 | 45 | | 1360 | | 160 - 240 |
| L | 2224 | 0,72 | 2324 | 0,80 | 2424 | 0,80 | 2124 | 0,30 | 45 | | 1490 | | 220 - 290 |
| S | 2224/r | 0,66 | 2324/r | 0,75 | 2424/r | 0,75 | 2124/r | 0,28 | 45 | | 1360 | | 120 - 190 |
| M | 2224/r | 0,71 | 2324/r | 0,79 | 2424/r | 0,79 | 2124/r | 0,30 | 45 | | 1360 | | 160 - 240 |
| L | 2224/r | 0,77 | 2324/r | 0,85 | 2424/r | 0,85 | 2124/r | 0,33 | 45 | | 1490 | | 220 - 290 |
| XL | 2224/r | 0,83 | 2324/r | 0,91 | 2424/r | 0,91 | 2124/r | 0,36 | 45 | | 1640 | | 260 - 340 |
| SEGUFIX® Attache-poignets Velcro® rallongée | | | | | | | | | | | | poignet | |
| M | 2724 | 0,48 | - | - | - | - | 2824 | 0,24 | 45 | | 1490 | | 160 - 240 |
| SEGUFIX® Fixateur-civière-chevilles | | | | | | | | | | | | cheville | |
| M | 5245 | 0,68 | 5345 | 0,78 | 5445 | 0,78 | 5145 | 0,64 | 45 | | 1400 | | 220 - 300 |
| SEGUFIX® Positionnement-civière-chevilles Velcro® | | | | | | | | | | | | cheville | |
| M | 5745 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | 45 | | 1400 | | 220 - 300 |

Tableau : mensurations approx. – rétrécissement possible de jusqu'à 8 % (sangles livrées non prélevées)



SEGUFIX® Système de fermeture magnétique noire

| Article | Comprend : |
|---------|--|
| 1206 | 1 Bouton magnétique noir / segufix.com 1 Socle en métal |
| 1208 | 1 Clé magnétique rouge |
| 1204 | 1 Bouton magnétique noir / segufix.com |
| 1205 | 1 Socle en métal |
| 1209 | 1 Clé magnétique rouge avec porte-clé |



SEGUFIX® Système de fermeture rotative magnétique verte brevetée

| Article | Comprend : |
|---------|---|
| 1306 | 1 Bouton rotatif magnétique vert breveté 1 Socle carré |
| 1308 | 1 Clé rotative magnétique jaune brevetée |
| 1304 | 1 Bouton rotatif magnétique vert breveté |
| 1305 | 1 Socle carré |



Système de fermeture à fiches

| Article | Comprend : |
|---------|--|
| 1406 | 1 Bouton de la fermeture à fiches 1 Socle pour le bouton de la fermeture à fiches |
| 1408 | 1 Clé pour fermeture à fiches |
| 1404 | 1 Bouton de la fermeture à fiches |
| 1405 | 1 Socle pour le bouton de la fermeture à fiches |

Utilisation des fermetures :

Pour le verrouillage sûr des systèmes SEGUFIX®.

Utilisation des clés :

Pour l'ouverture rapide des fermetures.

Attention :

Les éléments des différents systèmes de fermeture ne sont pas compatibles entre eux.



Avertissement : Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser les systèmes de fermeture.

- Ne pas immerger les fermetures, sinon elles ne peuvent plus fonctionner.
- Les fermetures et les clés ne doivent pas être lavées (par ex. avec les sangles).
- Avant toute utilisation, vérifier le bon fonctionnement des fermetures.
- Vérifier que la tête du socle n'est pas détériorée (usure, arrondissement et aplatissement).
- Après fermeture, le bouton est enclenché sur le socle et ne peut plus être retiré.
- Les fermetures (art. 1206) ne peuvent être débloquées que s'il y a un peu de jeu entre les points d'accrochage supérieur et inférieur du bouton et la sangle. N'utilisez donc au maximum que 4 épaisseurs de sangle par fermeture. Exception : les produits marqués « r » ou « f » sont plus épais et ne permettent que 3 sangles superposées.

La fermeture SEGUFIX® rotative magnétique verte brevetée (art. 1306) permet l'utilisation de 4 sangles maximum. La fermeture à fiches (art. 1406) permet l'utilisation de 3 sangles maximum.

- Si une clé n'ouvre plus une fermeture abîmée, couper la ceinture avec des ciseaux ou un coupe-courroie.
- Informations supplémentaires sous www.segufix.com ou www.segufix-shop.com

Mode d'emploi des SEGUFIX® Systèmes de fermeture :

Art. 1206 / 1208 (SEGUFIX® Système de fermeture magnétique noire)

Art. 1306 / 1308 (SEGUFIX® Système de fermeture rotative magnétique verte brevetée)

Art. 1406 / 1408 (Système de fermeture à fiches)

Ouvrir les fermetures :

Art. 1206 / 1208

- Placez la clé magnétique rouge sur la fermeture magnétique noire en appuyant légèrement.
- Soulevez ensemble la clé magnétique et le bouton magnétique du socle en métal (Fig. 1).



Art. 1306 / 1308

- Placez la clé rotative magnétique jaune brevetée sur la fermeture rotative magnétique verte brevetée.
- Tournez la clé rotative magnétique jaune brevetée pour débloquer la fermeture rotative magnétique verte brevetée. Soulevez ensemble la clé et le bouton rotatif magnétique vert breveté du socle carré (Fig. 3).



Art. 1406 / 1408

- Insérez la clé pour fermeture à fiches dans les ouvertures du bouton de la fermeture à fiches et appuyez légèrement pour déverrouiller le système de fermeture à fiches.
- Soulevez ensemble la clé pour fermeture à fiches et le bouton de la fermeture à fiches du socle (Fig. 2).



Fermer les fermetures :

- Posez l'ouverture du bouton de la fermeture sur le socle correspondant et enclenchez.
- Vérifiez si le bouton est bien enclenché. Il doit être impossible de le retirer.

Attention : Les éléments des différents systèmes de fermeture ne sont pas compatibles entre eux.

Veillez à respecter les SEGUFIX® Consignes de sécurité (voir pages 8 – 11).

Les consignes de sécurité suivantes, ainsi que les modes d'emploi, ne sont valables que pour les produits SEGUFIX® originaux. N'utilisez pas les systèmes SEGUFIX® avant d'avoir lu et compris les consignes de sécurité et les modes d'emploi actuels. Gardez ces documents en un endroit sûr et facile d'accès.

N'utilisez les produits SEGUFIX® qu'avec les modes d'emploi correspondants.

L'utilisation incorrecte du système SEGUFIX® peut entraîner des lésions sérieuses aux conséquences fatales. La sécurité de votre patient dépend donc de l'utilisation correcte du système SEGUFIX®.

1. Conditions d'emploi

L'entreprise appliquant les produits SEGUFIX® doit respecter les dispositions légales et les prescriptions particulières nationales. Respectez les règlements internes pour l'immobilisation médicale de votre lieu de travail, le protocole de fixation et les lois locales actuelles de votre département. Respectez les modes d'emploi des produits SEGUFIX®.

Les produits SEGUFIX® ne doivent être utilisés que par le personnel soignant entraîné et qualifié. Les dispositions juridiques et les prescriptions médicales doivent être strictement respectées ! Le médecin traitant doit s'assurer que l'état du patient permet l'application du système SEGUFIX®.

2. Utilisation

Les produits SEGUFIX® ne doivent être utilisés qu'à une fin médicale.

3. Ecartez tout objet dangereux

Ecartez hors de portée du patient tous les objets avec lesquels il pourrait se blesser ou avec lesquels il pourrait abîmer les ceintures (lunettes, bijoux, objets tranchants).

4. Inspection du système des ceintures avant chaque utilisation



Vérifiez les ceintures avant leur utilisation. Assurez-vous que les coutures ne sont pas endommagées, qu'elles ne sont pas déchirées et que les œillets ne sont pas abîmés. Des produits endommagés peuvent limiter le fonctionnement et causer des blessures. N'utilisez aucun produit présentant des détériorations.

5. Les fermetures ne doivent pas être sous tension

Les fermetures (art. 1206) ne peuvent être débloquées que s'il y a un peu de jeu entre les points d'accrochage supérieur et inférieur du bouton et la sangle. La mobilité du bouton noir doit être assurée pour permettre l'ouverture de la fermeture (voir mode d'emploi art. 1206). N'utilisez donc au maximum que 4 épaisseurs de sangle par fermeture. Exception : les produits marqués « r » ou « f » sont plus épais et ne permettent que 3 sangles superposées. La fermeture SEGUFIX® rotative magnétique verte brevetée (art. 1306) permet l'utilisation de 4 sangles maximum. La fermeture à fiches (art. 1406) permet l'utilisation de 3 sangles maximum.



6. Utilisation des fixations latérales

N'utilisez le système SEGUFIX® Standard avec sangle-entrejambe ou avec fixateurs-cuisses qu'avec les fixations latérales. Sans ces dernières, le patient fixé avec la sangle abdominale peut se tourner sur lui-même ou glisser par dessus le bord du lit risquant une compression thoracique pouvant entraîner la mort.

Il arrive que les patients parviennent au-dessus du bord du lit bien que les fixations latérales soient installées et bien que les barrières soient relevées. Ce problème peut être évité en recourant à d'autres moyens de fixation.

Important : Passez les fixations latérales – avant de les attacher – par les passants de la sangle large de lit qui repose sur le matelas (voir illustration du mode d'emploi).

7. Consignes impératives pour les lits, sièges et civières

- Les produits SEGUFIX® ne doivent être utilisés qu'avec des lits et sièges sûrs ou des civières permettant une mise en place conforme au mode d'emploi.
- Les produits SEGUFIX® sont à installer de façon à ce qu'ils ne puissent pas glisser.
- Pour éviter toute détérioration et limitation de la fonctionnalité des produits, veillez à ce que les sangles de fixation des lits, les mécanismes des lits, les matelas et les matelas à pression alternée etc., les civières ou les sièges ne se gênent pas mutuellement.
- Les points d'appui choisis ne présentent aucune arête vive.
- Les produits SEGUFIX® n'empêchent pas le basculement ou le déplacement des lits, sièges ou civières.

Voir dans ce contexte :

Normes pour les lits : DIN EN 60601-2-52

Normes pour les fauteuils roulants : DIN EN 12182 et DIN EN 12183

8. Les barrières doivent être remontées



Pour éviter les accidents durant la fixation, il est impératif de relever les barrières du lit (exception : fixation à cinq points).

Attention : en cas de barrières en deux morceaux, utilisez une protection qui empêchera le patient de glisser entre les deux demi-barrières. Avec les barrières en deux parties, il est cependant possible que le patient glisse à travers l'ouverture bien qu'il soit attaché.

Attention : risque de compression thoracique.

9. Surveillance du patient immobilisé



Tout patient immobilisé demande une surveillance régulière. Un patient agressif, agité, anxieux ou qui pourrait s'étouffer ou qui présente un risque d'aspiration requiert une surveillance ininterrompue.

10. Vérifiez le système des fermetures avant chaque utilisation



Vérifiez que les fermetures SEGUFIX® magnétiques noires / segufix.com, les fermetures SEGUFIX® rotatives magnétiques vertes et les fermetures à fiches, les passants métalliques, les clics et le Velcro® fonctionnent bien et se ferment correctement. N'immergez pas les fermetures. Elles ne fonctionneraient plus ou ne seraient plus fiables. S'il n'est plus possible d'ouvrir les fermetures endommagées avec l'aimant, il faut couper les sangles avec des ciseaux ou un coupe-courroie. Examinez la tête du socle (arrondissement / aplatissement).

11. Mise en garde concernant les stimulateurs cardiaques



Veillez à respecter une distance de sécurité de 10 cm entre le stimulateur cardiaque et les fermetures / les clés magnétiques. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une tachycardie. Système alternatif : fermeture à fiches. Veuillez respecter les directives des fabricants d'implants pour tout ce qui concerne le préjudice possible porté par la force des aimants aux patients porteurs de ces implants.

12. Vérifiez la bonne attache des fixations

Vérifiez régulièrement que les fixations sont correctement attachées. Les sangles doivent être montées bien tendues au cadre du lit ou à la partie réglable à hauteur de la tête ou du pied du lit et ne doivent pas glisser.

13. N'utilisez que des produits SEGUFIX® originaux

Pour des raisons de sécurité technique, les produits SEGUFIX® ne doivent être ni modifiés, ni combinés avec d'autres produits. Les droits à prestation de garantie s'éteindront en cas d'inobservation de la présente consigne.

14. Utilisation du système SEGUFIX® dans les véhicules



Dans les véhicules, les ceintures de transport SEGUFIX® ne remplacent pas les ceintures de sécurité rendues obligatoires par la loi (ceinture à 3 points et ceinture pelvienne). Les ceintures de transport SEGUFIX® doivent seulement être utilisées à titre additionnel de support ou de contention. En cas d'urgence, assurez-vous que le patient peut être secouru rapidement (coupe-courroies bien visibles et à portée de main).

15. Sûre, mais pas serrée

La fixation doit être bien ajustée, mais ne doit gêner ni la respiration, ni la circulation sanguine du patient. Une fixation trop lâche peut être dangereuse pour le patient. Vérifiez régulièrement la bonne tenue de la fixation.



16. Stockage

Afin de prolonger la durée de vie des sangles et des fermetures, stockez-les dans un endroit sec et à l'abri de la lumière à température normale de 20 °C.

17. Inflammabilité des sangles du système de lit SEGUFIX®



Selon la norme DIN EN 71-2, section 4.3, les sangles sont ininflammables. Selon la norme DIN 75200, la vitesse de combustion est nulle. Il est clair que les produits ne doivent être ni mis en contact avec une cigarette allumée, ni exposés à une flamme ouverte, ce qui pourrait être préjudiciable à la santé et produire des dommages durables.

18. Choisissez toujours la bonne taille

Veillez à bien choisir la taille du produit en fonction de la taille du patient et de sa corpulence (voir les tableaux des tailles). Des produits trop grands ou trop petits entravent le confort et la sécurité du patient.

19. Collecte et traitement des emballages

Les emballages (papier, plastique) et les produits endommagés sont à éliminer selon les prescriptions particulières nationales.

20. Déclaration de conformité

Vous trouverez la déclaration de conformité sur internet sous :
www.segufix.com/conformity_fr.php

21. Recommandation de l'expert pour technologie médicale pour éviter les accidents :

(Pr Dr U. Boenick, Université Technique de Berlin)

1. Installez les fixations latérales.
2. Remontez les barrières entières des lits (exception : fixation à cinq points).
3. Il peut être nécessaire d'installer d'autres moyens de fixation pour empêcher absolument le patient de sortir du lit.

22. Important avant l'utilisation

- Contrôle visuel et test de verrouillage des fermetures
- Contrôle visuel des sangles, œillets, boucles en tissu, fermetures Velcro®, fermetures clic, passants métalliques etc.
- Utilisation seulement selon indication suffisante
- Vérification des conditions légales

Consignes d'entretien

- **Les ceintures SEGUFIX®** (blanc nature), des produits d'un mélange de coton et fibranne, sont lavables en machine jusqu'à 95 °C. Des températures inférieures et un sac à linge prolongent la durée de vie des produits. Le matériau des ceintures ne supporte ni les tunnels de lavage, ni les repasseuses mécaniques, ni les glaceuses (qui pourraient abîmer les œillets). Les ceintures ne sont pas prélavées, un rétrécissement de jusqu'à 8 % est possible. Emmagazinez les ceintures à sec.
Lessive : non agressive, pas d'adoucisseur, pas de javellisant.
Séchoir : cycle doux à température basse, de préférence dans un sac à linge.
Désinfection : un procédé chimio-thermique est possible. Un surdosage abîme le matériau des ceintures.
- **Les ceintures de transport SEGUFIX®** (couleur/noires) en polyester sont lavables en machine jusqu'à 30 °C. Le matériau des ceintures ne supporte ni les tunnels de lavage, ni les repasseuses mécaniques, ni les glaceuses (qui pourraient abîmer les œillets). Emmagazinez les ceintures à sec.
Lessive : non agressive, pas d'adoucisseur, pas de javellisant.
Séchoir : cycle doux à température basse, de préférence dans un sac à linge.
- **Les SEGUFIX® Systèmes de fermeture** doivent être retirés avant lavage. Nettoyez/désinfectez les systèmes de fermeture avec un linge humide. Ne les immergez jamais dans un liquide. Les systèmes de fermeture qui ont été lavés avec les sangles ne fonctionneront plus ou ne seront plus fiables.
- **Les fermetures Velcro®** doivent être fermées avant le lavage et le séchage en machine pour qu'elles restent sans peluches. Passez de temps en temps une brosse dure sur la fermeture Velcro® pour retirer les peluches. Même en utilisation normale, les fermetures Velcro® forment de la peluche qui peut réduire leur adhérence. Avant chaque utilisation, vérifiez la force d'adhérence du Velcro®.
- **La durabilité** dépend de l'intensité d'utilisation ; pour la prolonger, nous conseillons une procédure de nettoyage douce (détergent/sac à linge).

Edition 16 · 2020-08

© by SEGUFIX®-Bandagen, 2020

Nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables dans la version disponible sous www.segufix.com/PDFs/AGBs/CGV.pdf

Les couleurs et les formes véritables peuvent différer légèrement des photos du fait d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Tous droits réservés. Reproduction ou distribution – même partielle – par système

électronique/support de données interdite, sauf permission expresse et écrite préalable.

Toutes les demandes sont à adresser à :

SEGUFIX®-Bandagen

Das Humane System GmbH & Co. KG

Allerbeeksring 33 · D-21266 Jesteburg
Allemagne

Téléphone : +49 (0) 41.83.50.00

Télécopie : +49 (0) 41.83.50.02.00

E-mail : export@segufix.de

www.segufix.com · www.segufix-shop.com